


Wat is nieuw in Genie 2?

2018.2

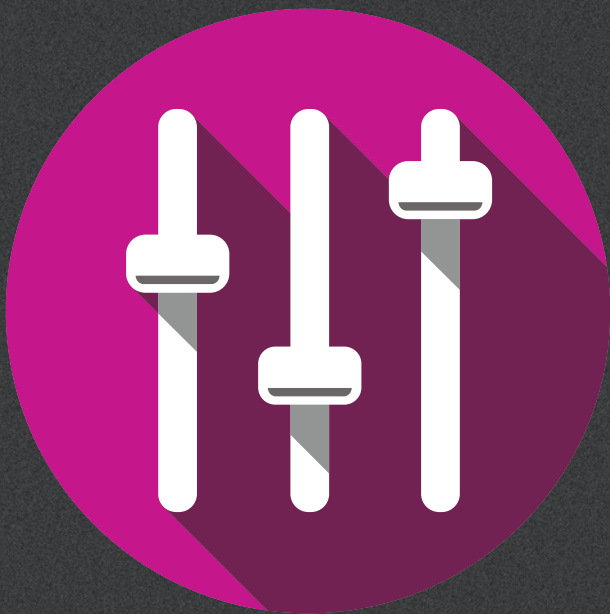

Inleiding

Genie 2 is bijgewerkt met een reeks nieuwe functies en verbeteringen. De volgende pagina's bevatten een kort overzicht.

Wat is nieuw in Genie 2?

Ondersteuning voor nieuwe producten

De volgende nieuwe producten worden ondersteund:

- Custom Oticon Opn 1, Opn 2 en Opn 3-toestellen: IIC, CIC, ITC, ITE HS en ITE FS
- Oticon Siya 1 en Siya 2 miniRITE, miniRITE-T, BTE PP, BTE en Custom toestellen: IIC, CIC, ITC, ITE HS en ITE FS
- De Amigo R12G2 FM-ontvanger en FM/DAI-instellingen worden ondersteund voor BTE13 PP

Zie voor meer informatie de technische databladeren voor Oticon Opn, Oticon Siya en Oticon Amiga die beschikbaar zijn via Genie 2.

LET OP

Nieuwe hoortoestellen die u ontvangt hebben mogelijk een nieuwe firmwareversie die niet compatibel is met uw oude Genie 2-installatie. U dient daarom altijd de nieuwste Genie 2-software te installeren wanneer u het ontvangt van Oticon.

I Nieuwe aanpasfuncties

Genie 2 is bijgewerkt met nieuwe functies voor ondersteuning van Oticon-hoortoestellen, beschikbaar voor alle prestatieniveaus:

- Instellingen overzetten
- REM AutoFit met Verifit® *LINK*
- Aanpassingen in het aanpasproces

Eerder aangeschafte Oticon Opn-hoortoestellen moeten worden geüpgraded voor ondersteuning van de nieuwe aanpasfuncties. Dit wordt gedaan door de Oticon Firmware Updater te gebruiken, die de hoortoestellen bijwerkt naar de nieuwste firmware die is gepubliceerd in 2018.2.



I Instellingen overzetten

Met Instellingen overzetten kunnen geselecteerde versterkingsgerelateerde instellingen worden overgezet van het ene hoortoestel naar het andere. Dit is mogelijk tussen verschillende typen hoortoestellen, aanpasniveaus en productfamilies op het Velox-platform.

Met dit hulpmiddel kunt u de instellingen van programma 1 overzetten naar een ander type hoortoestel. Dit is van toepassing op versterking, MPO, de huidige stap in Adaptatiemanager, Voorkeur Zacht geluid en Voorkeur Helderheid. Deze instellingen worden zo goed mogelijk gekopieerd afhankelijk van het doelhoortoestel en worden aangepast aan de nieuwe akoestische configuratie. Alle overige instellingen blijven zoals voorgeschreven voor het doeltoestel.

U kunt het hulpmiddel vinden in de Aanpas-stap door op Hulpmiddelen te klikken en vervolgens op Instellingen overzetten. Zie de helpbestanden voor informatie over het gebruik van Instellingen overzetten.



| REM AutoFit met Verifit® LINK

REM AutoFit is een intuïtief hulpmiddel waarmee u het REM-verificatieproces efficiënt kunt uitvoeren met hoge kwaliteit en controle over de aanpassing.

REM AutoFit werkt met meerdere REM-systemen, waaronder Interacoustics, MedRx en Otometrics. Audioscan is nu toegevoegd aan de lijst. Alle metingen worden echter uitgevoerd vanuit Genie 2 in een geregelde workflow en REM AutoFit past de versterking van het hoortoestel automatisch aan het doel aan. Verdere handmatige afstemming en meting is ook mogelijk.

REM AutoFit met Verifit LINK is compatibel met zowel Verifit 1 (serienummer 2070 en hoger) als Verifit 2 via een netwerkverbinding. Het bevat enkele belangrijke functies zoals de spraakverstaanbaarheidindex, MPO-meting en couplergebaseerde meting (S-REM).

| Aanpassingen in het aanpasproces

- Simulatieknop in de familiestap. Eerder werd een gesimuleerde aanpassing gestart door een hoortoestelfamilie te selecteren. Om de intuïtiviteit te verbeteren, is nu een simulatieknop geïntroduceerd.
- De verbindingsflow is geoptimaliseerd door het venster voor opsporen en de luidsprekerselectie te combineren, zodat er minder kliks nodig zijn voor een aanpassing.

CE 0543

186992NL / 2018.06.05



Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Denemarken
+45 3917 7100

CE 0543