

Kullanım Kılavuzu

TV Adapter 3.0



Giriş

Bu kitapçık, yeni TV Adaptörünüzün kullanımı ve bakımı konusunda size rehberlik eder. Uyarı bölümünü de dahil ederek lütfen bu kitapçığı dikkatlice okuyunuz. Bu sizin TV Adaptöründen en üst seviyede yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

TV Adaptörünüzün kullanımı ile ilgili ek sorularınız olursa, lütfen işitme cihazı uzmanınıza danışın.

| **Hakkında** | Kurulum | Günlük kullanım | Uyarılar | Daha fazla bilgi |

Bu kitapçık, farklı bölümlerine kolayca ulaşmanıza yardımcı olmak için bir gezinti çubuğu içerir.

Kullanım amacı

Kullanım amacı	TV Adaptörü 3.0, TV veya diğer elektronik ses aygıtlarından işitme cihazlarına kablosuz ses aktaran bir verici olarak tasarlanmıştır.
Kullanım endikasyonları	Kullanım endikasyonları yoktur
Hedef kullanıcı	Yetişkin ve 36 aydan büyük çocuklar.
Kullanım ortamı	Ev koşulları.
Kontraendikasyonlar	Kontraendikasyonları yoktur.
Klinik yararlar	İşitme cihazının klinik yararlarına bakın.

İçindikeler tablosu

Hakkında

Paket içeriği	6
TV Adaptörüne genel bakış	8

Başlangıç

Kurulum	10
TV Adaptörünü yerleştirmek	11
TV Adaptörünü bir güç çıkışına bağlamak	12
TV Adaptörünü TV'ye bağlamak	14
TOSLINK kullanarak bağlamak	16
RCA kullanarak bağlamak	18
Mini jak adaptörünü kullanarak bağlamak	20
SCART kullanarak bağlamak	22
TV Adaptörünü işitme cihazlarınızla eşleştirmek	24

Günlük kullanım

İşitme cihazlarınızı kullanarak TV'nin sesini başlatın	26
İşitme cihazlarınızı kullanarak TV'nin sesini kapatın	27

İşitme cihazlarınızı kullanarak ses kontrolü	28
İşitme cihazı Uzaktan Kumandasını kullanarak TV sesini başlatın	30
Uzaktan Kumanda kullanarak TV sesini kapatın	31
Uzaktan Kumanda kullanarak ses kontrolü	32
Uzaktan Kumanda kullanarak sessize alın	33
Oticon On App ile TV Adaptörü kullanımı	34
Birden fazla kullanıcı	35
Birden fazla TV Adaptörü	36
Bir kullanıcıyı çıkarma/eşleştirmeleri temizleme	38
Temizlik ve bakım	39

Uyarılar

Uyarılar	40
----------	----

Daha fazla bilgi

Kullanım Koşulları	42
Uluslararası Garanti	43
Teknik Bilgi	44

Paket içeriđi

TV Adaptörünün paketlenme kutusu ařađıdaki öđelerden oluşur:



TV Adaptörü



Bu kitapçık
(Kullanım kılavuzu)



Güç kaynađı



RCA kablosu

Mini jak adaptörü



TOSLINK


TV Adaptörüne genel bakış

Mod	Güç göstergesi	TV göstergesi
Güç açık, herhangi bir işitme cihazıyla eşleştirilmemiş		
Eşleştirme tamamlandı (30 saniye sabit ışık)		
Güç açık, akış yok		
RCA takılı ve akış sağlıyor		
RCA/Ses girdisi yok		
TOSLINK takılı ve akış sağlıyor (dijital)		
TOSLINK takılı ve akış sağlıyor (geçersiz sinyal)*		
Arıza durumu **		

Işık yok Yanıp söner Soluklaşır Sabit

* Diğer bağlantı girişini deneyin

** İşitme cihazı uzmanınızla irtibata geçin

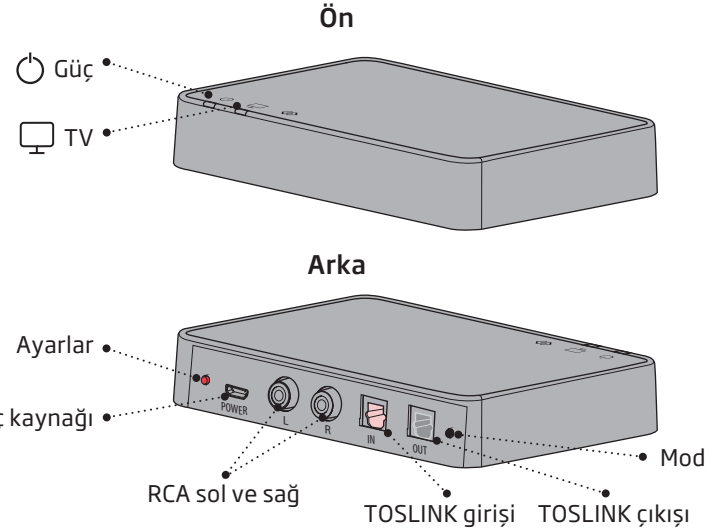

Kurulum


TV Adaptörünün ilk kullanımı

İşitme cihazlarınızı TV'nizle kullanmadan önce, TV Adaptörünün bir güç çıkışına takılması, TV'ye bağlanması ve işitme cihazlarınızla eşleştirilmesi gerekir.

Bu kılavuz TV Adaptörünün kurulumunu adım adım tarif eder.

TV Adaptörünü yerleştirmek


TV adaptörünü TV'nin yakınına, işitme cihazlarını serbestçe görebilecek şekilde yatay olarak yerleştirin.

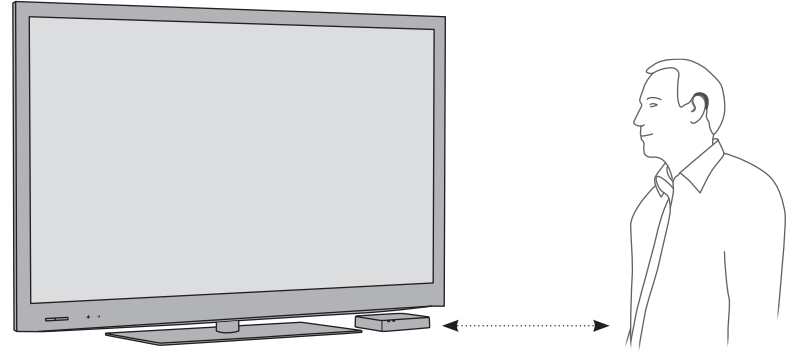

TV Adaptörünü bir güç çıkışına bağlamak

Kutu 1'deki güç girişini kullanın

1. Elektrik kablosunu TV Adaptöründeki (A) "güç" girişine takın.
2. Güç girişini duvardaki elektrik prizine takın (B).
3. Güç kaynağının açık olduğunu kontrol edin; birkaç saniye sonra her iki ışıklı gösterge mavi renkte solarak, işitme cihazlarınızla eşleştirme gerektiğini gösterecektir. Bkz. sayfa 24.

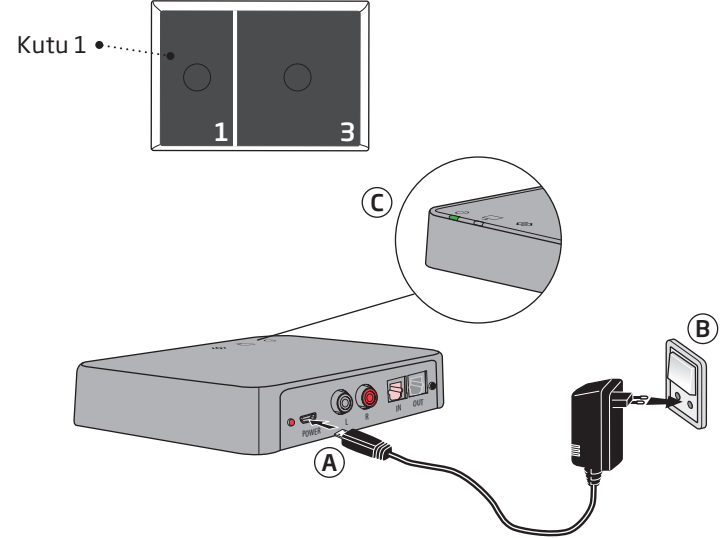

ÖNEMLİ UYARI

TV Adaptörünü şarj ederken 5.0V/1A, CE ve güvenlik işaretli sağlanan orijinal güç kaynağını kullanın.



TV Adaptörünü TV'ye bağlamak

TV Adaptörünü TV'ye dört farklı şekilde bağlayabilirsiniz.


Bağlantı	Sayfa
TOSLINK. Dijital stereo (PCM) veya Dolby® Digital *	16
RCA ses çıkışı L+R	18
Mini jak ses çıkışı (genellikle kulaklık çıkışı)	20
SCART ses çıkışı (L+R)	22

* Dolby, Dolby Laboratories'in tescilli ticari markasıdır.


TOSLINK kullanmanız önerilir.

TV'nize uygun çözümü bulmak için lütfen bir sonraki sayfalara bakınız.


TOSLINK (s. 16)

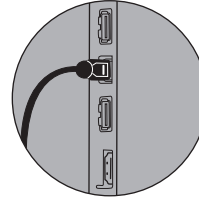


RCA (s. 18)

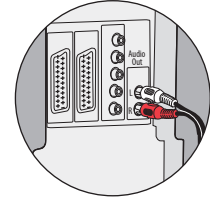

Mini jak (s. 20)

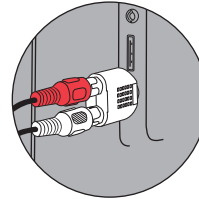

SCART (s. 22)

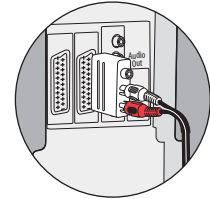


TOSLINK kullanarak bağlamak

1. Kutu no. 3'teki TOSLINK kablosunu kullanın (A).
2. Plastik kapağını TOSLINK kablosundan sökün. (B)
3. TOSLINK kablosunu TV'nizdeki/ev sineması sisteminizdeki (C) TOSLINK çıkışına bağlayın.
4. TOSLINK kablosunu TV adaptöründeki pembe TOSLINK girişine (D) bağlayın.
5. TOSLINK çıkışı (E), harici Dolby® Dekoderleri ve surround ses sistemleri gibi diğer TOSLINK cihazlarına bağlanmak için kullanılabilir.
6. TV Adaptörünü işitme cihazınızla eşleştirmek için sayfa 24'e bakın.

Not

TV'nizi, DVD oynatıcınızı veya ev sinema sisteminizi, TOSLINK çıkışında doğru ses çıkışı olacak şekilde yapılandırmanız gerekebilir.

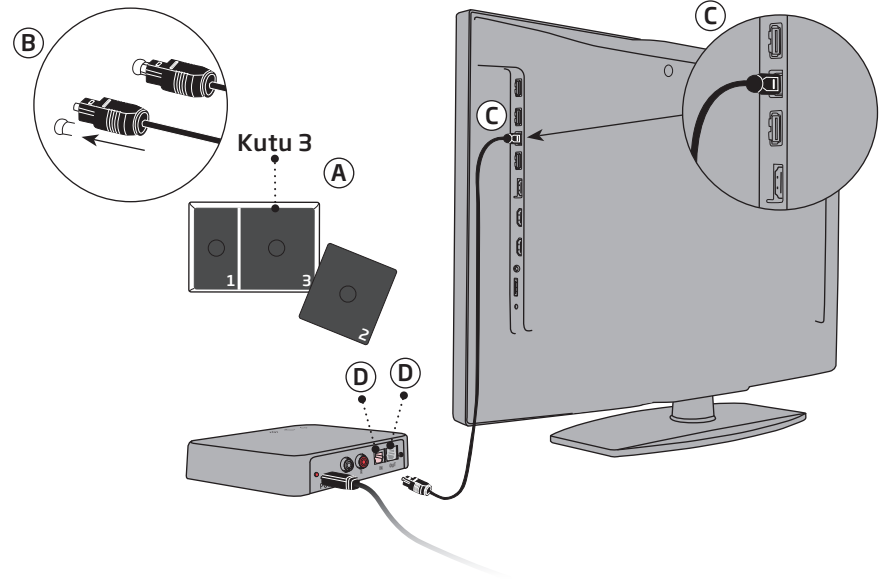


RCA kullanarak bağlamak

1. Kutu no. 2'deki RCA kablosunu kullanın (A).
2. RCA kablosunu TV'nizdeki (B) veya ev sineması sisteminizdeki RCA çıkışına bağlayın. (Genellikle "L - R AUDIO OUT" ile işaretlidir ve TV'nin arka veya alt panosunda bulunur.)
3. RCA kablosunu TV Adaptörünün arkasındaki RCA konektörlerine (C) bağlayın.
4. İşitme cihazlarını TV Adaptörüyle eşleştirmek için sayfa 24.'e bakın

Not

TV'nizi, RCA çıkışında doğru ses çıkışı olacak şekilde yapılandırmanız gerekebilir.

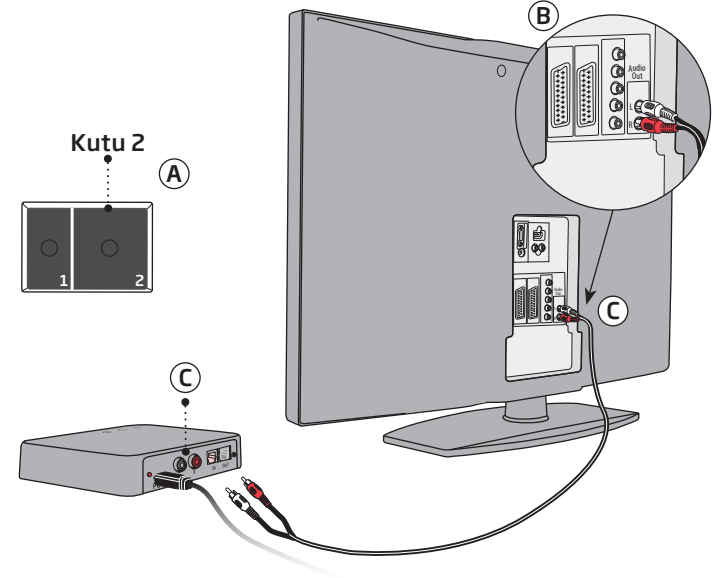


Mini jak adaptörünü kullanarak bağlamak

1. Kutu no. 2'deki mini jak adaptörünü kullanın (A).
2. RCA kablosunu mini jak adaptörüne bağlayın (B).
3. Mini jakı TV'ye bağlayın, bu genellikle kulaklık çıkışıdır (B).
4. RCA kablosunu TV Adaptörünün RCA girişine (C) bağlayın.
5. TV Adaptörünü işitme cihazlarınızla eşleştirmek için sayfa 24.'e bakın

Not

Kulaklık çıkışına bağlandığında TV hoparlörleri sessize alınabilir ve ses sadece işitme cihazları / TV Adaptöründen duyulur.

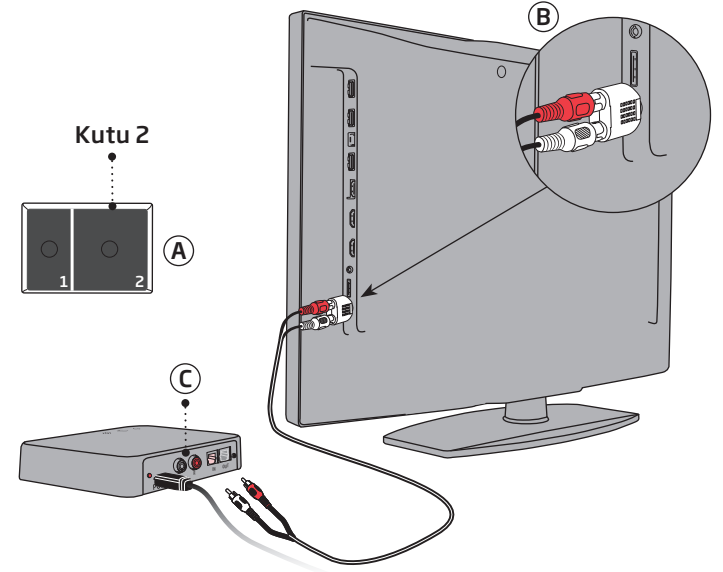


SCART kullanarak bağlamak

1. Bir SCART Adaptörü kullanın* (A).
2. RCA kablosunu SCART Adaptöründeki (B) kırmızı ve beyaz uçlara bağlayın.
3. SCART Adaptörünü TV'nizdeki (C) SCART çıkışına bağlayın.
4. RCA kablosunu TV Adaptörünün RCA girişine (D) bağlayın.
5. TV Adaptörünü işitme cihazlarınızla eşleştirmek için sayfa 24'e bakın.

Not

SCART konektöründeki ses çıkışı TV'de seçili olan kaynağa bağlı olabilir. Örneğin, bazı TV'ler sadece TV sesini SCART çıkışında kullanabilecektir (örneğin bağlı bir DVD oynatıcıdan gelen ses).

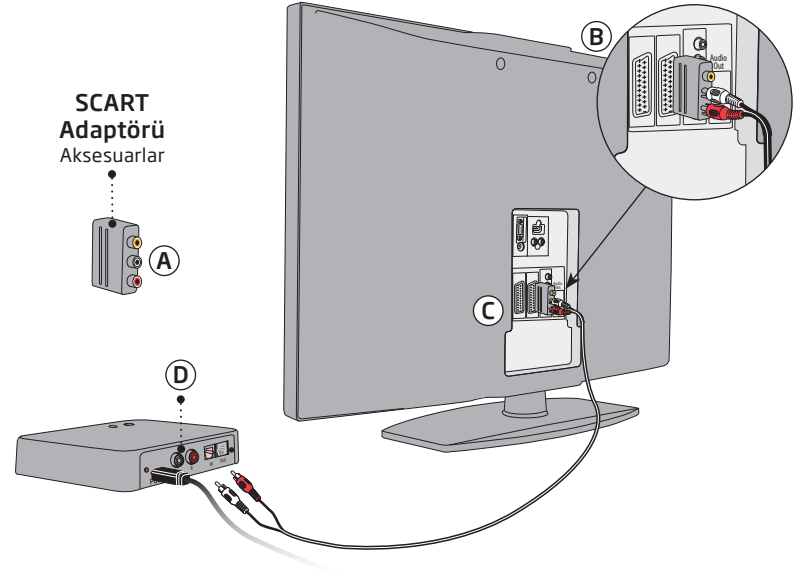

* SCART Adaptörü, bu paket içeriğinde olmayan bir aksesuardır. Eğer bir SCART Adaptörüne ihtiyacınız varsa, lütfen işitme uzmanınızla iletişime geçin.

TV Adaptörünü işitme cihazlarınızla eşleştirmek

TV adaptörü kullanılmadan önce işitme cihazınızla eşleştirilmesi gerekir.


Eşleştirmenin sadece bir kez yapılması gerekir ve yaklaşık 20-60 saniye sürer.

Not

Bu TV Adaptörü istediğiniz kadar fazla işitme cihazı ile eşleştirilebilir. Tüm kullanıcılar aynı sesi duyabilir olacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen sayfa 38'e bakın.

ÖNEMLİ UYARI

Size özel işitme cihazınızın işlevselliği hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen işitme cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

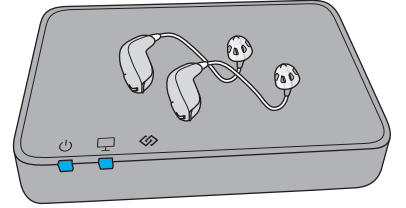

TV adaptörün açık olduğundan emin olun.

Eşleştirme modunu etkinleştirmek için işitme cihazlarını yeniden çalıştırın.

İşitme cihazlarını nasıl kapatıp, yeniden açacağını görmek için işitme cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Her iki işitme cihazını TV Adaptörünün yakınına veya üzerine yerleştirin.

Güç göstergesi ve TV göstergesi yaklaşık 30 saniye boyunca mavi olduğunda, eşleştirme tamamlanmış olur.

TV Adaptörü	Açıklama
	Eşleştirme tamamlandı

İşitme cihazlarınızı kullanarak TV'nin sesini başlatın

Bir kere bir TV Adaptörü işitme cihazlarınızla eşleştirildikten sonra, bir işitme cihazı programı olarak kullanılabilir. TV'yi dinlemek için, sadece işitme cihazınızın program düğmesine basıp bekleyerek programı değiştirin.

Program sıralaması, işitme cihazınızda mevcut olan programlara bağlı olacaktır.


TV programı seçildiğinde, işitme cihazı program değişiklik bildirimlerinden farklı olarak TV programına geçildiğini bildirir.

ÖNEMLİ UYARI

Size özel işitme cihazınızın işlevselliği hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen işitme cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.


İşitme cihazlarınızı kullanarak TV'nin sesini kapatın

TV'den gelen sesi durdurmak için sadece kullanmak istediğiniz işitme cihazı programını seçin.

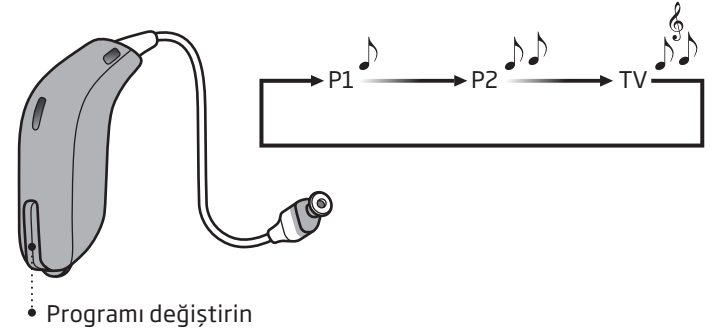

İşitme cihazlarınızı kullanarak ses kontrolü

Her iki işitme cihazında TV'nin ses seviyesini ayarlamak için işitme cihazınızdaki ses düğmesini kullanın. Sesi ayarlamak için aşağı veya yukarı kısaca basıp bırakın. Daha fazla ayarlama için art arda kısaca basın.

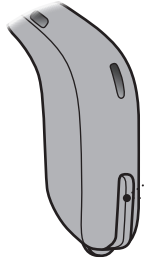

- SAĞ işitme cihazı üzerine kısaca basmak sesi yükseltir.
- SOL işitme cihazı üzerine kısaca basmak sesi azaltır.

Not

İşitme cihazlarındaki TV ses seviyesi normalde TV'nin Uzaktan Kumandası ile yapılan ses seviyesi ayarlarından etkilenmez.

ÖNEMLİ UYARI

Size özel işitme cihazınızın işlevselliği hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen işitme cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

İşitme cihazı Uzaktan Kumandasını kullanarak TV sesini başlatın

Uzaktan Kumanda, kablosuz işitme cihazlarınızın isteğe bağlı bir aksesuarıdır.


Bir kere bir TV Adaptörü işitme cihazınızla eşleştirildikten sonra, işitme cihazı programı olarak kullanılabilir. TV'yi dinlemek için sadece program değiştirme düğmesine basın ve programı değiştirin (A).

Program sıralaması, işitme cihazınızda mevcut olan programlara bağlı olacaktır.

TV programı seçildikten sonra, program bildirimlerinden farklı olan bir TV program bildirimi duyulur.


Uzaktan Kumanda kullanarak TV sesini kapatın

TV'den gelen sesi durdurmak için sadece kullanmak istediğiniz işitme cihazı programını seçin.

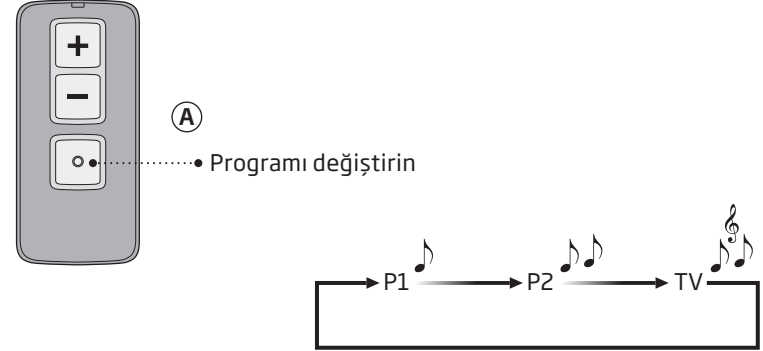

Uzaktan Kumanda kullanarak ses kontrolü

TV ses seviyesini her iki işitme cihazında ayarlamak için ses seviyesi düğmelerini kullanın.

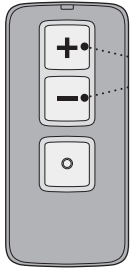


- Sesi ayarlamak için aşağı veya yukarı kısaca basıp bırakın. Daha fazla ayarlama için art arda kısaca basın.

Not

İşitme cihazlarındaki TV ses seviyesi normalde TV'nin Uzaktan Kumandası ile yapılan ses seviyesi ayarlarından etkilenmez.

Uzaktan Kumanda kullanarak sessize alın

TV izlerken sadece TV sesinin duyulması için işitme cihazlarındaki mikrofonlarını kapatabilirsiniz.

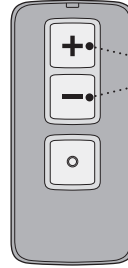

- Sesi azaltma düğmesine basın ve çevresindeki sesler sessize alınana kadar yaklaşık 3 saniye basılı tutun. İşitme cihazlarındaki mikrofonların artık sessize alındığını belirten bir onay sinyali duyarsınız.

Sessizden çıkartmak için doğrudan sesi artırma veya azaltma düğmesine kısaca basıp bırakın.

Not

Sessiz durum ve ses seviyesi işlevleri opsiyoneldir ve işitme uzmanınız tarafından özelleştirilebilir.

Oticon On App ile TV Adaptörü kullanımı

TV Adaptöründen gelen ses, Oticon ON App kullanılarak da kontrol edilebilir.

Lütfen daha fazla bilgi için "Oticon ON App Android ve iOS için" kullanım kılavuzuna bakın.

Birden fazla kullanıcı

Bir TV Adaptöründen gelen sesi sınırsız sayıda işitme cihazı kullanıcısı dinleyebilir.

İşitme cihazlarını TV Adaptörüyle sayfa 24'te tarif edildiği şekilde eşleştirin.

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad, iPod ve iPod touch Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in bir servis markasıdır. Android, Google Play ve Google Play logosu Google LLC kuruluşunun ticari markalarıdır.

Birden fazla TV Adaptörü

İşitme cihazlarınız 4 TV Adaptörüyle eşleştirilebilir. "TV Programı" moduna geçtiğinizde, işitme cihazlarınız kapsama alanı dahilindeki son bağlı TV Adaptörüne otomatik olarak bağlanacaktır. Örneğin: sesini doğrudan işitme cihazlarınıza aktararak seyrettiğiniz TV.

İstediğinizden başka bir TV'den ses duyarsanız, şunları yapabilirsiniz:


- 1a) Sesini duymak istemediğiniz TV'yi KAPATIN ve 5 dakika bekleyin, veya
- 1b) Güç kablosu ile olan bağlantısını keserek TV Adaptörün aktardığı sesi KAPATIN
- 2) İşitme cihazınızdaki "TV Program"ından çıkın
- 3) Bağlanmak istediğiniz ve hala AÇIK olan TV ve TV Adaptörün kapsama alanında olduğunuzdan emin olun.
- 4) İşitme cihazlarınızda "TV Program"ına girin
- 5) İşitme cihazlarınız şimdi doğru TV ve TV Adaptörüne bağlı olacaktır.



- 6) KAPATTIĞINIZ TV'yi başka biri izlemek isterse, 5 dakika sonra onu tekrar açabilir. AÇMADAN önce 5 dakika beklemek istemezseniz, 1b adımını seçmelisiniz ve 5. adımdan hemen sonra güç kablosu tekrar takılabilir.

Bir kullanıcıyı çıkarma/eşleştirmeleri temizleme

Bir kullanıcıyı TV Adaptörünüzden çıkartmak için sistemi sıfırlayın ve gerekli işitme cihazlarını yeniden eşleştirin.

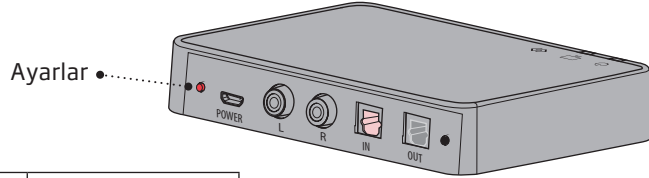1. Sistem sıfırlama: Ayarlar düğmesine basın ve 5 saniyeden fazla basılı tutun
2. Göstergeler, eşleşme olmadığını göstermek için mavi olarak soluklaşır
3. Gerekli cihazları yeniden eşleştirme (bakın sayfa 24)



TV Adaptörü	Açıklama
	Eşleşme yok
	Soluklaşır

Temizlik ve bakım

TV Adaptörünü temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

ÖNEMLİ UYARI

TV Adaptörü asla su veya başka bir sıvıyla yıkanmamalı veya bunlara batırılmamalıdır.

Uyarılar

Kişisel güvenliğiniz ve doğru kullanımı sağlamak için TV Adaptörünüzü kullanmadan önce kendinizi aşağıdaki genel uyarılar hakkında bilgilendirmelisiniz. TV Adaptörünüzü kullanırken veya kullanımından kaynaklı beklenmedik işlem veya olaylar yaşadığınızda işitme uzmanınıza danışın. İşitme uzmanınız sorunun çözümü ile ilgili size yardımcı olacaktır ve eğer gerekirse üreticisine ve ulusal makamlara durumu raporlayacaktır.

Yangın tehlikeleri

TV Adaptörünüzün güç kaynağı, normal kullanım koşullarında yangına neden olabilecek enerjiye sahip değildir.

Parazit

TV Adaptörünüz, uluslararası standartların en katı kuralları ile uyumlu olacak şekilde zorlu testlere tabi tutulmuştur. Buna rağmen TV Adaptörünüz ve diğer aygıtlar arasında parazit oluşabilir. Bu durum oluşursa TV Adaptörü ve parazit oluşan cihaz arasındaki mesafeyi artırın.

Harici ekipmana bağlantı

Harici bir ekipmana yardımcı bir giriş kablosu ile bağlandığında TV Adaptörün kullanım güvenliği harici sinyal kaynağı tarafından belirlenir. Duvar prizine takılı harici bir ekipmana bağlandığında, bu ekipman IEC-62368-1 veya eşdeğer güvenlik standartlarıyla uyumlu olmalıdır.

Uyumsuz ve tedarik edilmeyen aksesuarlar

Sadece üretici tarafından sağlanan aksesuarları, dönüştürücüleri veya kabloları kullanın. Uyumsuz aksesuarlar aygıtınızın elektro manyetik uyumluluğunda (EMC) azalmaya sebep olabilir.

Kullanım Koşulları

Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: +5°C ile +40°C arasında Nem: %15 ile % 93 bağıl nem, yoğunlaşmamış Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa
Saklama ve taşıma koşulları	Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır: Sıcaklık: -25 °C ile +70 °C arasında Nem: %15 ile % 93 bağıl nem, yoğunlaşmamış Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

Uluslararası garanti

TV adaptörünüzü, teslimat tarihinden itibaren 12 aylık bir dönem için üreticisi tarafından sağlanan uluslararası bir sınırlı garanti kapsamındadır. Bu sınırlı garanti sadece cihazın kendisinde bulunan üretim ve malzeme hatalarını kapsar, ancak örneğin pil, kablo, güç kaynağı vs. gibi aksesuarları kapsamaz. Bu aygıtın yanlış kullanım ve bakımı, aşırı kullanımı, kazalar, yetkisiz servislerce onarılması, paslandırıcı koşullara maruz kalması, cihazın içine yabancı madde girişine bağlı hasar veya yanlış ayarlardan kaynaklanan sorunlar, sınırlı garanti kapsamının DIŞINDA olup, onu geçersiz kılabilir. Yukarıdaki garanti tüketici mallarının satışına ilişkin ulusal mevzuat kapsamında sahip

olabileceğiniz yasal haklarınızı etkilemez. İşitme uzmanınız, bu sınırlı garantinin şartlarını aşan bir garanti vermiş olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi için ona başvurun.

Servis gerektiğinde

TV adaptörünüzü, ufak sorun ve ayarlarını hemen çözebilecek olan işitme cihazı uzmanınıza götürün.

Teknik bilgi

Model adı TVA3

TV Adaptörü, her ikisi de 2.4 GHz ISM bandında çalışan Bluetooth Low Energy (BLE) ve tescilli kısa mesafe telsiz teknolojisine sahip bir radyo alıcı-vericisine sahiptir.

Radyo vericisi zayıftır ve her zaman 17 dBm toplam yayılma gücüne eşit 50mW 'ın altındadır. TV Adaptörü, radyo vericileri, elektromanyetik uyumluluk ve insan maruziyeti ile ilgili uluslararası standartlara uygundur.

TV Adaptöründe mevcut sınırlı alan nedeniyle, ilgili onay işaretleri bu kitapçıkta bulunabilir.

Daha fazla bilgi www.oticon.global üzerindeki Teknik Veri sayfalarında bulunabilir.

ABD ve Kanada

Bu cihaz, aşağıdaki gibi sertifikalıdır:

FCC Kimliği: ZACAHTVA3
IC: 11936A-TVA3

Bu cihaz, FCC kuralların 15. bölümüne ve Kanada Endüstrisinin lisanstan muaf RSS'lerine uygundur.

Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu cihaz zararlı parazit oluşturmayabilir.
2. Bu cihaz istenmeyen çalışma şekline neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Not

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu B sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 standarına uygundur.

Bu ekipmanın FCC yönetmeliğin 15. bölümüne uygun B sınıfı dijital cihaz sınırlamalarıyla uyumlu olduğu test edilerek bulunmuştur. Bu sınırlamalar mesken yapılarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Bu nedenle, eğer kullanım talimatlarına uygun olarak kurulumu yapılmaz ve bu talimatlara uygun olarak kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Bununla birlikte belirtilen kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Eğer bu ekipman TV veya radyo algısında zararlı parazite neden olursa (bu durum, ekipmanı

kapatıp açarak tespit edilebilir), bu paraziti gidermek için kullanıcı, aşağıdaki önlemlerin bir veya birkaçını alması için teşvik edilir:

- Alıcı antenin yerini veya yönünü değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devre çıkışından başka bir devreye bağlayın.
- Tedarikçinizden veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyeninden yardım isteyin.

Üreticisi bu TV adaptörünün 2014/53/EU Direktifinde yer alan temel gereksinimler ve diğer ilgili hükümler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanı, üreticiden temin edilebilir.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.sbohearing.com



Elektronik ekipmanlara ait atıklar yerel düzenlemelere göre atılmalıdır.



Bu kitapçıkta kullanılan simgelerin açıklaması

	Uyarılar Uyarı simgesi ile işaretlenen metin, cihaz kullanılmadan önce okunmalıdır.
	Üretici Ürün, adı ve adresi simgenin yanında bulunan üretici tarafından üretilmiştir. AB Yönergesi 90/385/EEC, 93/42/EEC ve 98/79/EC'de belirtildiği üzere tıbbi cihaz üreticisini gösterir.
	CE işareti Ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/EEC'ye uymaktadır.
	Elektronik atık (WEEE) İşitme cihazlarınızı, aksesuarlarını veya pillerini yerel regülasyonlara göre geri dönüştürün veya atılmaları için onları işitme uzmanınıza iade edin. Elektronik ekipman, atık ve elektriksel ekipman (WEEE) hakkındaki Yönerge 2012/19/EU tarafından kapsamaktadır.
	Mevzuata Uygunluk İşareti (RCM) Bu ürün, Avustralya veya Yeni Zelanda piyasası için sunulan ürünler için elektriksel güvenlik, EMC ve radyo frekansı gereksinimlerini karşılamaktadır.
	Çift izolasyon Ürün güç kaynağının çift yalıtımlı olduğunu gösterir. Bu da, tekli arıza riskinin çok düşük olduğunu, yani tekli arızaların meydana gelmeyeceği anlamına gelir.

Bu kitapçıkta kullanılan simgelerin açıklaması

	Kapalı alanda kullanım Ürünün kapalı alanda kullanıma uygun olduğunu gösterir.
	TwinLink 2.4 GHz Bu cihaz 2.4 GHz alıcı ile Oticon işitme cihazlarına kablosuz sinyal aktarımını destekleyen 2.4 GHz Bluetooth Low Energy (BLE) telsiz teknolojisine sahiptir.
	Medikal Aygıt Bu cihaz medikal bir aygıttır.
	Singapur IMDA etiketi Cihazın Info-Communications Media Development Authority (IMDA) tarafından yayımlanan standartlar ve şartnamelere ve Singapur'da bulunan halka açık iletişim ağlarına uyumlu olduğunu ve yetkilendirilmiş diğer radyo iletişim ağlarıyla frekans girişimine neden olmadığını belirtir.
	Güney Afrika ICASA etiketi Bu cihazın Güney Afrika'da satılmak üzere lisansa sahip olduğunu belirtir.
	Japon TELEC etiketi Sertifikalı radyo ekipmanı için işareti belirtir.
	Brazil ANATEL etiketi Cihazın Brezilya'da sertifikalandırılmış ve onaylanmış olduğunu belirtir.

Düzenleyici ambalaj etiketinde kullanılan simgelerin açıklaması



Kuru tutun

Tıbbi cihazın nemden korunması gerektiğini belirtir.



Dikkat işareti

Uyarılar ve ikazlar için kullanım kılavuzuna bakın.



Seri numarası

Üreticinin seri numarasını belirtir, böylece belirli bir tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.



Katalog numarası

Üreticinin katalog numarasını belirtir, böylece tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.



Güç kaynağı çıkışı

Prizden, elektrikli cihazınıza ne kadar güç gönderildiğini gösterir.

191533TR / 2019.11.05

191533TR / 2019.11.05



oticon
PEOPLE FIRST

191533TR / 2019.11.05