

PRIO 112 BTE VC

PRIO 105 BTE DM VC

PRIO 105 BTE DM

PRIO høreapparater leverer den mest avancerede performance på digitalt startniveau. PRIO leverer et unikt, personligt automatisk program med et udvalg af definerede signalbehandlingsstrategier, der er optimeret for brugerens behov.


Det omfattende produktsortiment, der både indeholder adaptive retningsbestemte og avancerede omnidirektionelle modeller, giver dig mulighed for at dække næsten alle høretab.

Høreapparatets funktioner:

- Præcis signalbehandling i 7 kanaler
- Fuldautomatisk program med 5 Performance prioriteter
- Program til musik, telefon og auditorium
- Adaptive Dualband Directionality (direktionelle modeller)
- Adaptive Noise Reduction
- Soft Noise Management
- Adaptive Feedback Manager
- Adaptive Signal Unification™
- OpenFit™ med lavfrekvent kompensation
- Tracker (datalogging) med forslag til tilpasningen

Personlige funktioner:

- Brugerprofil med Client Lifestyle Priorities
- Letanvendelige og intuitive tilpasningsværktøjer
- Performance prioriteter i det automatiske program
- Individuelt justerbare programmer for DAI/FM og telespole
- Åbne tilpasninger med SPIRA^{flex}
- Komplet produktsortiment med hook eller tyndslanger
- Retningsbestemte og avancerede omnidirektionelle modeller
- Valgfri fjernbetjening til alle modeller
- Moderne BTE farvesortiment

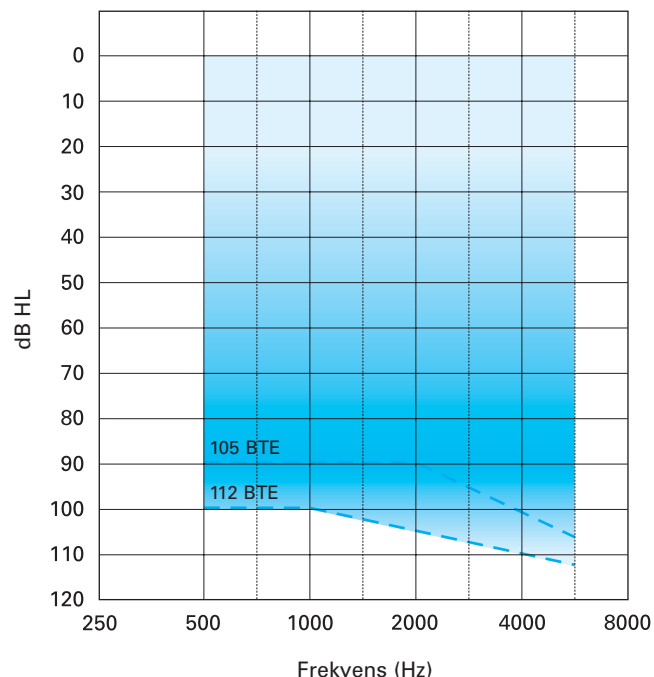

PRIO 112 BTE VC

Et kompakt BTE med omnidirektionel respons for svage til svære høretab. Med størrelse 13 batteri og drejelig volumenkontrol.



PRIO 105 BTE DM VC

Et kompakt BTE med retningsbestemt mikrofonsystem for svage til svære høretab. Med størrelse 13 batteri og drejelig volumenkontrol.



PRIO 105 BTE DM

Et kompakt BTE med retningsbestemt mikrofonsystem for svage til svære høretab. Med størrelse 13 batteri. Uden volumenkontrol.



SPIRA^{flex}

Kosmetiske løsninger og åbne tilpasningsmuligheder med SPIRA^{flex} lyd-slangesystem. Fås til alle PRIO BTE'er.

PRIO information

PRIO BTE								
			112 BTE VC		105 BTE DM VC		105 BTE DM	
			IEC 60118-7 (2cc)	IEC 60118-0 (Ears.)	IEC 60118-7 (2cc)	IEC 60118-0 (Ears.)	IEC 60118-7 (2cc)	IEC 60118-0 (Ears.)
Output	OSPL 90, Peak	dB SPL	133	137*	123	127	123	127
	OSPL 90, 1600 Hz	dB SPL	123	131	112	121	112	121
	HFA OSPL 90, ANSI	dB SPL	126	—	113	—	113	—
Gain	Full-On Gain, Peak	dB	71	76	60	63	60	63
	Full-On Gain, 1600 Hz	dB	61	69	52	58	52	58
	HFA Full-On Gain, ANSI	dB	65	—	53	—	53	—
	Reference Test Gain, IEC	dB	47	55	36	44	36	44
	Reference Test Gain, ANSI	dB	49	—	35	—	35	—
Current	Quiescent Current	mA	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	Operating Current, IEC	mA	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	Operating Current, ANSI	mA	1.4	—	1.2	—	1.2	—
	Battery type		13		13		13	
Distortion	500/800/1600 Hz typ., IEC	%	<2 / <1 / <1	<2 / <1 / <1	<1 / <1 / <1	<1 / <1 / <1	<1 / <1 / <1	<1 / <1 / <1
	500/800/1600 Hz typ., ANSI	%	<2 / <1 / <1	—	<1 / <1 / <1	—	<1 / <1 / <1	—
General Information	Frequency Range, ANSI	Hz	140 – 5200		100 – 5800		100 – 5800	
	Equiv. Input Noise, IEC/ANSI ¹⁾	dB	17/12		15/13		15/13	
	Telecoil 1 mA/m 1600 Hz, IEC	dB SPL	94	101	83	92	83	92
	Telecoil HFA SPLITS, ANSI	dB SPL	109	—	96	—	96	—
Yderligere information	Fjernbetjening		ja		ja		ja	
	Hook		8 dB (std.), 0 dB (opt.)		8 dB (std.), 0 dB (opt.)		8 dB (std.), 0 dB (opt.)	
	Børnehook		8 dB (opt.), 0 dB (opt.)		8 dB (opt.), 0 dB (opt.)		8 dB (opt.), 0 dB (opt.)	
	SPIRA ^{flex} lydslange 0.9/1.3		optional		optional		optional	
	Programmerbar telespole		ja		ja		ja	
	Trykknop		ja		ja		ja	
	FM kommunikation		ja		ja		ja	
	DAI		ja		ja		ja	
	Volumenkontrol		ja		ja		—	

¹⁾ Teknisk data målt med ekspansion svarende til Soft Noise Management niveau 3.

Alle målinger er foretaget i henhold til IEC 60118 hvis intet andet er nævnt. ANSI refererer til ANSI S3.22-2003.


Fuld forstærkning kan indprogrammeres i høreapparaterne via OASIS plus for testformål.

Alle målinger er baseret på hook uden filter.

*Der skal tages særlig hensyn i forbindelse med valg og tilpasning af et høreapparat, hvor det maksimale lydtryksniveau overstiger 132 dB, som målt med en IEC 60711: 1981 øresimulator, da der kan være risiko for at skade brugerens resterende hørelse.

Frekvensrespons



IEC 60118-7 2cc Coupler (IEC 60126)

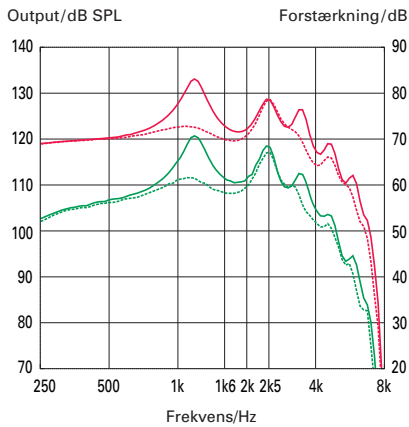

PRIO 112 BTE VC


Output OSPL 90
Full-On Gain

IEC 60118-0 Øresimulator (IEC 60711)

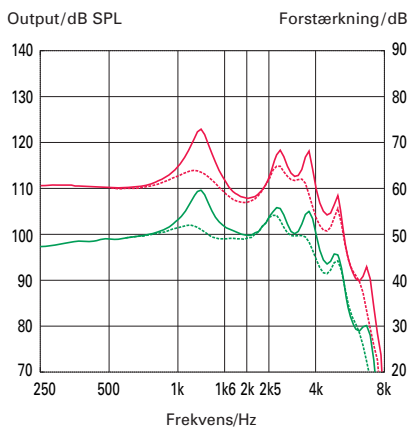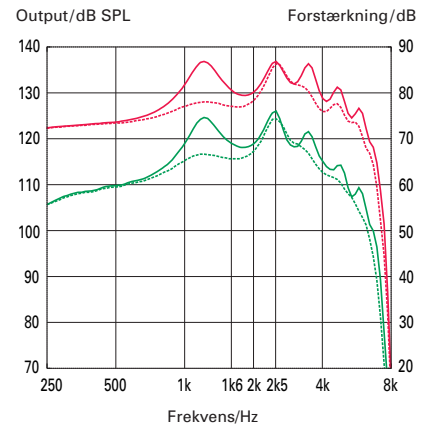

PRIO 105 BTE DM VC PRIO 105 BTE DM

Output OSPL 90
Full-On Gain

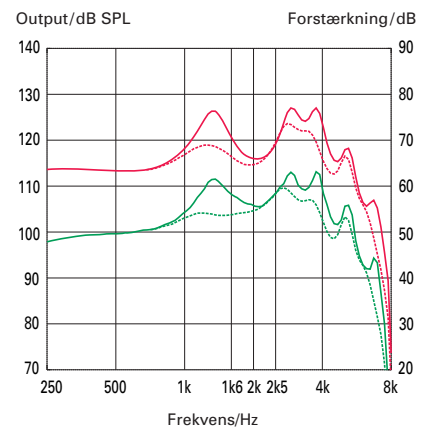

— Målinger baseret på hook uden filter
----- Målinger baseret på hook med filter

PRIO BTE farvesortiment



beige



grå brun



antracit



sort

SPIRA^{flex} flex lydslangesystem



SPIRA^{flex} lydslangesystem

for kosmetiske og åbne tilpasningsløsninger.

Henvi venligst til

SPIRA^{flex} produktbrochure

REF. 951-18-701-00

eller

SPIRA^{flex} produktinformation

REF. 951-18-601-00



SPIRA^{flex} Fitting Kit

Indeholder alle SPIRA^{flex} dele

REF. 890-80-060-00



DAI/FM Adaptere



FMA3 Adapter

Kun til FM kommunikation

REF. 399-50-570-00



DAI3 Adapter

Til forbindelse til Hi-Fi, TV, PC, osv.

REF. 399-50-580-00

Fjernbetjening

Alle PRIO høreapparater kan betjenes med den valgfrie Bernafon fjernbetjening RC-S.

Standard fjernbetjening

REF. 160-02-310-00

Til brugere der har valgt at bruge mere end én fjernbetjening (f.eks. én på kontoret og én derhjemme), bør Custom Remote Control blive bestilt.

Custom Remote Control

REF. 160-02-320-00



Adaptere og kabler

PRIO er programmeret med OASIS plus, Version 7.0 eller senere – et NOAH kompatibelt, MS-Windows baseret PC tilpasningssoftware. Systemkrav: NOAH 2.0 eller NOAH 3.0 med Hi-Pro eller NOAHlink™.



Programmeringsadapter

Programmeringsadapter

REF. 390-01-151-00



Programmeringskabler

Nr. 2, NEW STANDARD (HiPro)

Blå, venstre

REF. 384-20-033-00

Rød, højre

REF. 384-20-032-00

Nr. 2, NEW STANDARD (NOAHlink)

Blå, venstre

REF. 384-20-035-00

Rød, højre



REF. 384-20-034-00

Bemærk: Brug altid nye batterier til programmering.

Tilpasning med OASIS plus

OASIS plus tilbyder et udvidet workflow for at opfylde dine tilpasningsprioriteter:

- **Brugerprofil:** Personlig data, audiogram og livsstilsprofil giver en struktur til at identificere brugerens specifikke kommunikationsbehov. Det er denne information der styrer automatikken i PRIO.
- **Automatisk programallokering:** OASIS plus definerer, hvilke brugerprogrammer der skal anvendes for at dække brugerens livsstilsprioriteter.

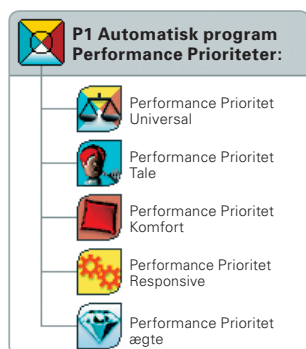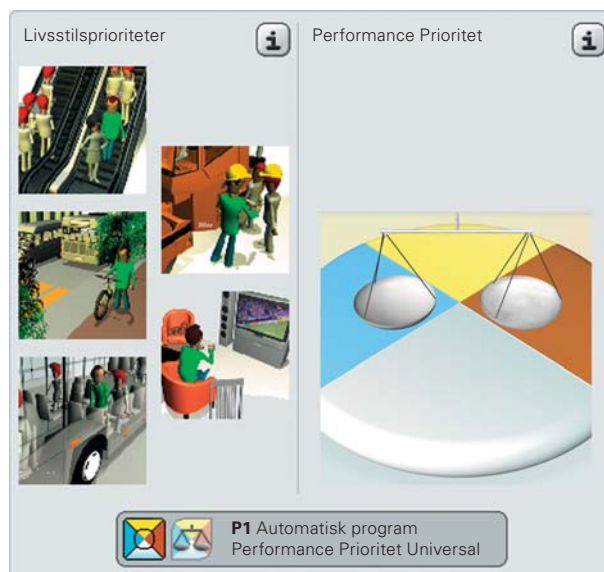

- **Performance Prioriteter:** OASIS plus definerer automatisk Performance Prioritet i det automatiske program.
- **Master Tools:** bruges til finjustering af alle programmer på samme tid.
- **Program Optimering:** tilbyder nogle dedikerede kontroller til finjustering af hvert program.

bernafon[®]
Innovative Hearing Solutions

Manufacturer:

Bernafor AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
Phone +41 (0)31 998 15 15
Fax +41 (0)31 998 15 90

www.bernafor.com

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
Tlf. 3917 7101
Fax 3927 7900
www.bernafor.dk



PRIO 106 BTE DM




PRIO høreapparater leverer den mest avancerede performance på digitalt startniveau. PRIO tilbyder et unikt, personligt automatisk program med et udvalg af definerede signalbehandlingsstrategier, der er optimeret for brugerens behov. PRIO 106 BTE DM er en æstetisk løsning der kan opgraderes og holder i mange år selv ved voksende høretab.

Høreapparat funktioner:

- Præcis signalbehandling i 7 frekvensbånd
- Fuldautomatisk program med 5 performance PRIOriteter
- Musik-, telefon- eller auditorium-program
- Adaptive Dualband Directionality
- Adaptive Noise Reduction
- Soft Noise Management
- Adaptive Feedback Manager
- Adaptive Signal Unification
- OpenFit med lavfrekvent kompensation
- Tracker (Data logging) med forslag til finjustering

Personlige funktioner:

- Brugerprofil med livsstilsprioriteter
- Simple, intuitive finjusteringsværktøjer
- Performance PRIOriteter i det automatiske program
- Individuelt justerbart program til DAI
- Udvalg af SPIRA^{flex} tyndslanger og ørestykker
- Udvalg af retningsbestemt performance
- Valgfri fjernbetjening
- Moderne farvesortiment

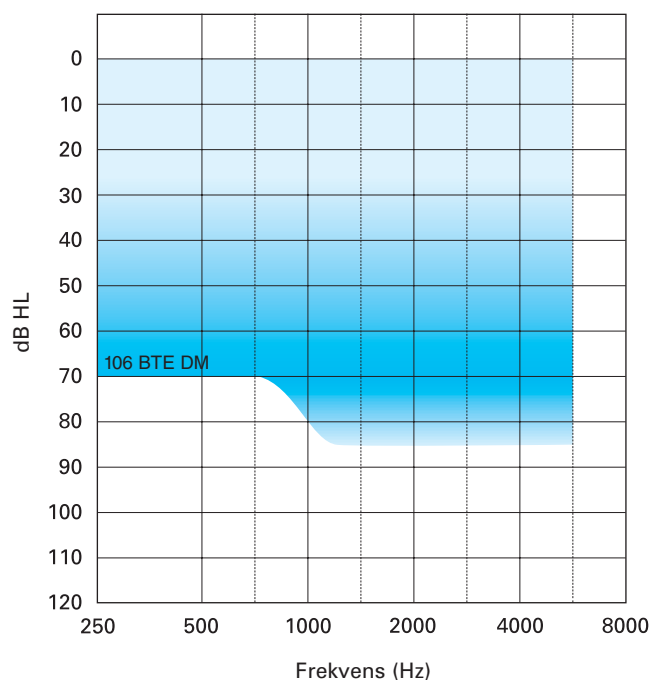

PRIO 106 BTE DM

Et mini BTE apparat med et retningsbestemt mikrofonsystem, størrelse 312 batteri, velegnet for milde til moderate høretab.

PRIO information


PRIO 106 BTE DM						
			SPIRA^{flex} 0.9		SPIRA^{flex} 1.3	
			<i>IEC 60118-7 ANSI S3.22 (2cc)</i>	<i>IEC 60118-0 (Ears.)</i>	<i>IEC 60118-7 ANSI S3.22 (2cc)</i>	<i>IEC 60118-0 (Ears.)</i>
Output	OSPL 90, Peak	dB SPL	117	123	121	126
	OSPL 90, 1600 Hz	dB SPL	102	112	108	118
	HFA OSPL 90	dB SPL	108	—	113	—
Gain	Full-On Gain, Peak	dB	47	54	50	57
	Full-On Gain, 1600 Hz	dB	36	45	41	51
	HFA Full-On Gain	dB	41	—	46	—
	Reference Test Gain	dB	30	37	36	42
Current	Quiescent Current	mA	1.2	1.2	1.2	1.2
	Operating Current	mA	1.3	1.2	1.3	1.2
	Batteritype 312		312			
Yderligere information	Distortion 500/800/1600 Hz typ.	%	<1 / <1 / <1	<1 / <1 / <1	<1 / <1 / <1	<1 / <1 / <1
	Frekvensområde	Hz	100–5000	—	100–5300	—
	Equiv. Input Noise ¹⁾	dB	16	19	12	16
	Fjernbetjening		ja			
	Trykknop		ja			
	DAI		ja			
	Volumenkontrol		via fjernbetjening			

¹⁾ Teknisk data målt med ekspansion svarende til Soft Noise Management niveau 3.

Alle målinger er foretaget i henhold til IEC 60118 og ANSI S3.22-2003 med SPIRA^{flex} slanger #2.
 Fuld forstærkning kan indprogrammeres i høreapparaterne via OASIS plus for testformål.

Frekvensrespons

IEC 60118-7 2cc Coupler (IEC 60318-5¹⁾)

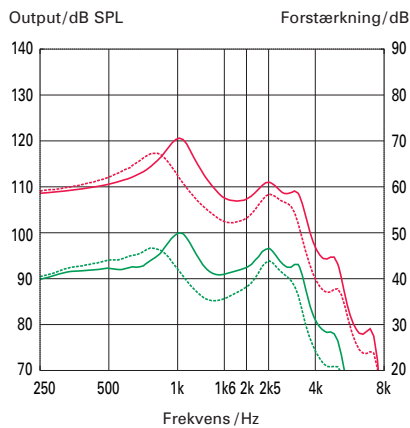


PRIO 106 BTE DM

Output OSPL 90
Full-On Gain



IEC 60118-0 Øresimulator (IEC 60711)

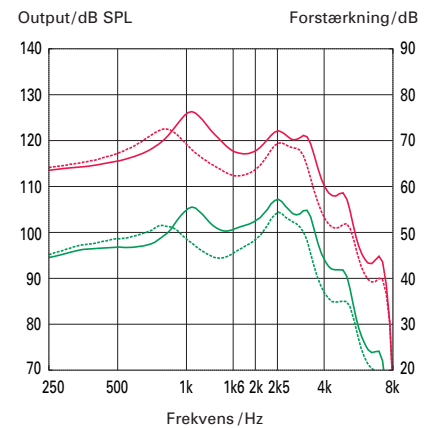

— Målinger med 1.3 mm slange
----- Målinger med 0.9 mm slange

¹⁾ Identisk med coupleren der er beskrevet i standard IEC 60126

SPIRA^{flex} lydslangesystem



SPIRA^{flex} lydslangesystem

for kosmetiske og åbne tilpasninger.
Se

SPIRA^{flex} produktbrochure
REF. 951-18-701-00

eller

SPIRA^{flex} produktinformation
REF. 951-18-601-00



SPIRA^{flex} Fitting Kit

Indeholder alle SPIRA^{flex} dele
REF. 890-80-060-00




Quick Fitting Guide

Forskellige akustiske muligheder resulterer i forskellige fordele

Open Dome	Tulip Dome	Custom Tip	Canal Mould
			
		Vent < 3 mm	Vent = 10 mm
SPIRA ^{flex} 0.9			SPIRA ^{flex} 1.3
Maximum tilpasningsområde			
Minimum risiko for feedback			
Maximum kosmetisk			
Minimum okklusion			


Anbefalede maksimum tilpasninger med forskellige akustiske kombinationer

SPIRA^{flex} slange 0.9

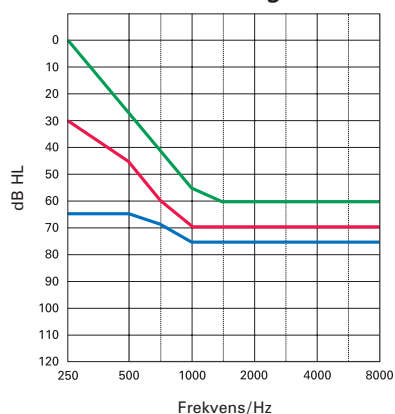

- Med Open Dome
- Med Tulip Dome
- Med custom dome eller canal mould

SPIRA^{flex} slange 1.3

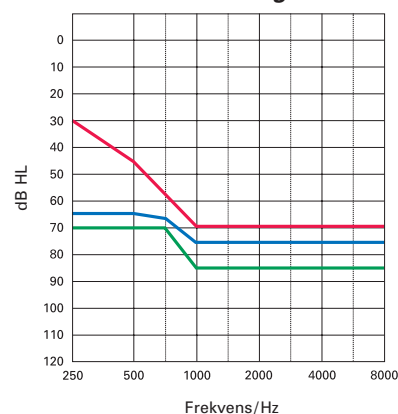

- Med Tulip Dome
- Med canal mould (stor vent)
- Med canal mould (uden vent)

PRIO 106 BTE DM farvesortiment



beige



gråbrun



sort



titanium

Fjernbetjening

Alle PRIO høreapparater kan betjenes med den valgfrie Bernafon fjernbetjening RC-S.

Standard fjernbetjening

REF. 160-02-310-00

Til brugere der har valgt at bruge mere end én fjernbetjening (f.eks. én på kontoret og én derhjemme), bør Custom Remote Control blive bestilt.

Custom Remote Control

REF. 160-02-320-00



Kabler og adaptore

PRIO er programmeret med OASIS plus, Version 8.0 eller senere – et NOAH kompatibelt, MS-Windows baseret PC tilpasningssoftware. Systemkrav: NOAH 2.0 eller NOAH 3.0 med Hi-Pro eller NOAHlink.



Programmeringskabler

Nr. 2, NEW STANDARD (HiPro)

Blå, venstre

REF. 384-20-033-00

Rød, højre

REF. 384-20-032-00

Nr. 2, NEW STANDARD (NOAHlink)

Blå, venstre

REF. 384-20-035-00

Rød, højre

REF. 384-20-034-00



Programmeringsadapter

Programmeringsadapter

REF. 399-50-640-00



DAI 4 Adapter

Til forbindelse til Hi-Fi, TV, PC, osv.



REF. 399-50-521-00

Bemærk: Brug altid nye batterier til programmering.

Tilpasning med OASIS plus

OASIS plus tilbyder et udvidet workflow for at opfylde dine tilpasningsprioriteter:

- **Brugerprofil:** Personlig data, audiogram og livsstilsprofil giver en struktur til at identificere brugerens specifikke kommunikationsbehov. Det er denne information der styrer automatikken i PRIO.
- **Automatisk programallokering:** OASIS plus definerer, hvilke brugerprogrammer der skal anvendes for at dække brugerens livsstilsprioriteter.

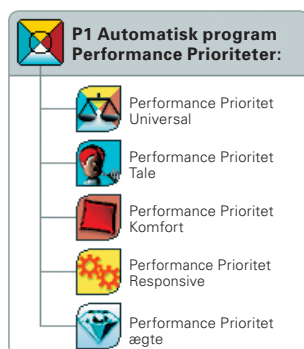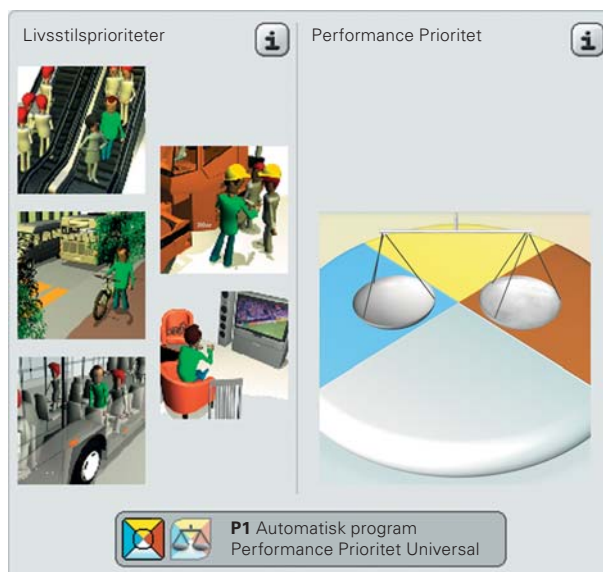

- **Performance Prioriteter:** OASIS plus definerer automatisk Performance Prioritet i det automatiske program.
- **Master Tools:** bruges til finjustering af alle programmer på samme tid.
- **Program Optimering:** tilbyder nogle dedikerede kontroller til finjustering af hvert program.

bernafon[®]
Innovative Hearing Solutions

Manufacturer:

Bernafor AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
Phone +41 (0)31 998 15 15
Fax +41 (0)31 998 15 90

www.bernafor.com

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
Tlf. 3917 7101
Fax 3927 7900
www.bernafor.dk



PRIO 202 ITE VC

PRIO 205 ITE DM VC

PRIO 322 ITC VC

PRIO 315 ITC DM VC

PRIO 305 ITC DM

PRIO 415 MC DM

PRIO 400 CIC


PRIO høreapparater leverer den mest avancerede performance på digitalt startniveau. PRIO leverer et unikt, personligt automatisk program med et udvalg af definerede signalbehandlingsstrategier, der er optimeret for brugerens behov. Det omfattende produktsortiment, der både indeholder adaptive retningsbestemte og avancerede omnidirektionelle modeller, giver dig mulighed for at dække næsten alle høretab.

Høreapparatets funktioner:

- Præcis signalbehandling i 7 kanaler
- Fuldautomatisk program med 5 Performance prioriteter
- Program til musik, telefon og auditorium
- Adaptive Dualband Directionality (retningsbestemte modeller)
- Adaptive Noise Reduction
- Soft Noise Management
- Adaptive Feedback Manager
- Adaptive Signal Unification™
- OpenFit™ med lavfrekvent kompensation
- Tracker (datalogging) med forslag til tilpasningen

Personlige funktioner:

- Brugerprofil med Client Lifestyle Priorities
- Letanvendelige og intuitive tilpasningsværktøjer
- Performance prioriteter i det automatiske program
- Individuelt justerbare programmer for telespole
- Automatisk telefonprogram for ITE/ITC
- Åbne tilpasninger med collection vents
- Komplet produktsortiment fra mini CIC til power ITE
- Retningsbestemte og avancerede omnidirektionelle modeller
- Valgfri fjernbetjening til alle modeller
- Moderne farvesortiment

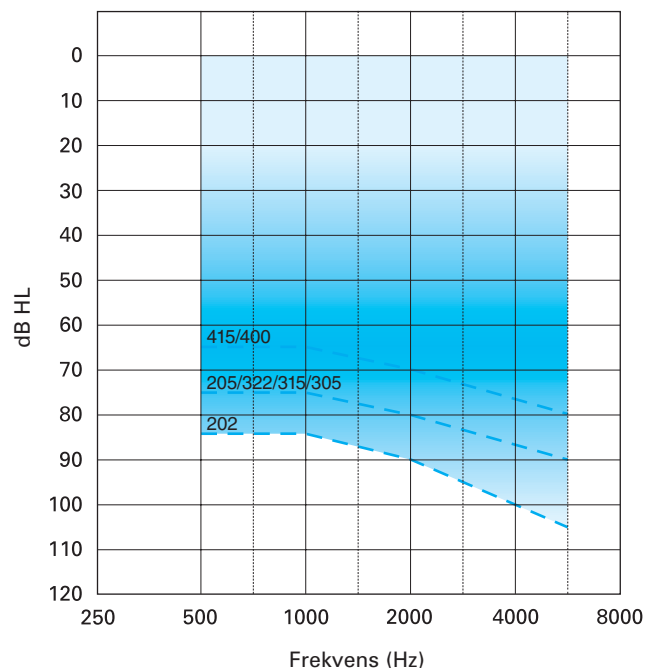

PRIO 202 ITE VC

Et omnidirektionelt kraftigt concha apparat for svage til svære høretab. Med størrelse 13 batteri og drejelig volumenkontrol.



PRIO 205 ITE DM VC

Et retningsbestemt kraftigt concha apparat for milde til moderat/svære høretab. Med størrelse 13 batteri og drejelig volumenkontrol.



PRIO 322 ITC VC

Et omnidirektionelt kanal- eller half shell apparat for svage til moderat/svære høretab. Med størrelse 312 batteri og drejelig volumenkontrol.



PRIO 315 ITC DM VC

Et retningsbestemt kanal- eller half shell apparat for svage til moderat/svære høretab. Med størrelse 312 batteri og drejelig volumenkontrol.



PRIO 305 ITC DM

Et retningsbestemt kanalapparat for svage til moderat/svære høretab. Med størrelse 312 batteri.



PRIO 415 MC DM

Et retningsbestemt mini kanalapparat for milde til moderate høretab. Med størrelse 10 batteri.



PRIO 400 CIC

Et retningsbestemt CIC apparat for svage til moderate høretab. Med størrelse 10 batteri.

PRIO information

PRIO ITE						
			202 ITE VC		205 ITE DM VC	
			IEC 60118-7 (2cc)	IEC 60118-0 (Ears.)	IEC 60118-7 (2cc)	IEC 60118-0 (Ears.)
Output	OSPL 90, Peak	dB SPL	120	129	112	122
	OSPL 90, 1600 Hz	dB SPL	113	121	105	113
	HFA OSPL 90, ANSI	dB SPL	115	—	107	—
Gain	Full-On Gain, Peak	dB	55	64	46	58
	Full-On Gain, 1600 Hz	dB	44	53	40	49
	HFA Full-On Gain, ANSI	dB	47	—	41	—
	Reference Test Gain, IEC	dB	37	45	29	38
	Reference Test Gain, ANSI	dB	37	—	29	—
Current	Quiescent Current	mA	1.3	1.3	1.2	1.2
	Operating Current, IEC	mA	1.3	1.3	1.2	1.2
	Operating Current, ANSI	mA	1.3	—	1.2	—
	Batteritype		13		13	
Distortion	500/800/1600 Hz typ., IEC	%	<1 / <1 / <1	<1 / <1 / <1	<1 / <1 / <1	<2 / <2 / <1
	500/800/1600 Hz typ., ANSI	%	<1 / <1 / <1	—	<1 / <1 / <1	—
General Information	Frequency Range, ANSI	Hz	100 – 7000		100 – 7400	
	Equiv. Input Noise, IEC/ANSI ¹⁾	dB	20/15		14/14	
	Telespole 1 mA/m 1600 Hz, IEC	dB SPL	76	84	72	81
	Telespole HFA SPLITS, ANSI	dB SPL	94	—	85	—
Yderligere information	Fjernbetjening		optional		optional	
	Programmerbar telespole		optional		optional	
	Autotele		optional		optional	
	Trykknop		ja		ja	
	Volumenkontrol		ja		ja	

¹⁾ Teknisk data målt med ekspansion svarende til Soft Noise Management niveau 3.

Alle målinger er foretaget i henhold til IEC 60118 hvis intet andet er nævnt. ANSI refererer til ANSI S3.22-2003. Fuld forstærkning kan indprogrammeres i høreapparaterne via OASIS plus for testformål.

PRIO information

PRIO ITE								
			322 ITC VC		315 ITC DM VC		305 ITC DM	
			IEC 60118-7 (2cc)	IEC 60118-0 (Ears.)	IEC 60118-7 (2cc)	IEC 60118-0 (Ears.)	IEC 60118-7 (2cc)	IEC 60118-0 (Ears.)
Output	OSPL 90, Peak	dB SPL	115	125	112	122	110	120
	OSPL 90, 1600 Hz	dB SPL	105	113	105	113	102	111
	HFA OSPL 90, ANSI	dB SPL	107	—	107	—	104	—
Gain	Full-On Gain, Peak	dB	44	53	43	54	41	52
	Full-On Gain, 1600 Hz	dB	34	43	38	47	34	43
	HFA Full-On Gain, ANSI	dB	37	—	38	—	34	—
	Reference Test Gain, IEC	dB	27	35	29	38	27	35
	Reference Test Gain, ANSI	dB	33	—	29	—	27	—
Current	Quiescent Current	mA	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
	Operating Current, IEC	mA	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	Operating Current, ANSI	mA	1.2	—	1.2	—	1.2	—
	Batteritype		312		312		312	
Distortion	500/800/1600 Hz typ., IEC	%	<1 / <1 / <1	<1 / <1 / <1	<1 / <1 / <1	<2 / <2 / <1	<1 / <1 / <1	<1 / <1 / <1
	500/800/1600 Hz typ., ANSI	%	<1 / <1 / <1	—	<1 / <1 / <1	—	<1 / <1 / <1	—
General Information	Frequency Range, ANSI	Hz	100 – 7000	—	100 – 7500	—	100 – 7500	—
	Equiv. Input Noise, IEC/ANSI ¹⁾	dB	19/16		14/15		14/15	
	Telespole 1 mA/m 1600 Hz, IEC	dB SPL	66	75	70	79	67	75
	Telespole HFA SPLITS, ANSI	dB SPL	83	—	85	—	84	—
Yderligere information	Fjernbetjening		optional		optional		optional	
	Programmerbar telespole		optional		optional		optional	
	Autotele		optional		optional		optional	
	Trykknop		ja		ja		ja	
	Volumenkontrol		ja		ja		—	

¹⁾ Teknisk data målt med ekspansion svarende til Soft Noise Management niveau 3.

Alle målinger er foretaget i henhold til IEC 60118 hvis intet andet er nævnt. ANSI refererer til ANSI S3.22-2003. Fuld forstærkning kan indprogrammeres i høreapparaterne via OASIS plus for testformål.

PRIO information


PRIO ITE						
			415 MC DM		400 CIC	
			IEC 60118-7 (2cc)	IEC 60118-0 (Ears.)	IEC 60118-7 (2cc)	IEC 60118-0 (Ears.)
Output	OSPL 90, Peak	dB SPL	104	115	104	115
	OSPL 90, 1600 Hz	dB SPL	97	106	97	105
	HFA OSPL 90, ANSI	dB SPL	98	—	98	—
Gain	Full-On Gain, Peak	dB	34	45	34	45
	Full-On Gain, 1600 Hz	dB	30	39	30	39
	HFA Full-On Gain, ANSI	dB	30	—	31	—
	Reference Test Gain, IEC	dB	22	31	22	31
	Reference Test Gain, ANSI	dB	22	—	21	—
Current	Quiescent Current	mA	1.1	1.1	0.8	0.8
	Operating Current, IEC	mA	1.1	1.1	0.8	0.8
	Operating Current, ANSI	mA	1.1	—	0.8	—
	Batteritype		10		10	
Distortion	500/800/1600 Hz typ., IEC	%	<1 / <1 / <1	<1 / <1 / <2	<1 / <1 / <1	<1 / <1 / <1
	500/800/1600 Hz typ., ANSI	%	<1 / <1 / <1	—	<1 / <1 / <1	—
General Information	Frequency Range, ANSI	Hz	110 – 7500		110 – 7500	
	Equiv. Input Noise, IEC/ANSI ¹⁾	dB	14/14		19/17	
	Telespole 1 mA/m 1600 Hz, IEC	dB SPL	—	—	—	—
	Telespole HFA SPLITS, ANSI	dB SPL	—	—	—	—
Yderligere information	Fjernbetjening		optional		optional	
	Programmerbar telespole		—		—	
	Autotele		—		—	
	Trykknop		optional		optional	
	Volumenkontrol		—		—	

¹⁾ Teknisk data målt med ekspansion svarende til Soft Noise Management niveau 3.

Alle målinger er foretaget i henhold til IEC 60118 hvis intet andet er nævnt. ANSI refererer til ANSI S3.22-2003. Fuld forstærkning kan indprogrammeres i høreapparaterne via OASIS plus for testformål.

Frekvensrespons


IEC 60118-7 2cc Coupler (IEC 60126)

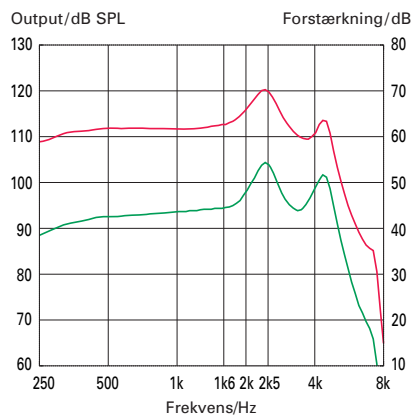

PRIO 202 ITE VC


Output OSPL 90
Full-On Gain

IEC 60118-0 Øresimulator (IEC 60711)

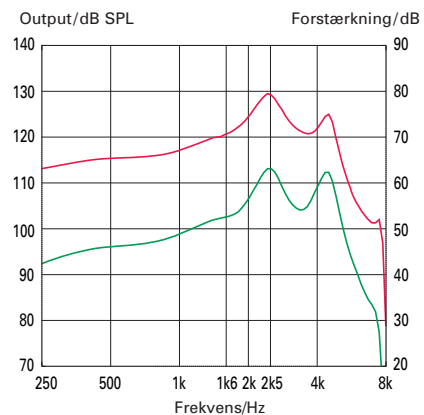


PRIO 205 ITE DM VC

Output OSPL 90
Full-On Gain

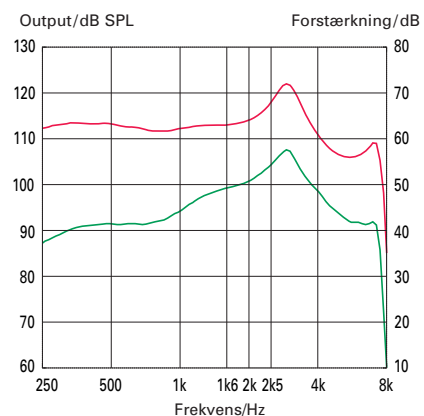



PRIO 322 ITC VC

Output OSPL 90
Full-On Gain

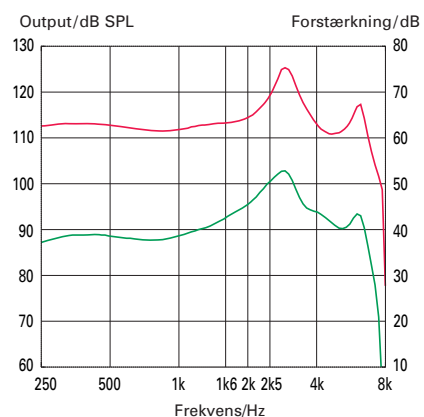


PRIO 315 ITC DM VC

Output OSPL 90
Full-On Gain

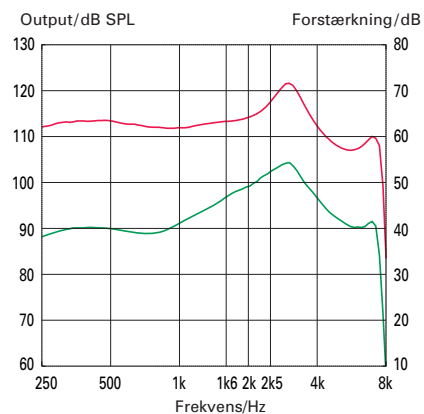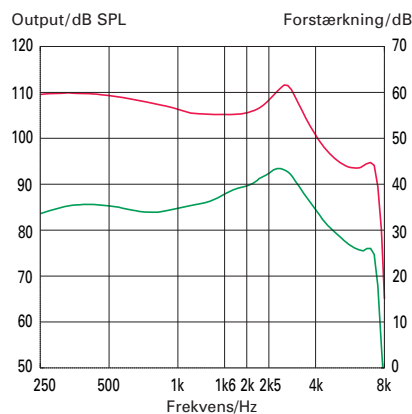

Frekvensrespons

IEC 60118-7 2cc Coupler (IEC 60126)

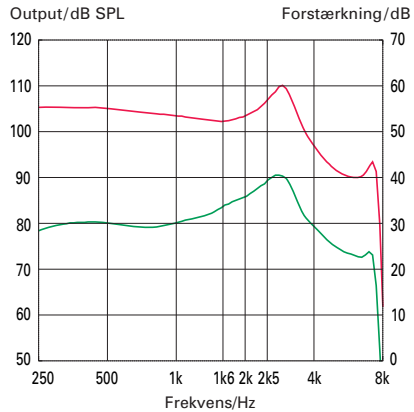



PRIO 305 ITC DM

Output OSPL 90
Full-On Gain



PRIO 415 MC DM




Output OSPL 90
Full-On Gain

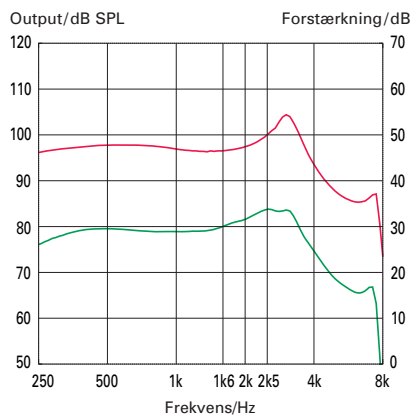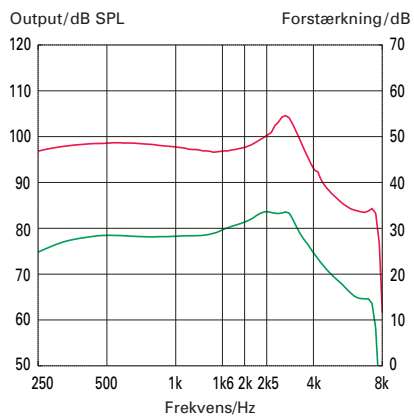

PRIO 400 CIC

Output OSPL 90
Full-On Gain

IEC 60118-0 Øresimulator (IEC 60711)

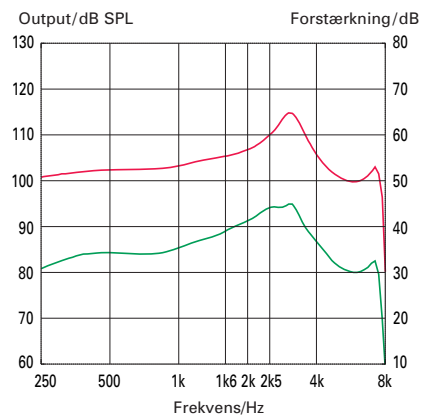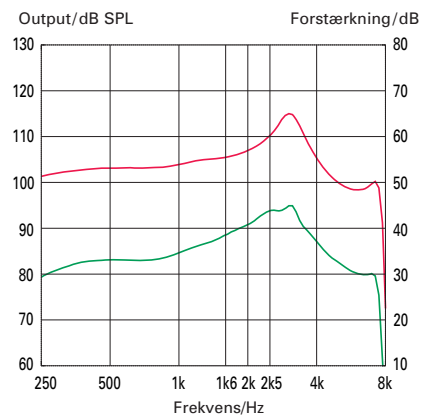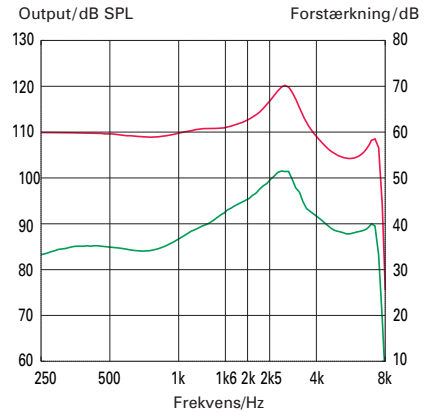

PRIO farver

Alle farver fås til alle modeller.



beige



pink



brun



mørkebrun

Adaptore og kabler

PRIO er programmeret med OASIS plus, Version 7.0 eller senere – et NOAH kompatibelt, MS-Windows baseret PC tilpasningssoftware.

Systemkrav: NOAH 2.0 eller NOAH 3.0 med Hi-Pro eller NOAHlink™.

Programmeringskabler

Nr. 2, NEW STANDARD (HiPro)

Blå, venstre **REF. 384-20-033-00**

Rød, højre **REF. 384-20-032-00**



Programmeringsadapter til alle ITE'er

FlexConnect

REF. 390-01-180-05

Programmeringskabler

Nr. 2, NEW STANDARD (NOAHlink)

Blå, venstre **REF. 384-20-035-00**

Rød, højre **REF. 384-20-034-00**

Bemærk: Brug altid nye batterier til programmering.

Fjernbetjening

Alle PRIO høreapparater kan betjenes med den valgfrie Bernafon fjernbetjening RC-S.

Standard fjernbetjening **REF. 160-02-310-00**

Til brugere der har valgt at bruge mere end én fjernbetjening (f.eks. én på kontoret og én derhjemme), bør Custom Remote Control blive bestilt.



Custom Remote Control **REF. 160-02-320-00**



Tilpasning med OASIS plus

OASIS plus tilbyder et udvidet workflow for at opfylde dine tilpasningsprioriteter:

- **Brugerprofil:** Personlig data, audiogram og livsstilsprofil giver en struktur til at identificere brugerens specifikke kommunikationsbehov. Det er denne information der styrer automatikken i PRIO.
- **Automatisk programallokering:** OASIS plus definerer, hvilke brugerprogrammer der skal anvendes for at dække brugerens livsstilsprioriteter.

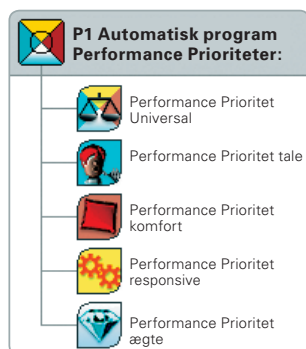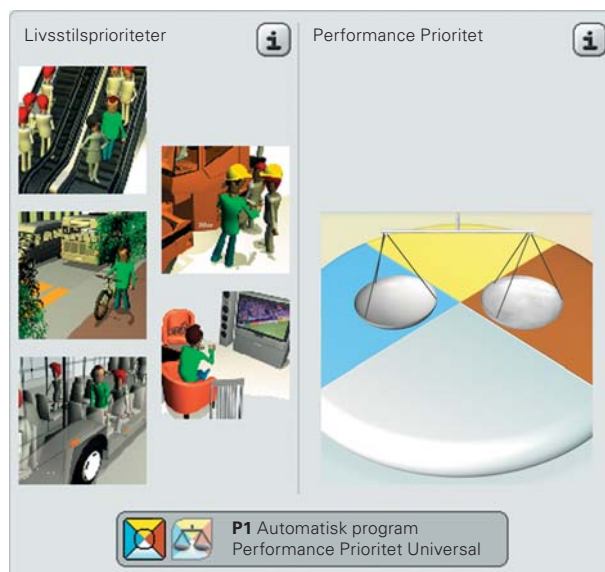

- **Performance Prioriteter:** OASIS plus definerer automatisk Performance Prioritet i det automatiske program.
- **Master Tools:** bruges til finjustering af alle programmer på samme tid.
- **Program Optimering:** tilbyder nogle dedikerede kontroller til finjustering af hvert program.

bernafon®

Innovative Hearing Solutions

Manufacturer:

Bernafor AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
Phone +41 (0)31 998 15 15
Fax +41 (0)31 998 15 90

www.bernafor.com

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
Tlf. 3917 7101
Fax 3927 7900
www.bernafor.dk

