

MUUTA SORAÄÄNET KAUNIIKSI HARMONIAKSI



Ensiluokkaiseen
kuulemiskokemukseen

JUNA 9 | 7
PICO RITE

bernafon[®]
Your hearing · Our passion





Bernafon esittelee iloisena uuden huippuluokan Juna Pico RITE (kuuloke korvassa) -kuulokojeen.

Juna Pico RITE on erittäin pienikokoinen ja tyylikäs, mutta samalla tehokas ja mukavantuntuinen kuulokoje. Huikeiden Audio Efficiency™-ominaisuuksiensa sekä uudenlaisten miniFit-kuulokkeiden ja tippien ansiosta se soveltuu useisiin erityyppisiin kuulonalenemiin. Lisäksi Juna Pico RITE on yhteensopiva kaikkien SoundGate 3 -laitteeseen liitettyjen langattomien Bernafon-lisälaitteiden kanssa, esim. SoundGate Mikrofoni ja SoundGate App -sovellus.

Kun haluat nauttia kaikista elämäsi äänistä, valitse Juna Pico RITE.

Muuta mahdollisuudet suureksi muutokseksi



1 Paristokotelo

- Helppo avata ja sulkea
- Tiivis kiinnitys kuulokojeen sulkemiseksi ja pariston pysymiseksi paikallaan

2 Painike

- Suuri ja helposti havaittava painike
- Ohjelmavalinnat ja äänenvoimakkuuden säätö onnistuvat painikkeella
- Äänenvaimennus painikkeella

3 Mikrofonit

- Sisäänrakennettu kahden mikrofonin järjestelmä takaa optimaaliset suuntatoiminnot

4 Kestävyys


- Vettähylykivä pinnoite suojaa sähköiset osat nesteiltä
- IP57-sertifioitu pölyn ja kosteuden kestävä

5 Langaton yhteensopivuus

- Liitettävissä kaikkiin langattomiin Bernafon-laitteisiin, kuten SoundGate 3 -laitteen Bluetooth®-liitäntään

6 Ohjelmointiportti

- Huomaamaton ohjelmointikorttipaikka
- FlexConnect-nauha helppo liittää

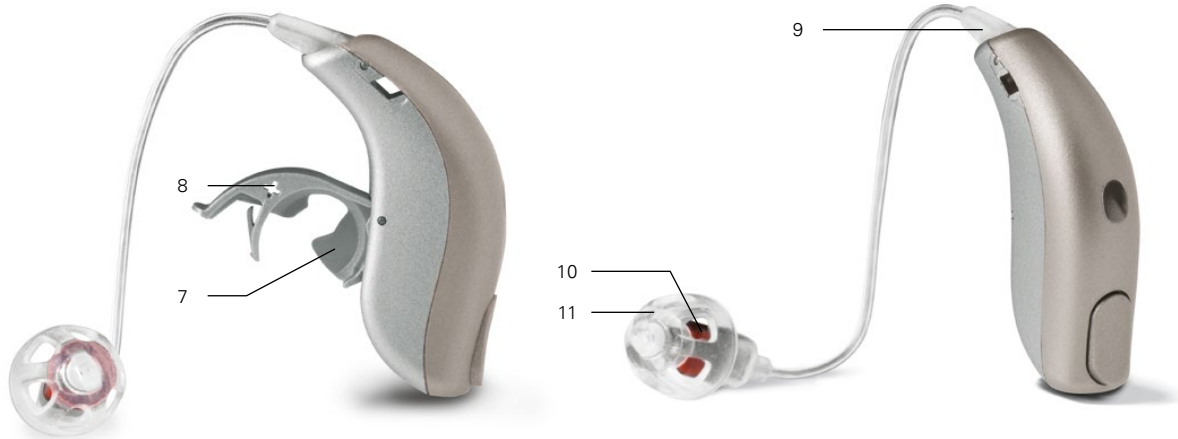

7 Paristokotelo

- Pitkäkestoisille 312-tyypin paristoille tarkoitettu erittäin pienikokoinen paristokotelo

8 Vasen/oikea-merkintä

- Vasen ja oikea koje on merkitty, jotta ne on helppo erottaa toisistaan

9 miniFit-kuuloke

- Kuuloke helppo liittää naksauttamalla
- Kolme erilaista kuuloketta lievään tai vaikeaan kuulonalenemaan
- Neljä erilaista kuulokkeen pituutta

10 miniFit-kuuloke

- Vasen ja oikea kuuloke on merkitty, jotta ne on helppo erottaa toisistaan
- Vaihdeava vahasuojä estää vahan ja kosteuden pääsyn kuulokkeeseen

11 miniFit-korvaosat

- Laaja valikoima erilaisia ja erikokoisia miniFit-tippejä
- Laaja valikoima yksilöllisiä korvakappaleita

Muuta valikoima sopivaksi valinnaksi

Juna Pico RITE on erittäin pienikokoinen, mutta tehokas kuulokoje jopa 100 dB:n kuulonalenemaan. Uudenlaiset miniFit-kuulokkeet ja tippit takaavat joustavan sovituksen sekä parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja luotettavuuden.

Joustava sovitus

Valittavissa kolme erilaista kuuloketta eriasteisiin kuulonalenemiin. Lisäksi mahdollisuus erilaisiin pika- tai yksilöllisiin sovituksiin, mikä lisää vaihtoehtojen määrää merkittävästi.

Suorituskyky ja ulkoasu

Kaareutuvat 60- ja 85-kuulokkeet ovat suunniteltu korvakäytävän muotoon parhaan mahdollisen äänenlaadun ja istuvuuden takaamiseksi. 100-kuuloke on läpinäkyvä ja siten huomaamaton. Kaikki kuulokkeet ovat mahdollisimman pienikokoisia mahdollistaen myös yhä pienemmät korvakappaleet.

Luotettavuus

Silikonista valmistetut miniFit-tipit pysyvät paremmin käyttäjän korvassa ja kestävät pidempään. Yksilöllisten korvakappaleiden vahasuojat pidentävät myös kuulokkeiden käyttöikää.

| | 60-KUULOKE | 85-KUULOKE | 100-KUULOKE |
|--|------------|------------|-------------|
| PIKASOVITUS | | | |
| Avoin tippi (6, 8, 10 mm) | ● | ● | |
| Basso-tippi, tuplaventti (6, 8, 10, 12 mm) | ● | ● | ● |
| Basso-tippi, yksi ventti (6, 8, 10, 12 mm) | ● | ● | ● |
| Power-tippi (6, 8, 10, 12 mm) | ● | ● | ● |
| YKSILÖLLINEN SOVITUS | | | |
| Mikrokorvakappale | ● | ● | |
| Kevyt-tippi | ● | ● | |
| Power-korvakappale | | | ● |

Muuta vaikeudet voitoksesi



Huolellisesti suunnitellut huippuominaisuudet on saatu Pico RITE -kojeisiin Bernafonin patentoiman Audio Efficiency™ -teknologian ansiosta. Järjestelmän ytimenä toimiva teknologia parantaa puheenerotuskykyä ja kuuntelumukavuutta huomattavasti. Lisäksi käyttäjien yksilölliset tarpeet ja mieltymykset on helppo ottaa huomioon.

Audio Efficiency™

SoundGate 3:ssa on Bernafonin Bluetooth®-liitäntä, jonka avulla käyttäjät voivat liittyä useisiin äänilähteisiin. RC-N-kaukosäädin takaa helpon käsittelyn pienestä koosta huolimatta. Saatavilla myös helppokäyttöinen SoundGate App -sovellus. Pico RITE:n äänenvoimakkuutta ja ohjelmia voi säätää kätevästi iPhone:lla®¹⁾.

Tutustu Bernafonin uusimpaan teknologiaan verkkosivuiltamme löytyvän Audio Efficiency™ Flash -sovelluksen avulla.

**Kaukosäädin
RC-N**



**TV-sovitin 2
Puhelinsovitin 2**



**SoundGate-
mikrofoni**



SoundGate 3



SoundGate App



Apple, Apple-logo ja iPhone ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yhtiön palvelumerkki.

¹⁾ SoundGate App -sovellus on tarkoitettu käytettäväksi iPhoneilla (SoundGate App tukee iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s ja iPhone 4 -malleja). SoundGate App -sovelluksen käyttö vaatii Bernafonin SoundGate 3:n (tai uudemman) sekä langattomat kuulokojeet.

Muuta uusin teknologia täydelliseksi kuunteluksi

| | JUNA 9 PICO RITE | JUNA 7 PICO RITE |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| SIGNAALINKÄSITTELY | | |
| ChannelFree™ | ● | ● |
| Speech Cue Priority™ | ● | ● |
| Frequency Composition™ | ● | ● |
| Taajuusalue | 10 kHz | 10 kHz |
| KUUNTELUMUKAVUUS | | |
| Adaptiivinen melunhallinta (ANR Plus) | 5 ctr | 4 ctr |
| Impulssimelunhallinta | ● | ● |
| Adaptiivinen feedback-hallinta Plus | ● | ● |
| Tuulikohinan hallinta | ● | ● |
| Ympäristöäänien optimointi | 1/4 | 1/1 |
| Edistynyt hiljaisten äänien hallinta | ● | ● |
| Kaiunnan hallinta | ● | - |
| i-VC | ● | ● |
| BINAURAALINEN KOORDINOINTI | | |
| Voimakkuudensäädin, ohjelmavalitsin | ● | ● |
| Ympäristöäänien erittely | ● | ● |
| Puhellittoman puolen vaimennus | ● | ● |
| VIIHDE | | |
| Live-musiikkiohjelma | ● | ● |
| Elokuvaohjelma | ● | ● |
| SUUNTATOIMINTO | | |
| Adaptiivinen | ● | ● |
| Adaptiivinen, korkeat taajuudet | ● | - |
| True Directionality™ | ● | - |
| MUKAVUUSTOIMINNOT | | |
| Naksahtava voimakkuussäädin | ● | ● |
| Mykistys painokytkimellä | ● | ● |
| Säädettävä käynnistyksen viive | ● | ● |
| PERSONOINTI | | |
| Ohjelmavaihtoehdot/ohjelmamuisti | 14/4 | 13/4 |
| Sopeutumisen hallinta | ● | - |
| Tiedonkeruu ja oppiminen | ● | ● |
| Oppiva voimakkuussäädin | ● | - |
| Älykäs voimakkuussäädin | ● | - |
| Kielten ominaispiirteiden huomiointi | ● | ● |
| REMfit™ | ● | ● |
| Interaktiivinen asiakasohjelma | ● | ● |
| Miellyttävä lentomatka -ohjelma | ● | - |