


Produktinformation

JUNA 9 | 7 PICO RITE


Juna Pico RITE är en diskret modell som passar för milda till grava hörselnedsättningar. Juna Pico RITE anpassas med miniFit högtalarenheter och domer vilket inkluderar tre olika styrkeklasser och ett brett urval av

insatser. Juna Pico RITE är baserad på Bernafons audiologiska plattform "Audio Efficiency™" med förstaklassiga funktioner. Juna är också kompatibel med alla Bernafons trådlösa tillbehör.


PICO RITE 60-HÖGTALARENHET

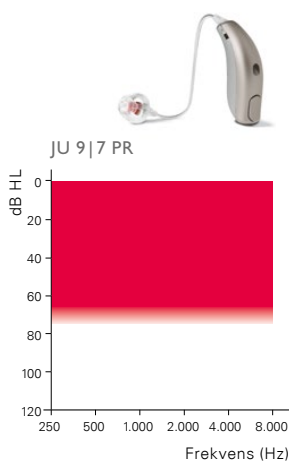

PICO RITE 85-HÖGTALARENHET

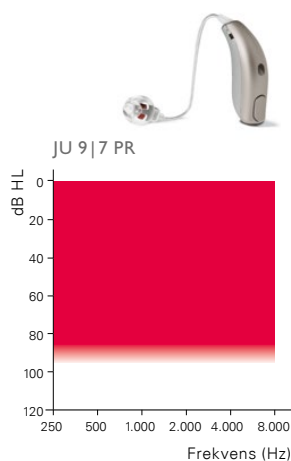

PICO RITE 100-HÖGTALARENHET

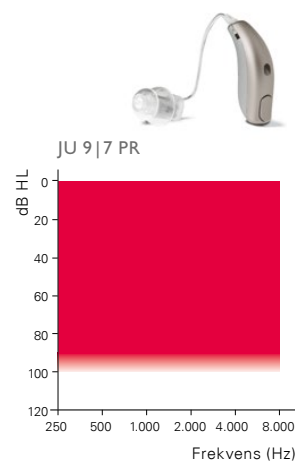

Audio Efficiency™

Tal

- ChannelFree™
- Speech Cue Priority™
- Frequency Composition™
- True Directionality™*
- intelligent VK

Komfort

- Adaptiv återkopplingshantering Plus
- Adaptiv brusreducering Plus
- Transientreducering
- Efterklangreduktion*
- Binaural koordinering

Personlig anpassning

- Livemusik- och bio-program
- Program för komfort i flygplan*
- Trådlös kommunikation
- Språkspecifik förstärkning
- REMfit™

Övriga egenskaper

Teknisk specifikation

- Bandbredd upp till 10 kHz
- Multi Environment-program
- Ljudmiljöoptimering
- Autotelefon
- Nanobehandlat skal
- Damm- och vattenskydd enligt IP57

Egenskaper för personlig anpassning

- Dataloggning
- Inläring
- Inlärningsbegränsningar VK* och smart VK*
- Upp till 14 lyssningsprogram
- 4 programplatser med flexibel programmering

* Enbart Juna 9 PR



JU 9|7 PR
100-Högtalarenhet





JU 9|7 PR
85-Högtalarenhet





JU 9|7 PR
60-Högtalarenhet

— Mätningar med 100-Högtalarenhet
- - - Mätningar med 85-Högtalarenhet
— Mätningar med 60-Högtalarenhet

2CC COUPLER

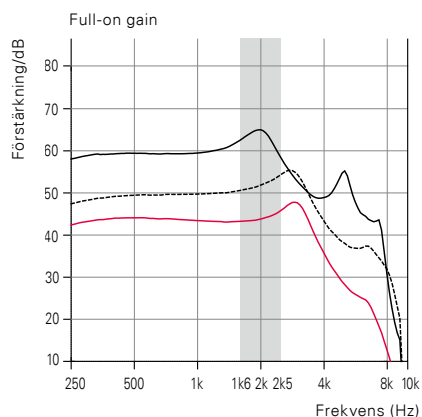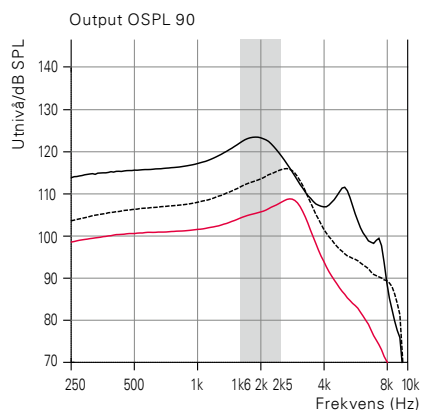

EAR SIMULATOR

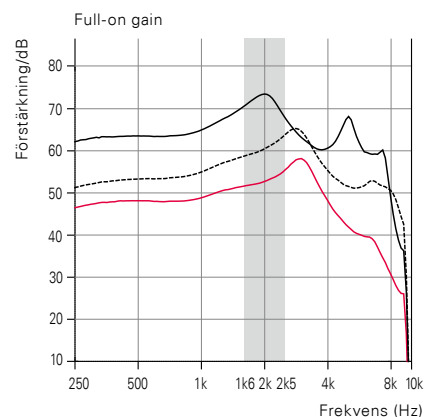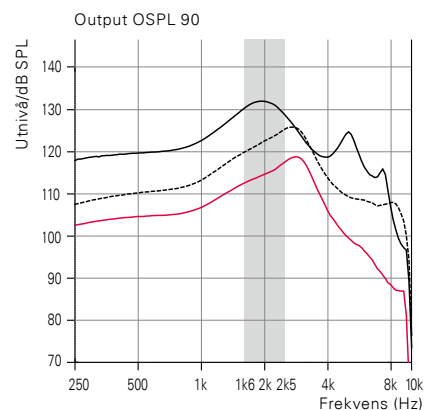

2CC COUPLER

EAR SIMULATOR

	100-HÖGTALA- RENHET	85-HÖGTALA- RENHET	60-HÖGTALA- RENHET	100-HÖGTALA- RENHET	85-HÖGTALA- RENHET	60-HÖGTALA- RENHET
OSPL 90, topp (dB SPL)	123	116	109	132**	126	119
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	122	111	104	130	120	112
HFA-OSPL 90 (dB SPL)	119	112	105	-	-	-
Full-On Gain, topp (dB)	65	55	48	73	65	58
Full-On Gain, 1600 Hz (dB)	62	50	43	70	59	51
HFA Full-On Gain (dB)	60	51	44	-	-	-
Referentestförstärkning (dB)	44	36	28	57	45	37
Batterispänning tomgång (mA)	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2
Driftspänning (mA)	1.6	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3
Batteristorlek		312			312	
Distortion 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<5/<3/<3	<2/<2/<2	<5/<5/<2
Frekvensomfång (Hz)	100 – 7700	100 – 8200	100 – 6500	-	-	-
Ekvivalent ingångsbrus ¹⁾ , dB(A)	17	17	17	15	20	19
Programväljare		●***			●***	
Lokal volymkontroll		***			***	
Auto-telefonetektering		●			●	

¹⁾ Tekniska data uppmätta med expansion, överensstämmande inställningar för testboxmätningar.

"2cc" refererar till coupler enligt IEC 60318-5. "Ear simulator" refererar till coupler enligt IEC 60318-4.

Tillämpade versioner: IEC 60118-0:1994, IEC 60118-7:2005, ANSI S3.22:2009.

** Extra försiktighet skall iakttas vid programmering och användning av hörapparater med en maximal ljudstyrkekapacitet över 132 dB SPL (IEC 60318-4) eftersom det kan finnas risk att skada användarens kvarvarande hörsel.

*** Tryckknappen kan programmeras så att den fungerar som volymkontroll.

JUNA 9 | 7 PICO RITE FÄRGER

GRUNDSKAL MAC (METALLIC ANTHRACITE)



GRUNDSKAL MSIL (METALLIC SILVER)



JUNA 9 | 7 PICO RITE AKUSTISKA TILLVAL

100-HÖGTALARENHET



Standard

Bassdome
Dubbel ventilation



Bassdome
Enkel ventilation




Powerdome



Individuell

PowerMould

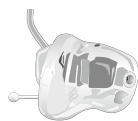

85-HÖGTALARENHET



Standard

Öppen dome



Bassdome
Dubbel ventilation



Bassdome
Enkel ventilation



Powerdome




60-HÖGTALARENHET




Individuell

MicroMould

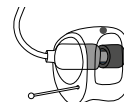

Lite Tip

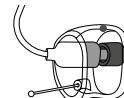

PROGRAMMERING

Juna 9|7 Pico RITE programmeras med Bernafon Oasis, version 20.0 eller senare. Några av följande gränssnitt krävs med NOAH kompatibel MS-Windowsbaserad PC-fitting software. Något av följande gränssnitt krävs med NOAH: HI-PRO USB, HI-PRO 2, NOAHlink, EXPRESSlink³, eller nEARcom. Även möjligt med fristående installation av Oasis.





Operativsystem

Windows® 8.1, 32/64 bit, alla versioner
Windows® 8, 32/64 bit, alla versioner
Windows® 7, 32/64 bit, alla versioner
Windows® Vista, 32/64 bit, alla versioner
Windows® XP SP3

Noah

Noah 4 (alla versioner)
Noah 4.3 (minimum för Windows® 8)
Noah 3 (rekommenderas ej)

TILLBEHÖR

PRODUKT	BESKRIVNING	ARTIKELNUMMER	
Programmeringskabel nr. 2 – ny standard (HiPro)	Blå, vänster	384-20-033-00	
Programmeringskabel nr. 2 – ny standard (HiPro)	Röd, höger	384-20-032-00	
Programmeringskabel nr. 2 – ny standard (NOAHlink)	Blå, vänster	384-20-035-00	
Programmeringskabel nr. 2 – ny standard (NOAHlink)	Röd, höger	384-20-034-00	
FlexConnect	FlexConnect programmeringsenhet för Pico RITE.	390-01-180-05	
Utprovningsskit miniFit	Utprovningsskit som innehåller 60- och 85-högtalarenheter och bassdamer med dubbel ventilation samt verktyg och annan utrustning.	149445	
Fjärrkontroll RC-N	Fjärrkontroll för justering av volym och program.	139772	
SoundGate 3 (Bluetooth®)	Enhet för trådlös kommunikation. Fungerar även som fjärrkontroll. Har inbyggd telespole.	144604	
SoundGate Mic	Mikrofon med klämman som underlättar talförståelsen vid samtal med en annan person (kräver SoundGate 3).	145645	
TV Adapter 2 (Bluetooth®)	Sänder TV-ljudet till hörapparaterna, via SoundGate.	127847	
Telefonadapter 2 (Bluetooth®)	Gör att användaren kan tala i hemtelefonen via SoundGate 2.	124396 (EU), 130976 (JP), 130977 (KR), 130978 (NZ), 130979 (US), 130980 (ZA), 130981 (AU), 130982 (BR), 130983 (CN), 131571 (RU)	

Tillverkare

Schweiz

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Telefon +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90

Återförsäljare Sverige

Oticon Sverige
Box 2108
103 13 Stockholm
Telefon + 46 8 545 227 50
mail@oticon.se

SWISS 
Engineering

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing • Our passion