

60 85 100 105



	Oticon Opn S 1	Oticon Opn S 2	Oticon Opn S 3
Taleforståelse	OpenSound Navigator™	Niveau 1	Niveau 2
	- Effekt af balancering	100 %	50 %
	- Maks. fjernelse af støj	9 dB	5 dB
	OpenSound Optimizer™	•	•
	Speech Guard™ LX	Niveau 1	Niveau 2
	Spatial Sound™ LX	4 estimatorer	2 estimatorer
	Soft Speech Booster LX	•	•
	Speech Rescue™ LX	•	•
Lydkvalitet	Clear Dynamics	•	-
	Spatial Noise Management	•	-
	Frekvensbåndbredde*	10 KHz	8 KHz
	Processeringskanaler	64	48
	Bass Boost (streaming)	•	•
Lyttekomfort	Transient Noise Management	4 konfigurationer	Til/Fra
	Feedback shield LX	•	•
	Wind Noise Management	•	•
Individualisering & optimering af tilpasning	YouMatic™ LX	3 konfigurationer	2 konfigurationer
	Tilpasningskontroller	16	14
	Direktionalitetsmuligheder	•	•
	Tilvænningsstrin	•	•
	Oticon Firmware Updater	•	•
	Rationaler	VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0	VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0
Tilslutning til verden	Stereo-streaming (2,4 GHz)	•	•
	Oticon ON App	•	•
	ConnectClip	•	•
	Remote Control 3.0	•	•
	Tv Adapter 3.0	•	•
	Phone Adapter 2.0	•	•
	Tinnitus SoundSupport™	•	•

* Tilgængelig frekvensbåndbredde for justering af forstærkning under tilpasningen.

DriftsforholdTemperatur: +5° C til +40° C
Relativ luftfugtighed: 5 til 93 %, ikke-kondenserende**Opbevarings- og transportforhold**

Temperatur og luftfugtighed må ikke overstige de følgende grænseværdier i længere perioder i forbindelse med transport og opbevaring.

Transport:Temperatur: -20° C til +60° C
Relativ luftfugtighed: 5 til 93 %, ikke-kondenserende**Opbevaring:**Temperatur: -20° C til +30° C
Relativ luftfugtighed: 5 til 93 %, ikke-kondenserende

Oticon Opn S™ miniRITE R er en diskret model, med genopladeligt lithium-ion-batteri. Den induktive oplader sikrer fuld opladning inden for 3 timer.

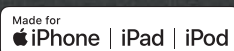
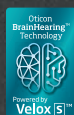
miniRITE R er udstyret med telespole og dobbelt trykknop.

OpenSound Navigator™ hjælper brugerne med at udvælge og forstå tale i alle lydmiljøer ved at balancere lydkilder og dæmpe støj.

OpenSound Optimizer™ forbedrer brugernes lytteoplevelse og komfort ved at blokere feedback og sikre målrettet forstærkning af lydkilder.

TwinLink™ trådløs teknologi kombinerer binaural kommunikation og 2,4 GHz tilslutningsmuligheder med stereo-streaming direkte fra digitale enheder.

Oticon Opn S er baseret på den kraftfulde platform Velox S™ med fuldt programmerbar firmware for fremtidige opdateringer.

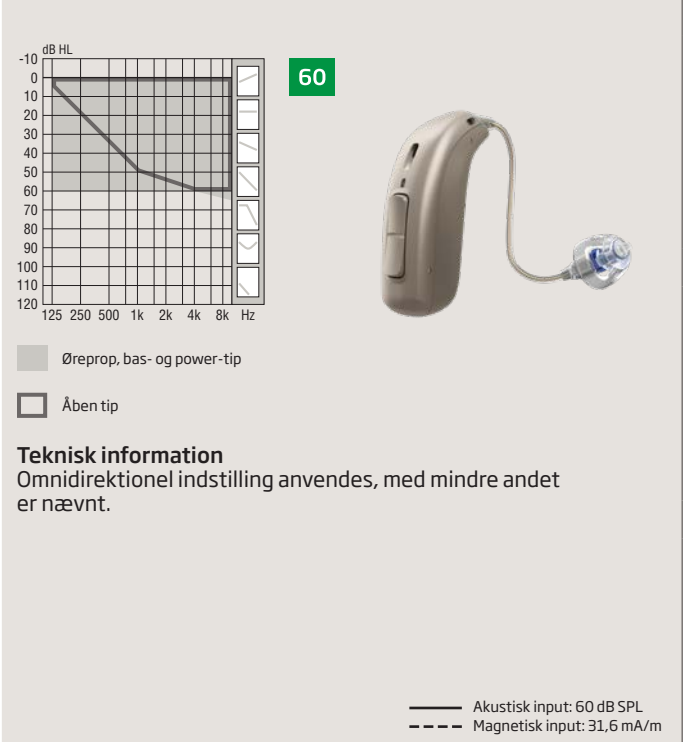
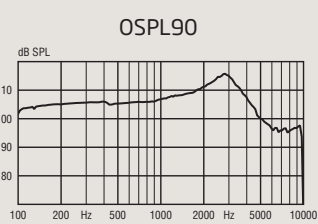
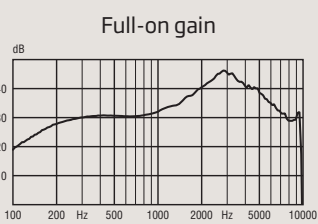
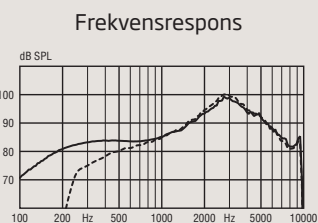
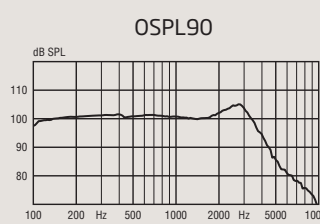
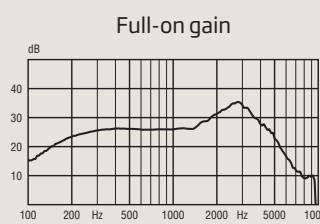
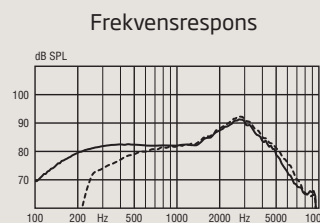


IP68

oticon
PEOPLE FIRST
Du kan finde information om kompatibilitet på www.oticon.dk/connectivity

Oticon Opn S 1

miniRITE R 60

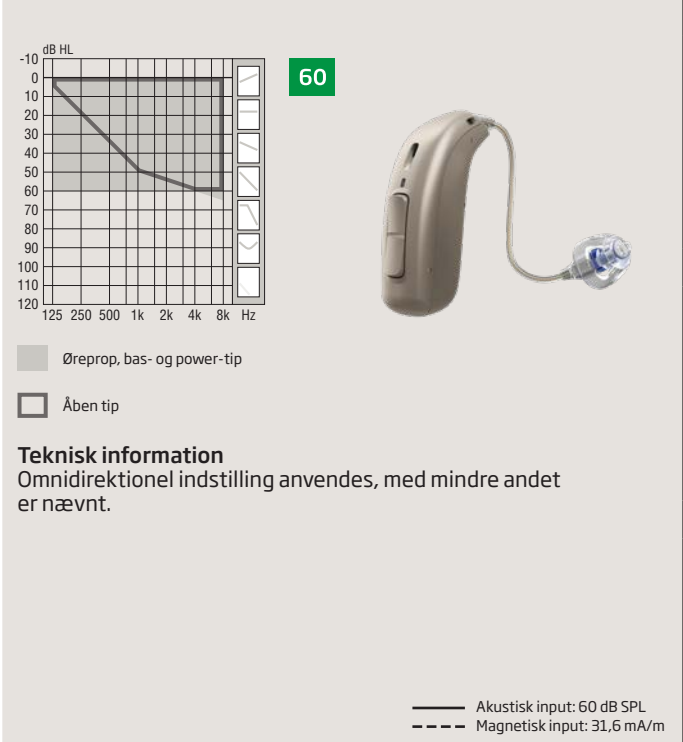
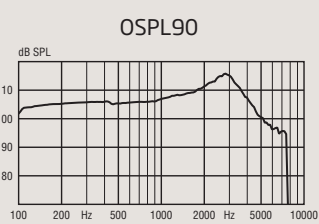
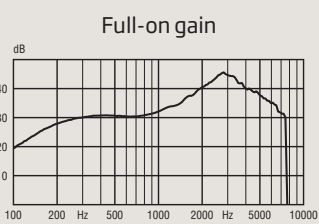
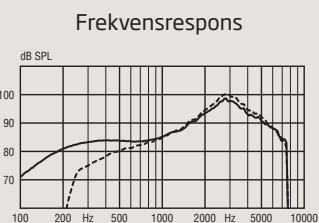
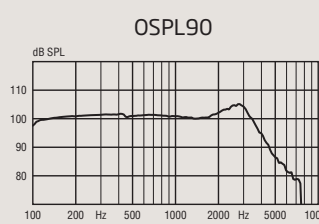
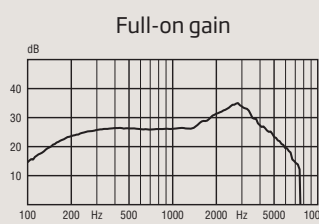
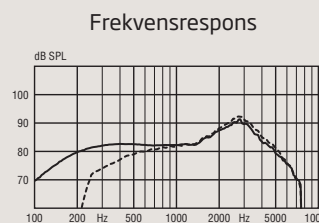
Tekniske oplysninger		Øre-simulator Målt i henhold til IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV og IEC 60318-4:2010	2CC-kobler Målt i henhold til ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 og IEC 60318-5:2006
 60 Øreprop, bas- og power-tip Åben tip Teknisk information Omnidirektional indstilling anvendes, med mindre andet er nævnt.		 OSPL90  Full-on gain  Frekvensrespons	 OSPL90  Full-on gain  Frekvensrespons
OSPL90		Peak 1.600 Hz HFA-OSPL90	Peak 1.600 Hz HFA-OSPL90
Full-on-gain*		Peak 1.600 Hz HFA-FOG	Peak 1.600 Hz HFA-FOG
Reference-testforstærkning		30 dB	26 dB
Frekvensområde		110-9700 Hz	100-9200 Hz
Telespole-output (1600 Hz)		1 mA/m felt 10 mA/m felt SPLIT V/H	- - 85/85 dB SPL
Total harmonisk forvrængning (Input 70 dB SPL)		500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2 % <2 % <2 %
Ækvivalent input støjniveau		Omni Dir	18 dB SPL 27 dB SPL
Batteri		Lithium-ion	Lithium-ion
Forventet driftstid i timer**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 16/21/26 dB SPL	

* Målt med gain-kontrol indstillet til full-on minus 20 dB og med et input på 70 dB. Hermed opnås en Full-on gain-respons svarende til eksempelvis EC 60118-0+A1:1994, men uden påvirkning af feedback.

** Forventet driftstid for genopladeligt batteri afhænger af brugsmønster, aktive funktioner, høretab, lyd miljø, batterilevetid og brug af trådløst tilbehør.

Oticon Opn S 2 & 3

miniRITE R 60

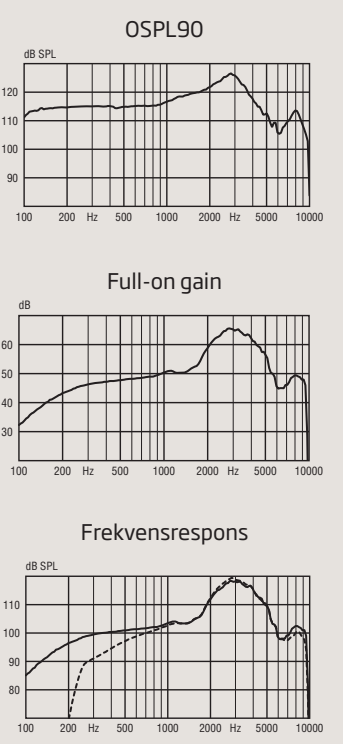
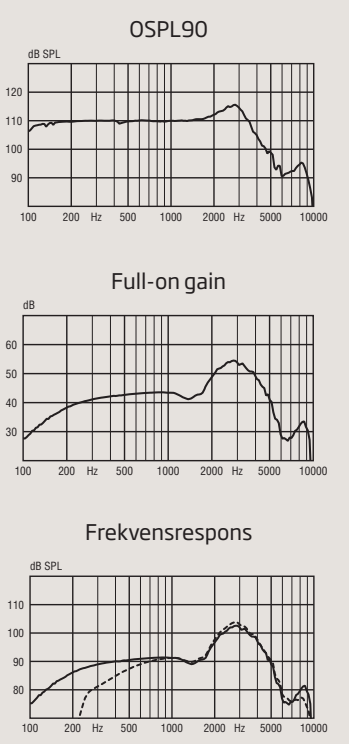
Tekniske oplysninger		Øre-simulator Målt i henhold til IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV og IEC 60318-4:2010	2CC-kobler Målt i henhold til ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 og IEC 60318-5:2006
 60 Øreprop, bas- og power-tip Åben tip Teknisk information Omnidirektional indstilling anvendes, med mindre andet er nævnt.		 OSPL90  Full-on gain  Frekvensrespons	 OSPL90  Full-on gain  Frekvensrespons
OSPL90		Peak 1.600 Hz HFA-OSPL90	Peak 1.600 Hz HFA-OSPL90
Full-on-gain*		Peak 1.600 Hz HFA-FOG	Peak 1.600 Hz HFA-FOG
Reference-testforstærkning		30 dB	26 dB
Frekvensområde		110-7500 Hz	100-7500 Hz
Telespole-output (1600 Hz)		1 mA/m felt 10 mA/m felt SPLIT V/H	- - 85/85 dB SPL
Total harmonisk forvrængning (Input 70 dB SPL)		500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2 % <2 % <2 %
Ækvivalent input støjniveau		Omni Dir	19 dB SPL 28 dB SPL
Batteri		Lithium-ion	Lithium-ion
Forventet driftstid i timer**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 16/21/26 dB SPL	

* Målt med gain-kontrol indstillet til full-on minus 20 dB og med et input på 70 dB. Hermed opnås en Full-on gain-respons svarende til eksempelvis EC 60118-0+A1:1994, men uden påvirkning af feedback.

** Forventet driftstid for genopladeligt batteri afhænger af brugsmønster, aktive funktioner, høretab, lyd miljø, batterilevetid og brug af trådløst tilbehør.

Oticon Opn S 1

miniRITE R 85

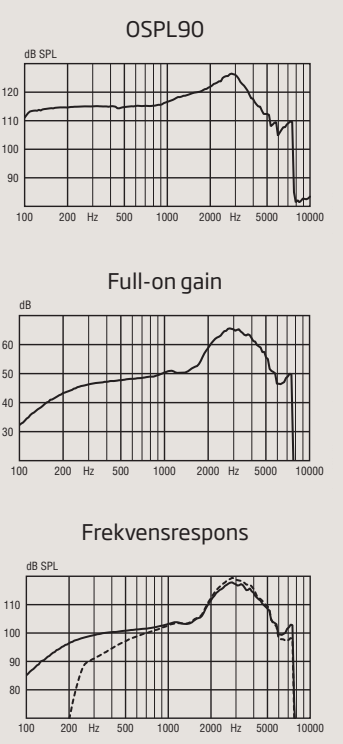
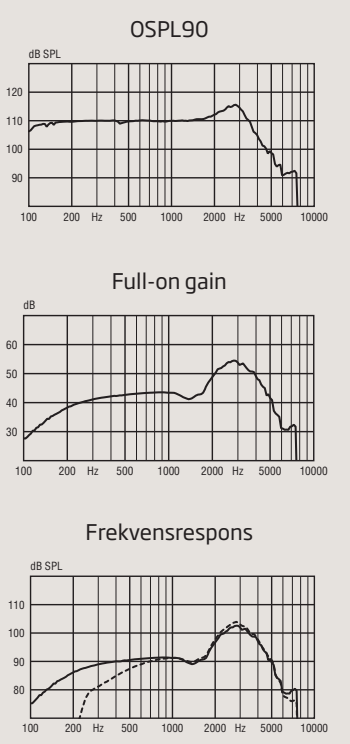
Tekniske oplysninger		Øre-simulator Målt i henhold til IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV og IEC 60318-4:2010	2CC-kobler Målt i henhold til ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 og IEC 60318-5:2006
 85 Øreprop, bas- og power-tip Åben tip Teknisk information Omnidirektional indstilling anvendes, med mindre andet er nævnt.		 Akustisk input: 60 dB SPL Magnetisk input: 31,6 mA/m	 Akustisk input: 60 dB SPL Magnetisk input: 31,6 mA/m
OSPL90		Peak 1.600 Hz HFA-OSPL90	Peak 1.600 Hz HFA-OSPL90
Full-on-gain*		Peak 1.600 Hz HFA-FOG	Peak 1.600 Hz HFA-FOG
Reference-testforstærkning		45 dB	34 dB
Frekvensområde		120-9500 Hz	100-8.500 Hz
Telespole-output (1600 Hz)		1 mA/m felt 10 mA/m felt SPLIT V/H	- - 94/94 dB SPL
Total harmonisk forvrængning (Input 70 dB SPL)		500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2 % <2 % <2 %
Ækvivalent input støjniveau		Omni Dir	20 dB SPL 29 dB SPL
Batteri		Lithium-ion	Lithium-ion
Forventet driftstid i timer**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 20/20/24 dB SPL	

* Målt med gain-kontrol indstillet til full-on minus 20 dB og med et input på 70 dB. Hermed opnås en Full-on gain-respons svarende til eksempelvis EC 60118-0+A1:1994, men uden påvirkning af feedback..

** Forventet driftstid for genopladeligt batteri afhænger af brugsmønster, aktive funktioner, høretab, lyd miljø, batterilevetid og brug af trådløst tilbehør.

Oticon Opn S 2 & 3

miniRITE R 85

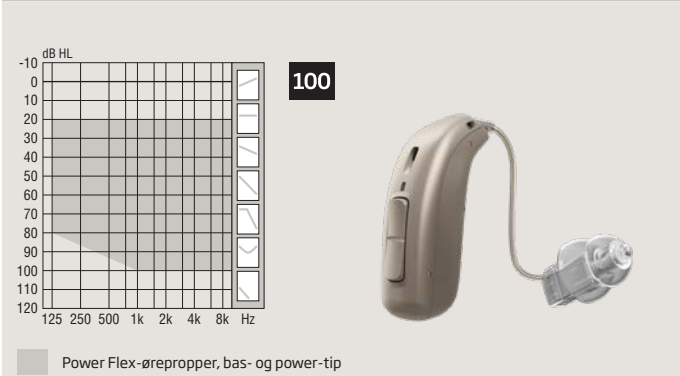
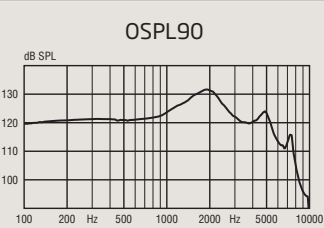
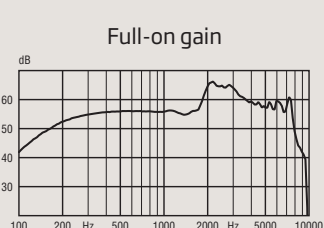
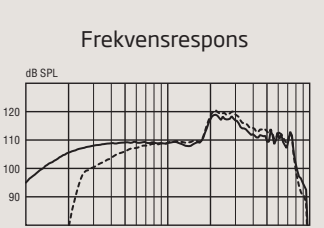
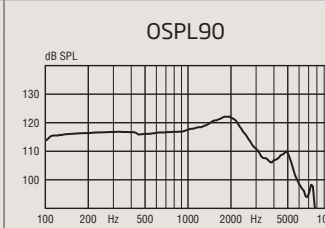
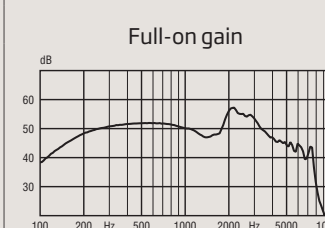
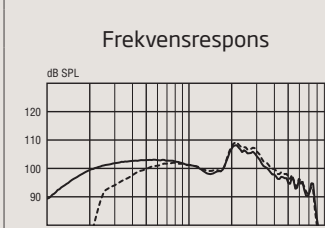
Tekniske oplysninger		Øre-simulator Målt i henhold til IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV og IEC 60318-4:2010	2CC-kobler Målt i henhold til ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 og IEC 60318-5:2006
 85 Øreprop, bas- og power-tip Åben tip Teknisk information Omnidirektional indstilling anvendes, med mindre andet er nævnt.		 Akustisk input: 60 dB SPL Magnetisk input: 31,6 mA/m	 Akustisk input: 60 dB SPL Magnetisk input: 31,6 mA/m
OSPL90		Peak 1.600 Hz HFA-OSPL90	Peak 1.600 Hz HFA-OSPL90
Full-on-gain*		Peak 1.600 Hz HFA-FOG	Peak 1.600 Hz HFA-FOG
Reference-testforstærkning		45 dB	34 dB
Frekvensområde		120-7500 Hz	100-7500 Hz
Telespole-output (1600 Hz)		1 mA/m felt 10 mA/m felt SPLIT V/H	- - 94/94 dB SPL
Total harmonisk forvrængning (Input 70 dB SPL)		500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2 % <2 % <2 %
Ækvivalent input støjniveau		Omni Dir	21 dB SPL 30 dB SPL
Batteri		Lithium-ion	Lithium-ion
Forventet driftstid i timer**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 20/20/24 dB SPL	

* Målt med gain-kontrol indstillet til full-on minus 20 dB og med et input på 70 dB. Hermed opnås en Full-on gain-respons svarende til eksempelvis EC 60118-0+A1:1994, men uden påvirkning af feedback.

** Forventet driftstid for genopladeligt batteri afhænger af brugsmønster, aktive funktioner, høretab, lyd miljø, batterilevetid og brug af trådløst tilbehør.

Oticon Opn S 1

miniRITE R 100

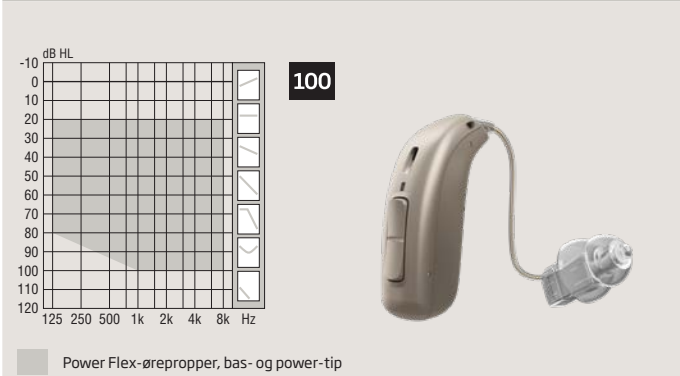
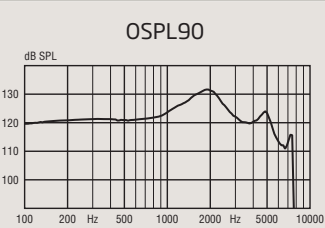
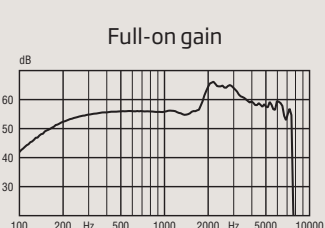
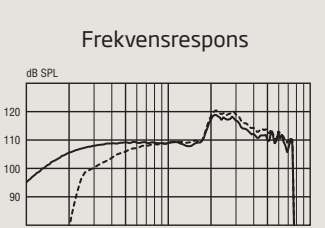
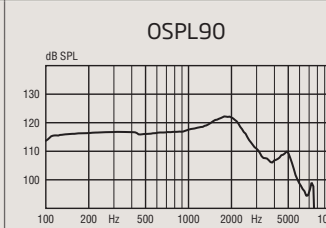
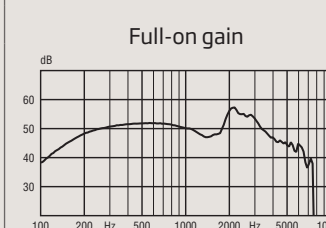
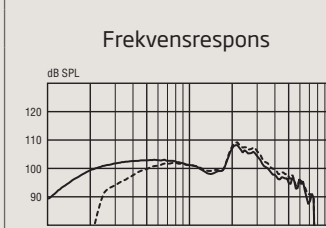
Tekniske oplysninger		Øre-simulator Målt i henhold til IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV og IEC 60318-4:2010	2CC-kobler Målt i henhold til ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 og IEC 60318-5:2006
 Power Flex-ørepropper, bas- og power-tip Teknisk information Omnidirektional indstilling anvendes, med mindre andet er nævnt. Høreapparatadvarsel Høreapparatets maksimale lydtryk kan overskride 132 dB SPL (IEC 711). Der skal tages særlig hensyn ved tilpasning og brug af dette apparat, da der er risiko for at skade brugerens resterende hørelse. — Akustisk input: 60 dB SPL - - - Magnetisk input: 31,6 mA/m		 OSPL90  Full-on gain  Frekvensrespons	 OSPL90  Full-on gain  Frekvensrespons
OSPL90		Peak 132 dB SPL	Peak 122 dB SPL
HFA-OSPL90		130 dB SPL	121 dB SPL
Full-on-gain*		127 dB SPL	118 dB SPL
Reference-testforstærkning		Peak 66 dB	57 dB
Frekvensområde		1.600 Hz 56 dB	1.600 Hz 48 dB
Telespole-output (1600 Hz)		HFA-FOG 59 dB	HFA-FOG 51 dB
Total harmonisk forvrængning (Input 70 dB SPL)		49 dB	42 dB
Ækvivalent input støjniveau		100-8500 Hz	100-8000 Hz
Batteri		1 mA/m felt 86 dB SPL	-
Forventet driftstid i timer**		10 mA/m felt 106 dB SPL	-
IRIL (IEC 60118-13:2011)		-	103/103 dB SPL
Total harmonisk forvrængning (Input 70 dB SPL)		500 Hz <7 %	500 Hz <2 %
Ækvivalent input støjniveau		800 Hz <4 %	800 Hz <2 %
Batteri		1600 Hz <2 %	1600 Hz <2 %
Forventet driftstid i timer**		Omni 23 dB SPL	Omni 19 dB SPL
IRIL (IEC 60118-13:2011)		Dir 32 dB SPL	Dir 30 dB SPL
Total harmonisk forvrængning (Input 70 dB SPL)		Lithium-ion	Lithium-ion
Ækvivalent input støjniveau		24	24
Batteri		700/1400/2000 MHz: 18/21/28 dB SPL	700/1400/2000 MHz: 18/21/28 dB SPL
Forventet driftstid i timer**			
IRIL (IEC 60118-13:2011)			

* Målt med gain-kontrol indstillet til full-on minus 20 dB og med et input på 70 dB. Hermed opnås en Full-on gain-respons svarende til eksempelvis EC 60118-0+A1:1994, men uden påvirkning af feedback.

** Forventet driftstid for genopladeligt batteri afhænger af brugsmønster, aktive funktioner, høretab, lydmiljø, batterilevetid og brug af trådløst tilbehør.

Oticon Opn S 2 & 3

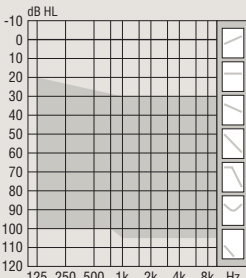
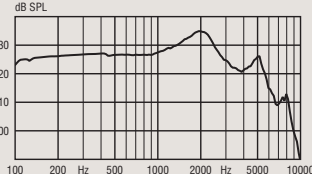
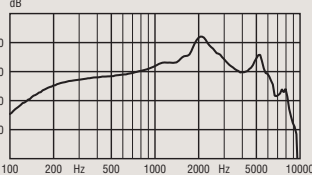
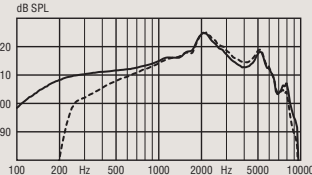
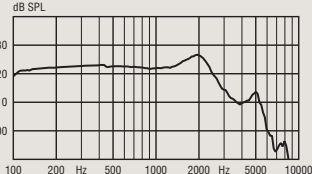
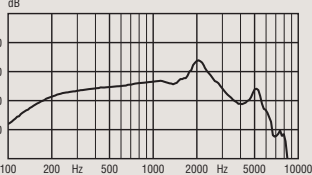
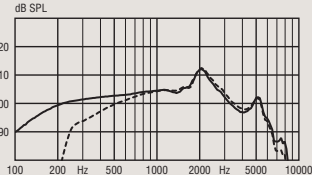
miniRITE R 100

Tekniske oplysninger		Øre-simulator Målt i henhold til IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV og IEC 60318-4:2010	2CC-kobler Målt i henhold til ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 og IEC 60318-5:2006
 Power Flex-ørepropper, bas- og power-tip Teknisk information Omnidirektional indstilling anvendes, med mindre andet er nævnt. Høreapparatadvarsel Høreapparatets maksimale lydtryk kan overskride 132 dB SPL (IEC 711). Der skal tages særlig hensyn ved tilpasning og brug af dette apparat, da der er risiko for at skade brugerens resterende hørelse. — Akustisk input: 60 dB SPL - - - Magnetisk input: 31,6 mA/m		 OSPL90  Full-on gain  Frekvensrespons	 OSPL90  Full-on gain  Frekvensrespons
OSPL90		Peak 132 dB SPL	Peak 122 dB SPL
HFA-OSPL90		130 dB SPL	121 dB SPL
Full-on-gain*		127 dB SPL	118 dB SPL
Reference-testforstærkning		Peak 66 dB	57 dB
Frekvensområde		1.600 Hz 56 dB	1.600 Hz 48 dB
Telespole-output (1600 Hz)		HFA-FOG 59 dB	HFA-FOG 51 dB
Total harmonisk forvrængning (Input 70 dB SPL)		49 dB	42 dB
Ækvivalent input støjniveau		100-7500 Hz	100-7500 Hz
Batteri		1 mA/m felt 86 dB SPL	-
Forventet driftstid i timer**		10 mA/m felt 106 dB SPL	-
IRIL (IEC 60118-13:2011)		-	103/103 dB SPL
Total harmonisk forvrængning (Input 70 dB SPL)		500 Hz <7 %	500 Hz <2 %
Ækvivalent input støjniveau		800 Hz <4 %	800 Hz <2 %
Batteri		1600 Hz <2 %	1600 Hz <2 %
Forventet driftstid i timer**		Omni 23 dB SPL	Omni 19 dB SPL
IRIL (IEC 60118-13:2011)		Dir 32 dB SPL	Dir 30 dB SPL
Total harmonisk forvrængning (Input 70 dB SPL)		Lithium-ion	Lithium-ion
Ækvivalent input støjniveau		24	24
Batteri		700/1400/2000 MHz: 18/21/28 dB SPL	700/1400/2000 MHz: 18/21/28 dB SPL
Forventet driftstid i timer**			
IRIL (IEC 60118-13:2011)			

* Målt med gain-kontrol indstillet til full-on minus 20 dB og med et input på 70 dB. Hermed opnås en Full-on gain-respons svarende til eksempelvis EC 60118-0+A1:1994, men uden påvirkning af feedback.

** Forventet driftstid for genopladeligt batteri afhænger af brugsmønster, aktive funktioner, høretab, lydmiljø, batterilevetid og brug af trådløst tilbehør.

Oticon Opn S 1

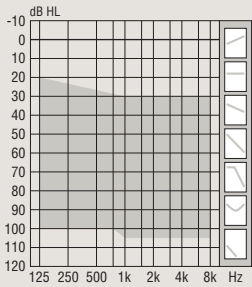
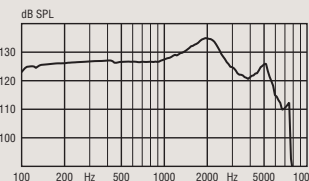
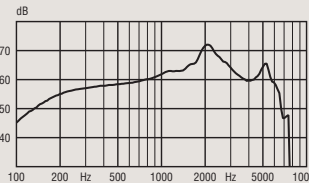
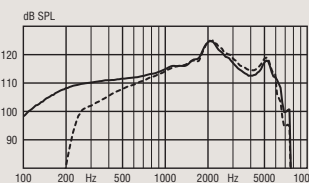
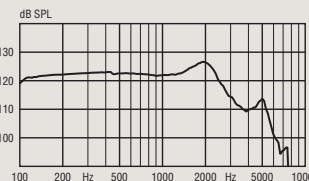
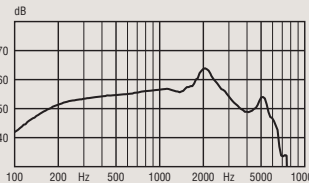
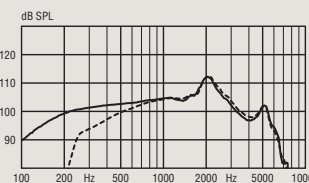
Tekniske oplysninger		Øre-simulator Målt i henhold til IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV og IEC 60318-4:2010	2CC-kobler Målt i henhold til ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 og IEC 60318-5:2006
 105  Power Flex-ørepropper Teknisk information Omnidirektional indstilling anvendes, med mindre andet er nævnt. Høreapparatadvarsel Høreapparatets maksimale lydtryk kan overskride 132 dB SPL (IEC 711). Der skal tages særlig hensyn ved tilpasning og brug af dette apparat, da der er risiko for at skade brugerens resterende hørelse. Akustisk input: 60 dB SPL Magnetisk input: 31,6 mA/m		OSPL90  Full-on gain  Frekvensrespons 	OSPL90  Full-on gain  Frekvensrespons 
OSPL90	Peak 1.600 Hz HFA-OSPL90	135 dB SPL 132 dB SPL 130 dB SPL	127 dB SPL 125 dB SPL 122 dB SPL
Full-on-gain*	Peak 1.600 Hz HFA-FOG	72 dB 65 dB 65 dB	64 dB 57 dB 57 dB
Reference-testforstærkning		58 dB	46 dB
Frekvensområde		100-8200 Hz	100-7.800 Hz
Telespole-output (1600 Hz)	1 mA/m felt 10 mA/m felt SPLIT V/H	96 dB SPL 116 dB SPL -	- - 105/105 dB SPL
Total harmonisk forvrængning (Input 70 dB SPL)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2 % <2 % <3 %	<2 % <2 % <2 %
Ækvivalent input støjniveau	Omni Dir	18 dB SPL 28 dB SPL	18 dB SPL 29 dB SPL
Batteri		Lithium-ion	Lithium-ion
Forventet driftstid i timer**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 38/18/39 dB SPL	

* Målt med gain-kontrol indstillet til full-on minus 20 dB og med et input på 70 dB. Hermed opnås en Full-on gain-respons svarende til eksempelvis EC 60118-0+A1:1994, men uden påvirkning af feedback.

** Forventet driftstid for genopladeligt batteri afhænger af brugsmønster, aktive funktioner, høretab, lyd miljø, batterilevetid og brug af trådløst tilbehør.

miniRITE R 105

Oticon Opn S 2 & 3

Tekniske oplysninger		Øre-simulator Målt i henhold til IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV og IEC 60318-4:2010	2CC-kabler Målt i henhold til ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 og IEC 60318-5:2006
 105  Power Flex-ørepropper		OSPL90  Full-on gain  Frekvensrespons 	OSPL90  Full-on gain  Frekvensrespons 
OSPL90	Peak 1.600 Hz	135 dB SPL 132 dB SPL	127 dB SPL 125 dB SPL
	HFA-OSPL90	130 dB SPL	122 dB SPL
Full-on-gain*	Peak 1.600 Hz HFA-FOG	72 dB 65 dB 65 dB	64 dB 57 dB 57 dB
Reference-testforstærkning		58 dB	46 dB
Frekvensområde		100-7500 Hz	100-6500 Hz
Telespole-output (1600 Hz)	1 mA/m felt 10 mA/m felt SPLIT V/H	96 dB SPL 116 dB SPL -	- - 105/105 dB SPL
Total harmonisk forvrængning (Input 70 dB SPL)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2 % <2 % <3 %	<2 % <2 % <2 %
Ækvivalent input støjniveau	Omni Dir	18 dB SPL 28 dB SPL	18 dB SPL 29 dB SPL
Batteri		Lithium-ion	Lithium-ion
Forventet driftstid i timer**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 38/18/39 dB SPL	

* Målt med gain-kontrol indstillet til full-on minus 20 dB og med et input på 70 dB. Hermed opnås en Full-on gain-respons svarende til eksempelvis EC 60118-0+A1:1994, men uden påvirkning af feedback.

** Forventet driftstid for genopladeligt batteri afhænger af brugsmønster, aktive funktioner, høretab, lyd miljø, batterilevetid og brug af trådløst tilbehør.

Charger 1.0

miniRITE R

Opladeren er designet til genopladning af miniRITE R, der er en del af høreapparatfamilien Oticon Opn S™. Opladeren er baseret på induktiv teknologi. Høreapparaterne oplades trådløst inden for tre timer. En magnetisk forbindelse sikrer, at høreapparaterne altid forbliver i opladeren. Opladeren er designet til at forenkle den daglige opladning med få, enkle handlinger.

- Opladning**

 - Designet til at gøre den daglige rutine for opladning helt enkel.
 - Man skal bare tage høreapparaterne af og sætte dem i opladeren - der er intet behov for at åbne batteriskufferne. Så enkelt, at det kan gøres med kun én hånd.
 - Opladningen af høreapparaterne starter automatisk, når de er anbragt i opladeren, og de tændes automatisk, når de tages ud af opladeren.
 - Høreapparaterne oplades hver nat, og de vil være fuldt opladet i løbet af dagen, når de skal bruges.
- Fakta om produktet**

 - Induktiv opladning
 - Indikator for TÆNDT/SLUKKET på oplader
 - Opladeren leveres med fastmonteret ledning
 - Meget stabil med gummifødder
 - Blød, rund form for nem rengøring
 - Blød rejsepung inkluderet

Intuitiv afkodning med få enkle LED-meddelelser direkte på høreapparatet:

- Rød = opladning i gang
- Grøn = fuldt opladet

Korte opladningstider. Hvis høreapparaterne er helt afladet er opladningstiden:

- 3 timer = fuldt opladet
- 1 timer = 50 % opladet
- 0,5 t. = 25 % opladet



* Strømtikket kan variere fra land til land

Charger 1.0

miniRITE R

Tekniske data: Oplader	
Navn	Charger 1.0, Oticon miniRITE R
Designet til/kompatibilitet	Oticon Opn S, Oticon Opn Play: miniRITE R
Dimensioner	Ø 95 mm / samlet højde 39 mm
Vægt	140 gram
Farve	Sort
Strømforsyningsstik	USB A
Statusindikator	LED på oplader: Statusindikator for TÆNDT/SLUKKET LED på høreapparat: Angiver opladningstilstand
Høreapparaters opladningstid	Maks. 3 timer afhængigt af batteriets tilstand (Temperatur: +5° C til 35° C) Maks. 4 timer afhængigt af batteriets tilstand (Temperatur: +5° C til +40° C)
Strømforsyning	Medfølgende strømforsyning
Indgangsspænding	5 V DC
Indgangsstrøm	< 0,2 A (ved opladning af to høreapparater) < 10 mA stand-by (ved ingen tilsluttede høreapparater)
Ledning	Fastmonteret ledning / 150 cm
Tilsluttet til eksternt udstyr	Når dette udstyr er forbundet til eksternt udstyr, der sidder i en stikkontakt, skal det opfylde IEC-62368 (eller IEC-60065, IEC-60950 indtil juni 20, 2019) eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Brugsbetingelser	
Driftsforhold	Temperatur: +5° C til +40° C Relativ luftfugtighed: 5 til 93 %, ikke-kondenserende
Opbevarings- og transportforhold	Temperatur: -25° C til +70° C Relativ luftfugtighed: 5 til 93 %, ikke-kondenserende
Atmosfærisk tryk:	700 hPa til 1060 hPa

Tekniske data: Strømforsyning	
Strømforsyning	AN05x-050A
Indgangsspænding	100-240 V AC
Indgangsstrøm	0,2 A
Indgangsfrekvens	50-60 Hz
Udgangsspænding	5 V DC
Udgangsstrøm	1 A



Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
+45 3917 7100

198045DK / 2018.12.06



www.oticon.dk

oticon
PEOPLE FIRST