

Oticon ON - Guide IFTTT

Changer de programme auditif en fonction du lieu où je suis

Ce dont vous aurez besoin :

Aides auditives Opn · iPhone 5 (ou plus récent) · Appli Oticon ON
Compte ON · Compte IFTTT · Appli IF

Préparation

Comment préparer votre iPhone :

- Allez sur l'app store de votre iPhone
- Trouvez l'application Oticon ON dans les résultats de recherche et cliquez sur l'icône
- Trouvez et cliquez sur le bouton « installer » pour télécharger et installer l'application sur votre iPhone
- De la même manière, installez l'application « IF »
- Ouvrez Oticon ON. Suivez les instructions pour créer votre compte ON dans l'application

Comment créer un compte IFTTT :

- Allez sur www.ifttt.com ou passez par l'application ON
- Cliquez sur « Sign Up » dans le coin en haut à droite
- Renseignez les informations demandées et cliquez sur « Create account »

Create your free account

You're only seconds away from doing more with the products you love.


Your Email

Choose a Password

Create account


1

Allez sur www.ifttt.com, connectez-vous à votre nouveau compte IFTTT et cliquez sur « My Recipes » dans la barre de menu puis cliquez sur « Create a Recipe ».

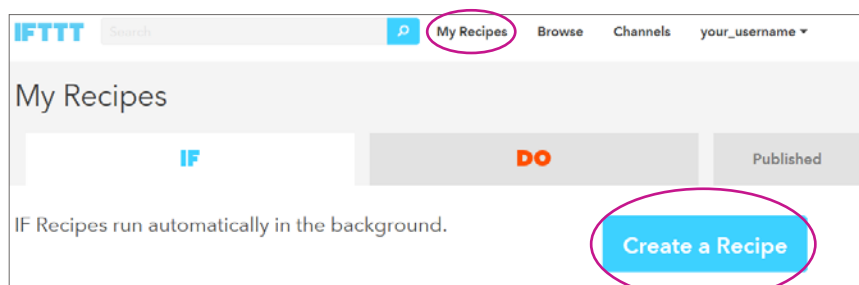


2

Cliquez sur le mot « this » en bleu

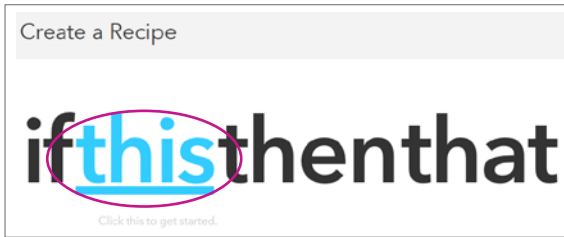


3

Dans la barre de recherche, tapez « location » et cliquez sur « iOS Location »

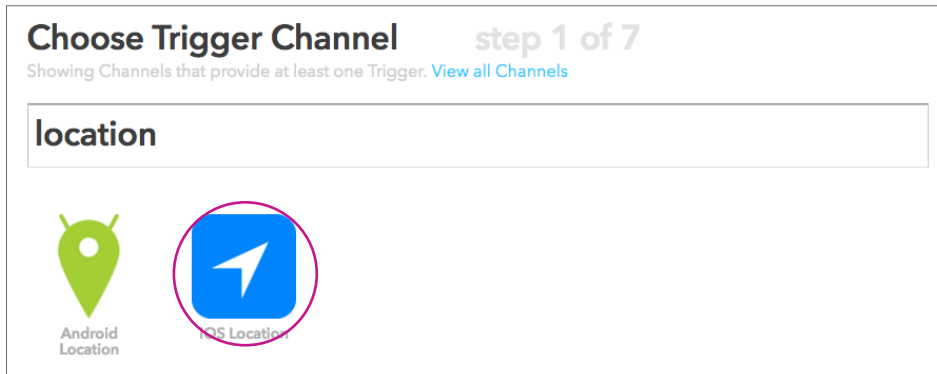


4

Sélectionnez l'option correspondant au moment auquel vous souhaitez changer de programme auditif.

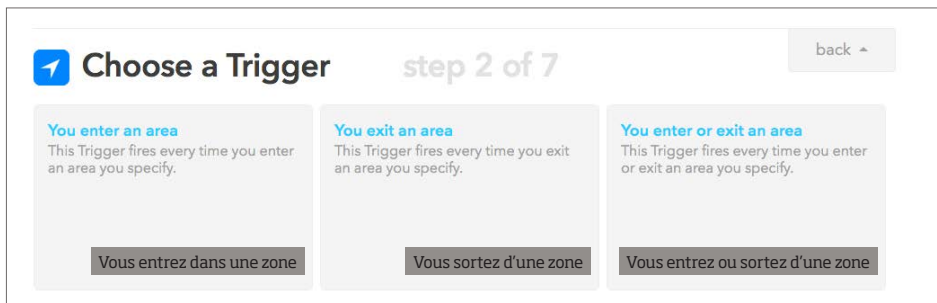

5

Indiquez votre position en cherchant et sélectionnant la zone dans laquelle vous voulez changer de programme. Ensuite, appuyez sur « Create Trigger ». (N'oubliez pas d'accepter la géolocalisation de l'application IFTTT et de votre appareil mobile)

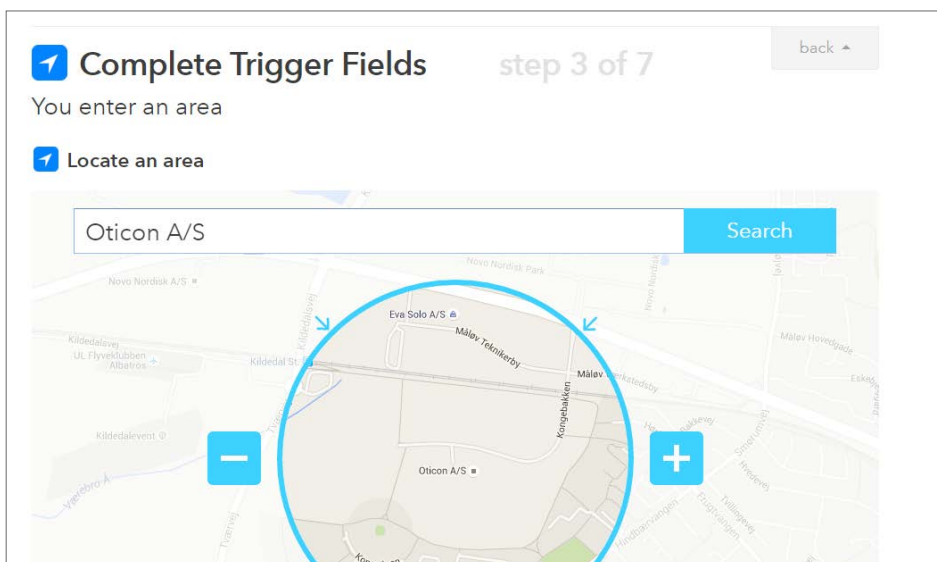


6

Cliquez sur le mot « that » en bleu




7

Tapez « Oticon » et sélectionnez l'application en cliquant sur « Oticon ON ».

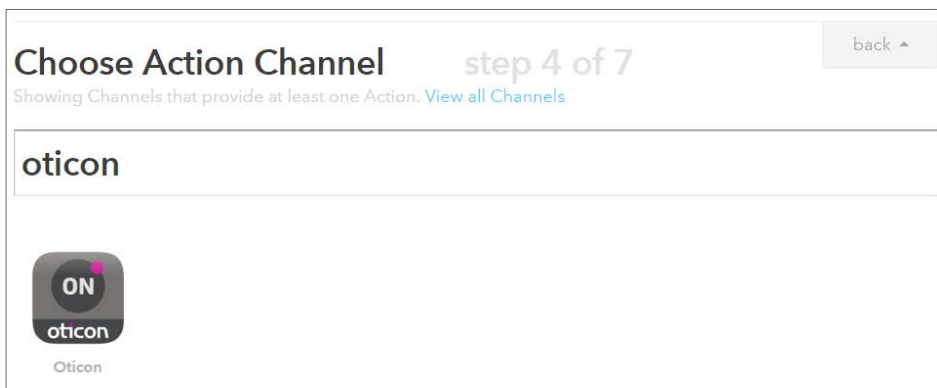

8

Cliquez sur Connect. Dans la fenêtre pop-up, connectez-vous à votre compte Oticon ON (sauf si vous êtes déjà connecté à votre compte)

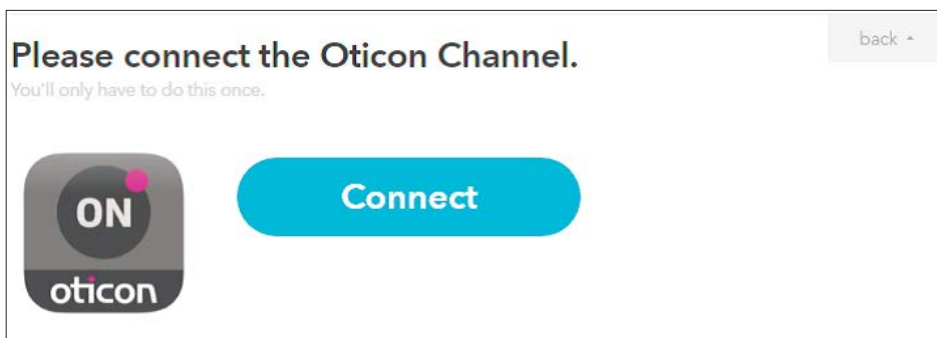

9

Sélectionnez l'action « Set a program ».



10

Sélectionnez le programme voulu dans la liste déroulante. Puis cliquez sur « Create Action ».

Complete Action Fields step 6 of 7 back ▲

Set a program

Program ID to be set

Please select ▼

Program ID to be set on the hearing aid (e.g. RESTAURANT)

Create Action

Please select

P1

P2

P3

TV1

iPhone Mic

11

Enfin, cliquez sur « Create Recipe » pour créer et activer la recette qui change le programme de vos aides auditives lorsque vous êtes dans un endroit particulier.

Recipe Title

If You enter an area, then set a program

use '#' to add tags

☐ Receive notifications when this Recipe runs

Create Recipe

Votre recette est désormais créée. Bonnes connexions!