

Oticon ON IFTTT guide

Recevoir une notification quand quelqu'un sonne à la porte

Ce dont vous aurez besoin :

iPhone 5 (ou plus récent) · Compte IFTTT
Aides auditives Opn · Appli Oticon ON · Compte ON
Ring Video Doorbell* · Appli Ring · Compte Ring



*Vérifiez la disponibilité de cet équipement selon votre pays.

Préparation

Comment préparer votre iPhone :

- Allez sur l'app store de votre iPhone
- Trouvez l'application Oticon ON dans les résultats de recherche et cliquez sur l'icône
- Trouvez et cliquez sur le bouton « installer » pour télécharger et installer l'application sur votre iPhone
- De la même manière, installez l'application Ring ainsi que votre sonnette Ring en utilisant l'application
- Ouvrez Oticon ON. Suivez les instructions pour créer votre compte ON dans l'application

Comment créer un compte IFTTT :

- Allez sur www.ifttt.com ou passez par l'application ON
- Cliquez sur « Sign Up » dans le coin en haut à droite
- Renseignez les informations demandées et cliquez sur « Create account »

Create your free account

You're only seconds away from doing more with the products you love.


Your Email

Choose a Password

Create account

1

Allez sur www.ifttt.com, Allez sur www.ifttt.com, connectez-vous à votre nouveau compte IFTTT et cliquez sur « My Recipes » dans la barre de menu puis cliquez sur « Create a Recipe ».

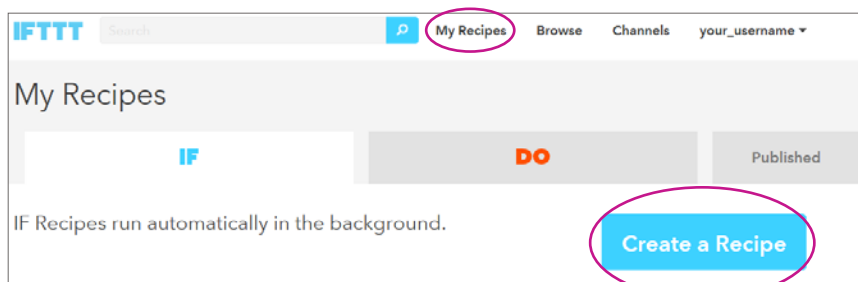


2

Cliquez sur le mot « this » en bleu




3

Dans la barre de recherche, tapez « ring » et cliquez sur l'icône de l'application

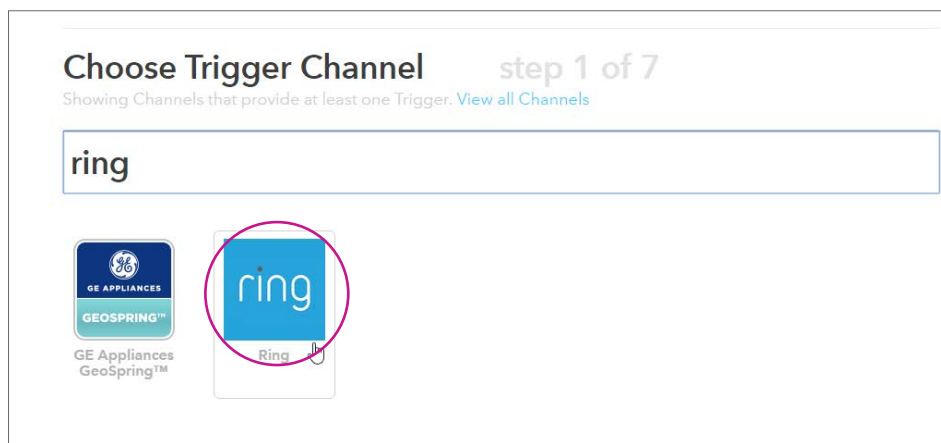


4

Cliquez sur « connect ». Dans la fenêtre pop-up, indiquez les références de votre compte « Ring » et cliquez sur « Next and Done ».

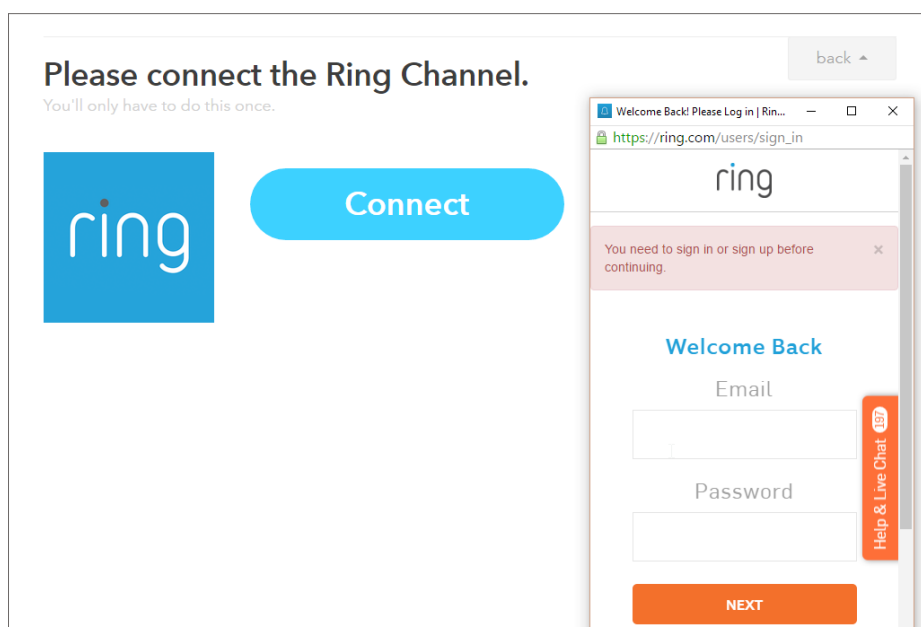


5

Choisissez « New Ding Detected ».

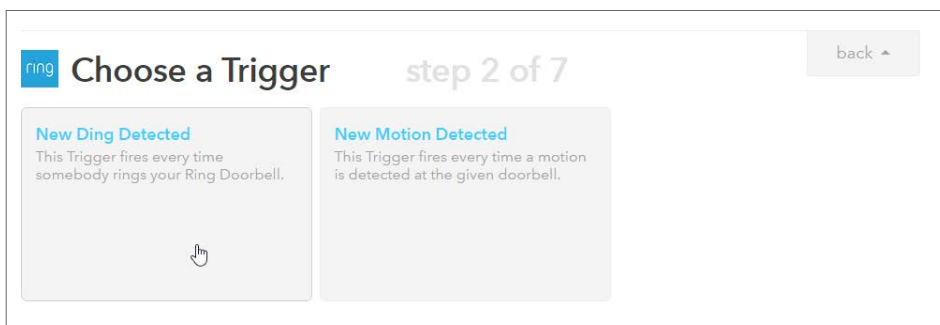

6

Dans la liste déroulante, choisissez la sonnette qui doit déclencher le message dans vos aides auditives et cliquez sur « Create trigger »

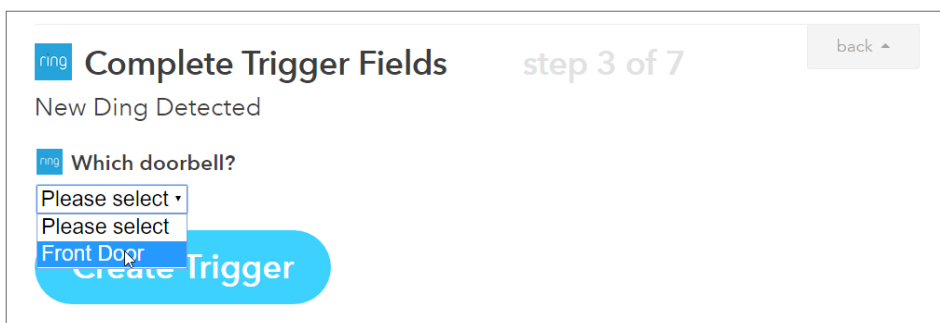


7

Cliquez sur le mot « that » en bleu



8

Cliquez sur Connect. Dans la fenêtre pop-up, connectez-vous à votre compte Oticon ON

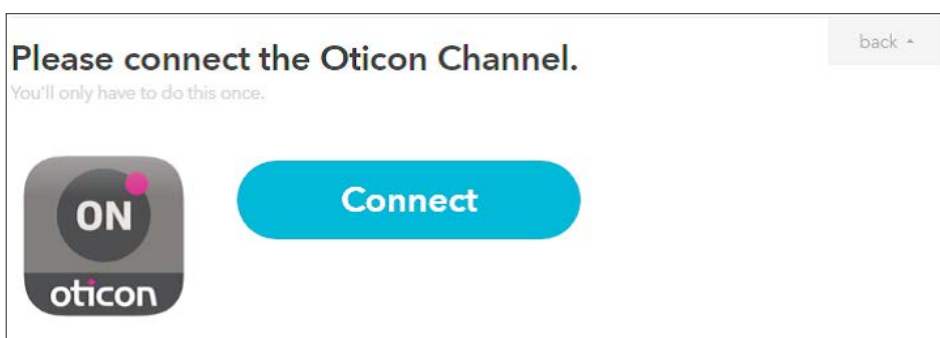

9

Cliquez sur « Play the text to speech »

Choose an Action step 5 of 7 back ▲

Set a program
This Action will set a program on the hearing aid.

Increase the volume
This Action will increase the volume on hearing aid.

Decrease the volume
This Action will decrease the volume on the hearing aid.

Play the text to speech
This Action will play the text to speech on the hearing aid.

10

Dans le champ texte, vous pouvez désormais inscrire le message que vous souhaitez recevoir, par exemple "Quelqu'un sonne à la porte !". Vous pouvez ajouter d'autres informations dans le message en cliquant dans le champ puis sur l'icône en forme de bouteille bleue. Cliquez ensuite sur « Create Action »

Complete Action Fields step 6 of 7 back ▲

Play the text to speech

Text to be played by speech

Someone is at your front door

Text to be played to speech (e.g. Hello user)

Create Action

11

Enfin, cliquez sur « Create Recipe » pour créer et activer la recette qui vous enverra une notification quand quelqu'un sonne à votre porte.

Create and connect step 7 of 7 back ▲

if **then**

New Ding detected at Front Door Play the text to speech

Recipe Title

If new Ding detected at Front Door, then play the text to speech

use '#' to add tags

Receive notifications when this Recipe runs

Create Recipe

Votre recette est désormais créée. Bonnes connexions !