

# Oticon ON Guide IFTTT

## Envoyer un message lorsque la pile est faible

### Ce dont vous aurez besoin :

Aides auditives Opn · Smartphone Android  
Application Oticon ON · Compte ON · Compte IFTTT


### Préparation

Comment préparer votre smartphone Android :

- Allez sur [www.play.google.com](http://www.play.google.com) (votre playstore)
- Dans la barre de recherche, tapez « Oticon ON » and appuyer sur Entrée ou cliquez sur la loupe
- Trouvez Oticon ON dans la section applications des résultats de recherche et cliquez sur l'icône
- Trouvez puis cliquez sur le bouton « installer » pour télécharger et installer l'application sur votre téléphone
- Ouvrez Oticon ON et suivez les instructions dans la section de création de compte ON dans l'application

Comment créer un compte IFTTT :


- Allez sur [www.ifttt.com](http://www.ifttt.com) ou passez par l'application ON
- Cliquez sur « Sign Up » dans le coin en haut à droite
- Renseignez les informations demandées et cliquez sur « Create account »

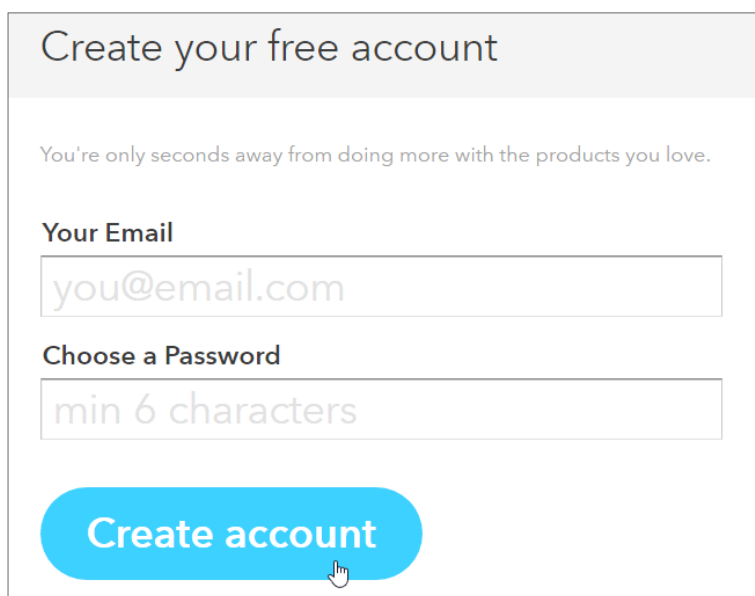

The screenshot shows the IFTTT account creation page. At the top, it says 'Create your free account'. Below that, a message reads 'You're only seconds away from doing more with the products you love.' There are two input fields: 'Your Email' with the placeholder 'you@email.com' and 'Choose a Password' with the placeholder 'min 6 characters'. At the bottom, there is a large blue button labeled 'Create account' with a hand cursor icon pointing to it.


1

Allez sur [www.ifttt.com](http://www.ifttt.com), connectez-vous à votre nouveau compte IFTTT et cliquez sur « My Recipes » dans la barre de menu puis cliquez sur « Create a Recipe ».

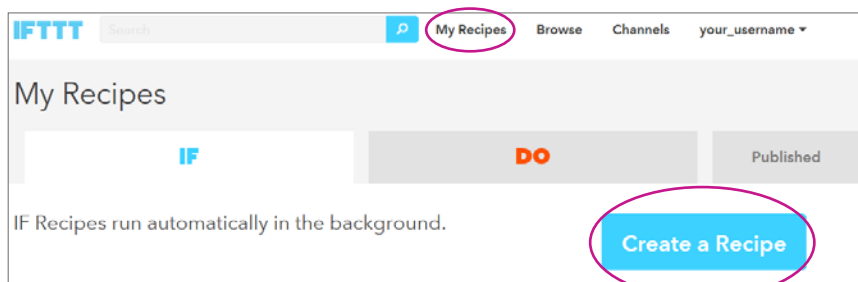


2

Cliquez sur le mot « this » en bleu

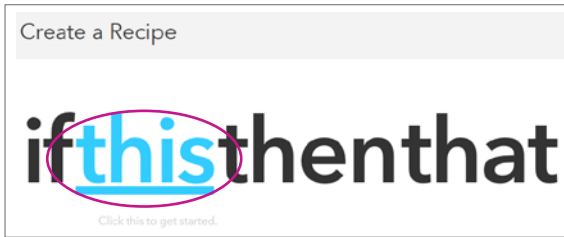


3

Dans la barre de recherche, tapez « oticon » et cliquez sur le bouton « Oticon ON »

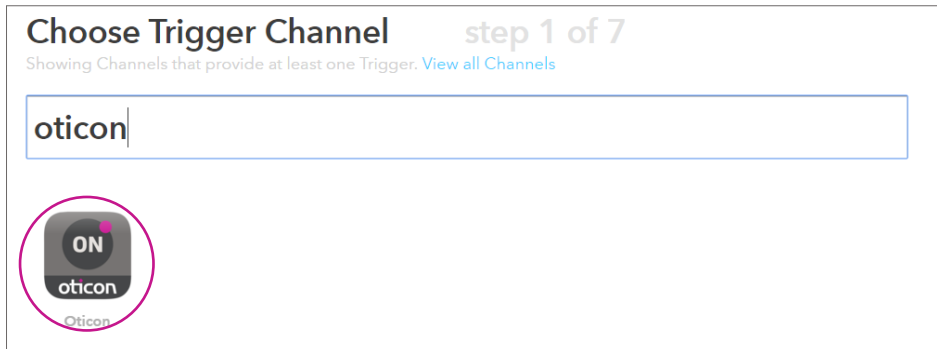


4

Cliquez sur « Connect ». Dans la fenêtre pop-up, connectez-vous à votre compte Oticon ON. Cliquez sur « Continue to the next step ».

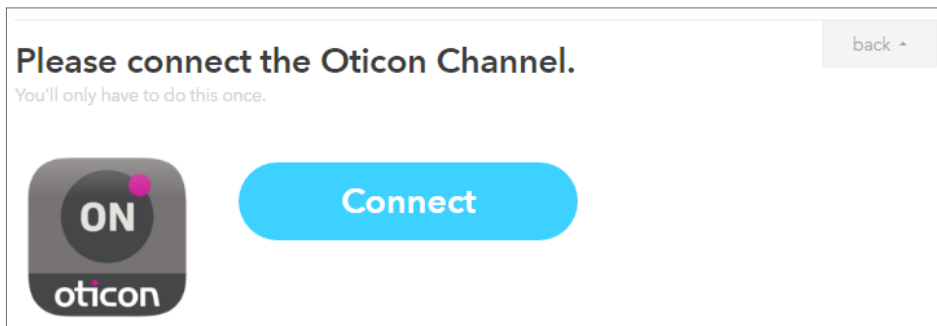

5

Cliquez sur « battery is low ».

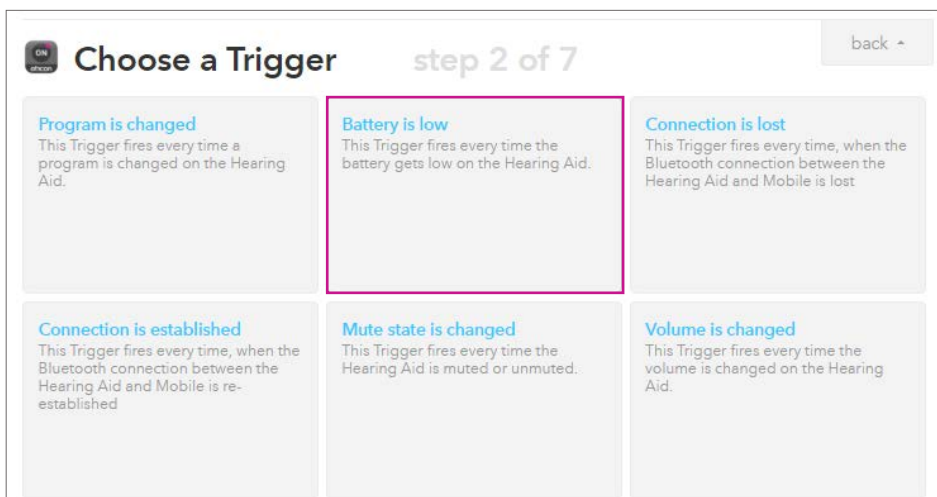

6

Puis cliquez sur le bouton bleu « Create Trigger ».

**Complete Trigger Fields** step 3 of 7

Battery is low

No fields to complete.

**Create Trigger**

back ▲

7

Cliquez sur le mot « that » en bleu

**if** **then** **that**

Battery is low

8

Tapez « sms » et choisissez l'icône « SMS » en cliquant dessus

**Choose Action Channel** step 4 of 7

Showing Channels that provide at least one Action. [View all Channels](#)

sms

Android SMS IF Notifications SMS

9

Cliquez sur « Connect ». Dans la fenêtre pop-up, suivez les instructions. Cliquez sur « Continue to the next step ».

**Please connect the SMS Channel.**

You'll only have to do this once.

sms **Connect**

back ▲


10

Choisissez l'action « Send me an SMS ».




11

Dans la fenêtre de message, inscrivez le message que vous souhaitez recevoir. Vous pouvez ajouter le pourcentage de batterie restant ou toute autre information concernant vos aides auditives en cliquant dans l'espace SMS puis sur l'icône en forme de bouteille bleue. Dans cet exemple, le pourcentage de batterie a été ajouté. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur « Create Action ».

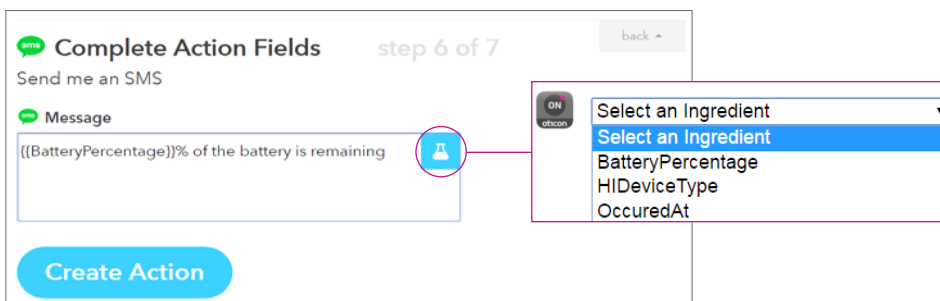

12

Enfin, cliquez sur « Create Recipe » pour créer et activer cette recette qui vous enverra un SMS lorsque votre pile sera faible.

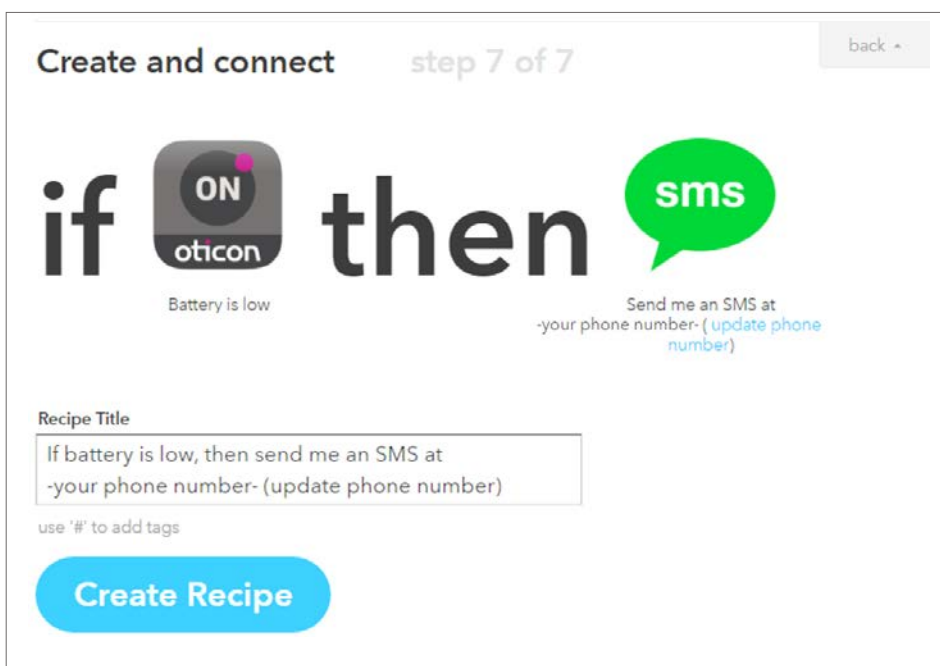

Votre recette est désormais créée. Bonnes connexions!