

# Oticon ON - Guide IFTTT

## Déclenchement du mode TV par la commande vocale

### Ce dont vous aurez besoin :

iPhone 5 (ou plus récent) · Compte IFTTT · Aides auditives Opn Appli ON · Compte ON · Amazon Echo\* · Appli Amazon Alexa  
Compte Amazon · Philips Hue Ambiance Color Starter Pack  
Appli Hue · Compte Hue

\*Vérifiez la disponibilité de cet équipement selon votre pays.

### Préparation

*Comment préparer votre iPhone :*


- Allez sur l'app store de votre iPhone
- Trouvez l'application Oticon ON dans les résultats de recherche et cliquez sur l'icône
- Trouvez et cliquez sur le bouton « installer » pour télécharger et installer l'application sur votre iPhone
- De la même manière, trouvez et installez les applications « Amazon Alexa » et « Philips Hue »
- Ouvrez Oticon ON. Suivez les instructions pour créer votre compte ON dans l'application

*Comment préparer votre Amazon Echo :*

- Déballiez votre Amazon Echo et branchez-le. Un message d'accueil apparaîtra. Suivez les instructions pour lancer l'application Alexa
- Si vous avez déjà un compte Amazon, connectez-vous en utilisant vos identifiants. Sinon, suivez les instructions pour créer un nouveau compte
- Suivez les instructions dans l'application pour installer Amazon Echo

*Comment préparer votre Philips Hue :*

- Installez votre(vos) ampoule(s) Philips Hue dans n'importe quelle(s) lampe(s) dans la pièce où se trouve votre TV
- Branchez le Philips Hue Bridge sur une prise de courant près de votre routeur WiFi
- Connectez-le à votre routeur WiFi en utilisant le câble LAN fourni dans la boîte d'origine Philips Hue. Assurez-vous que votre téléphone est connecté sur le même WIFI
- Ouvrez l'application Philips Hue et suivez les instructions à l'écran. Votre téléphone devrait maintenant être connecté aux lampes Philips Hue
- Dans l'application Hue, cliquez sur le menu, puis sur « Log in to my hue ». Connectez vous avec votre compte Google, votre compte Hue ou créez un nouveau compte. Puis appuyez sur « Log in »

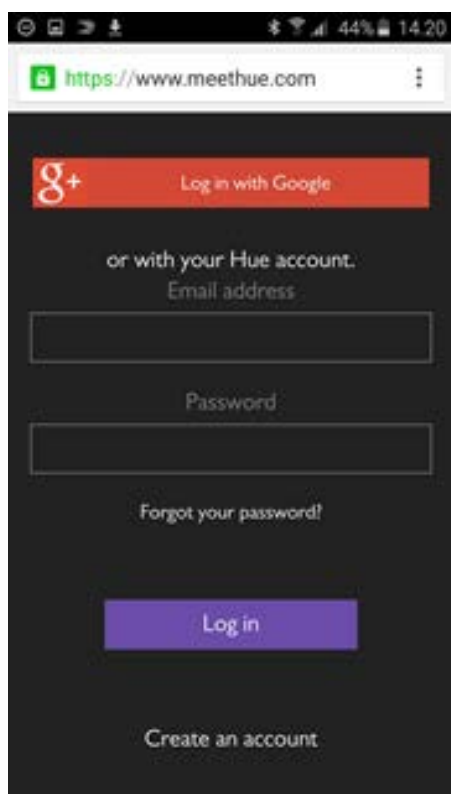

Comment créer un compte IFTTT :

- Allez sur [www.ifttt.com](http://www.ifttt.com) ou passez par l'application ON
- Cliquez sur « Sign Up » dans le coin en haut à droite
- Renseignez les informations demandées et cliquez sur « Create account »

## Create your free account

You're only seconds away from doing more with the products you love.


**Your Email**

**Choose a Password**

**Create account**

1

Allez sur [www.ifttt.com](http://www.ifttt.com), connectez-vous à votre nouveau compte IFTTT et cliquez sur « My Recipes » dans la barre de menu puis cliquez sur « Create a Recipe ».

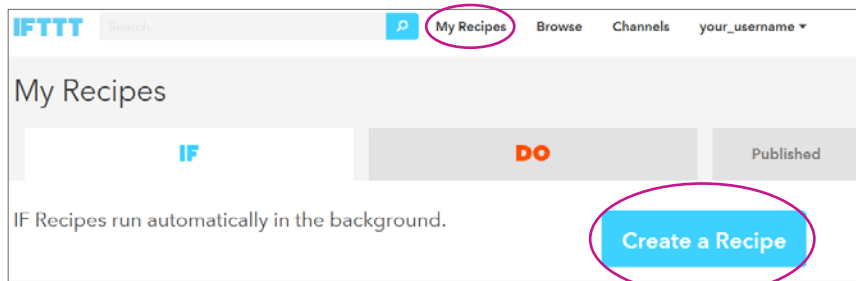

2

Cliquez sur le mot « this » en bleu



3

Dans la barre de recherche, tapez « alexa » et cliquez sur « Amazon Alexa ».

### Choose Trigger Channel **step 1 of 7**

Showing Channels that provide at least one Trigger. [View all Channels](#)

alexa



Amazon Alexa

4

Cliquez sur « Connect ». Dans la fenêtre pop-up, connectez-vous à votre compte Amazon. Cliquez sur « Done » suivi par « Continue to the next step ».

### Please connect the Amazon Alexa Channel.

You'll only have to do this once.



Connect



5

Cliquez sur « Say a specific phrase ».

### Choose a Trigger **step 2 of 7**

#### Say a specific phrase

This Trigger fires every time you say "Alexa trigger" + the phrase that you have defined. For instance, if you set "find my phone" as the phrase, you can say "Alexa trigger find my phone" to make your phone ring. Please use lower-case only.



#### Ask what's on your To Do List

This Trigger fires every time the you ask Alexa what's on your To Do List.

#### Item added to your To Do List

This Trigger fires every time you add an item to your To Do List.

6

Dans l'encadré, tapez « tv mode » et cliquez sur « Create Trigger »

### Complete Trigger Fields **step 3 of 7**

Say a specific phrase

#### What phrase?

tv mode

Use lower-case characters only

Create Trigger


7

Cliquez sur le mot « that » en bleu.




8

Dans la barre de recherche, tapez « hue » et cliquez sur l'icône « Philips Hue ».

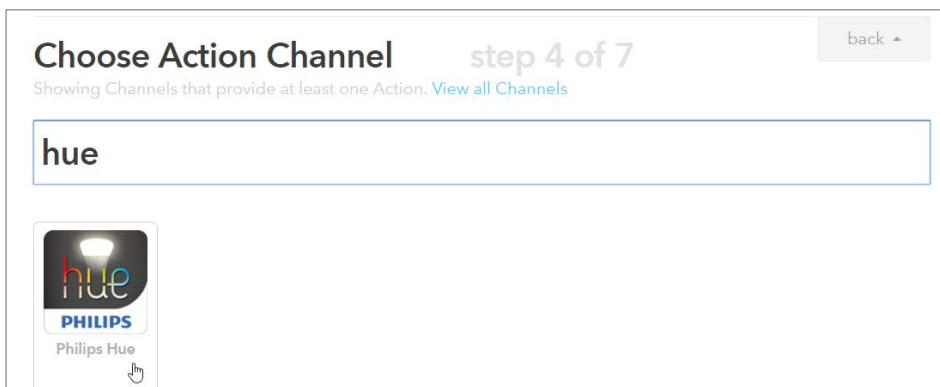


9

Cliquez sur « Connect » et connectez-vous à votre compte Philips Hue. Enfin, cliquez sur « Done » suivi par « Continue to next step ».

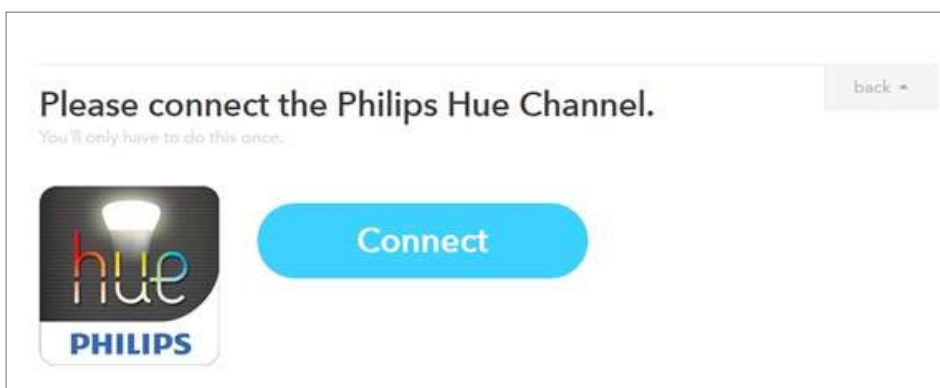


**Remarque :** Cliquez sur 'Yes' lorsque IFTTT vous demande l'accès à votre pont de connexion.

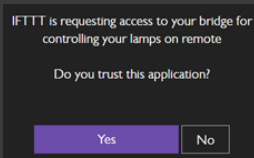

10

Choisissez l'action « Dim lights »

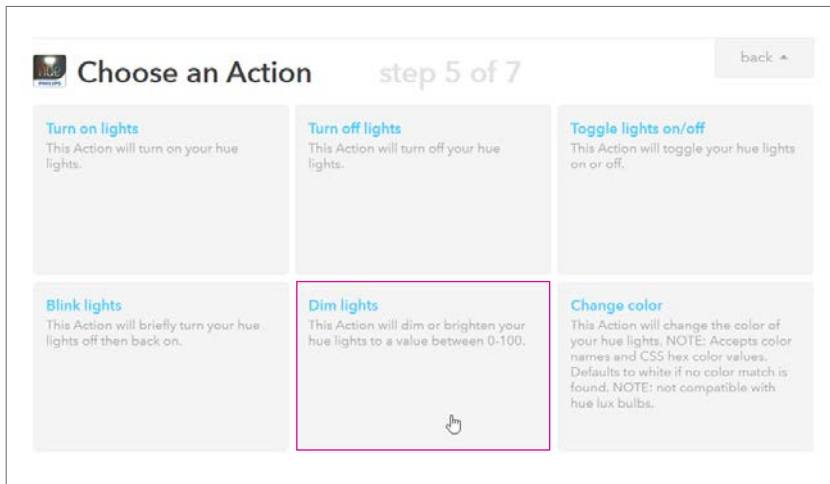


11

Dans le menu déroulant, sélectionnez « All lights » et dans le champ de texte, tapez, par exemple, « 15 » (15% de luminosité). Cliquez sur « Create Action »



12

Enfin, cliquez sur « Create Recipe » pour créer et activer la recette qui obscurcit la lumière quand vous dites « Alexa trigger TV mode ».

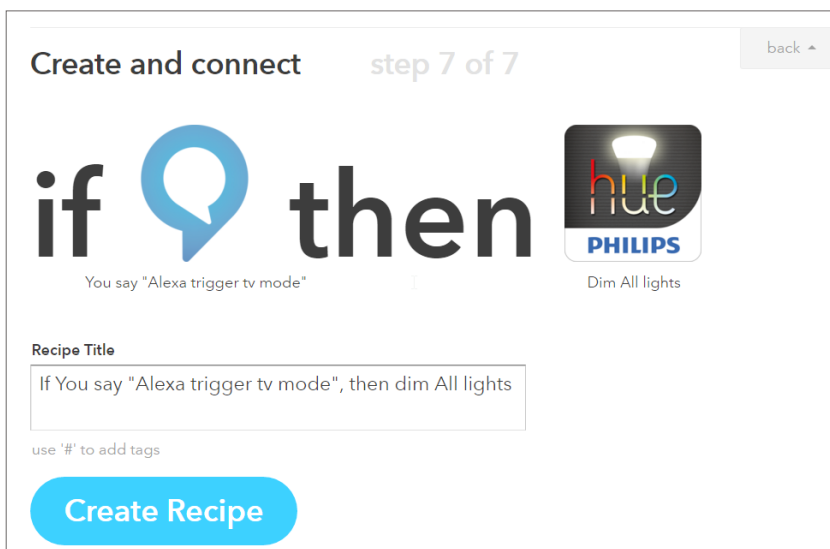

## Créer une requête pour changer la couleur de l'éclairage


13

Repétez les étapes 1-8.

Remarque : Vous pouvez sauter l'étape 4 puisque vous êtes déjà connecté à « Amazon Alexa »

14

Sélectionnez l'action « Change color »

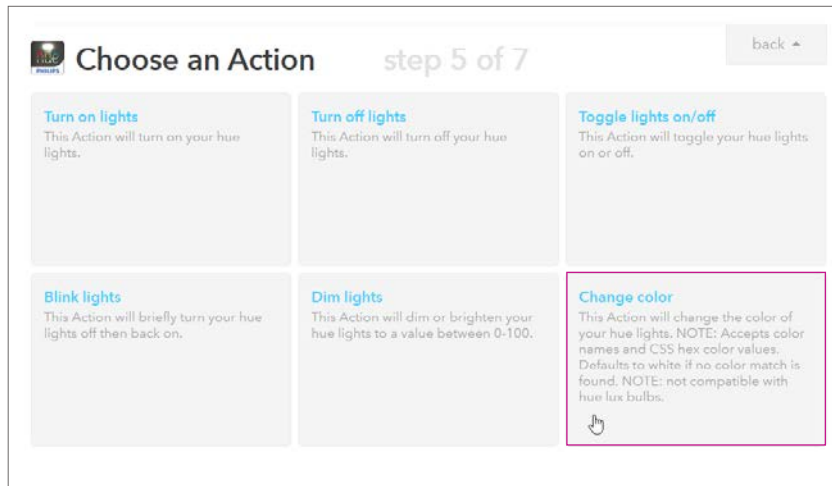


15

Dans le menu déroulant, sélectionnez « All lights ». Puis indiquez votre choix de couleur (vous pouvez également taper le code CSS à 6 caractères). Par exemple, tapez « rouge » pour rouge ou « FF99CC » pour rose. Cliquez sur « Create Action ».



16

Enfin, cliquez sur « Create Recipe » pour créer et activer la recette qui change la couleur de votre éclairage lorsque vous dites « Alexa trigger TV mode ».

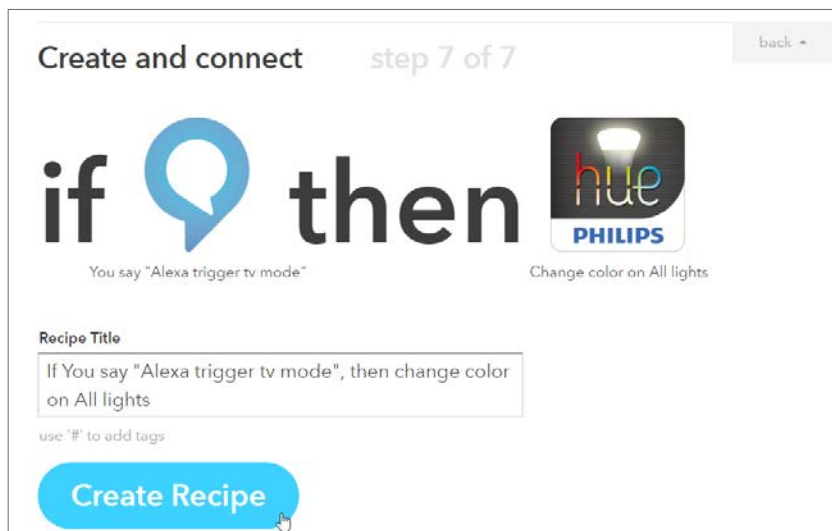

## Créer une requête pour passer en mode TV


17

Répétez les étapes 1-7.

Remarque : Vous pouvez sauter l'étape 4 puisque vous êtes déjà connecté à « Amazon Alexa »


18

Dans la barre de recherche, tapez « Oticon » et cliquez sur « Oticon ON »

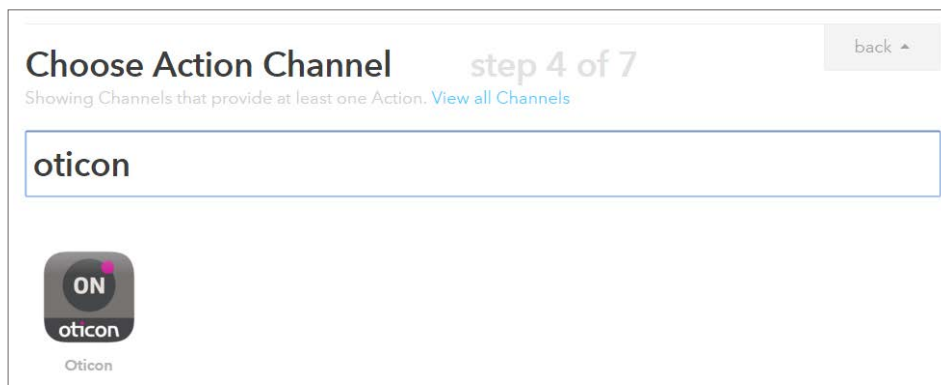


19

Cliquez sur « Oticon » et connectez-vous à votre compte Oticon ON (fenêtre pop-up)

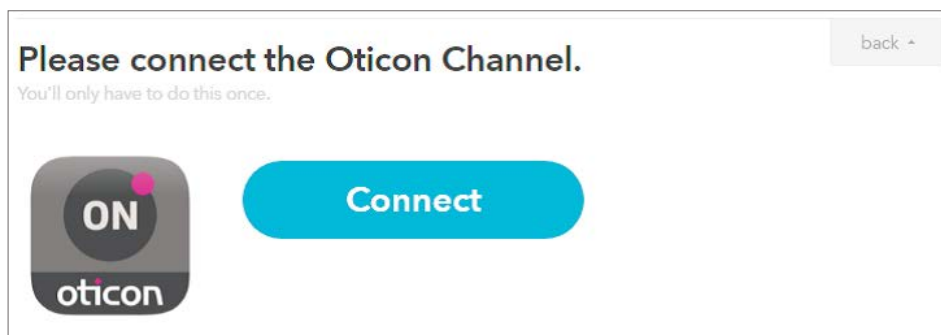

20

Choisissez l'action « Set a program »

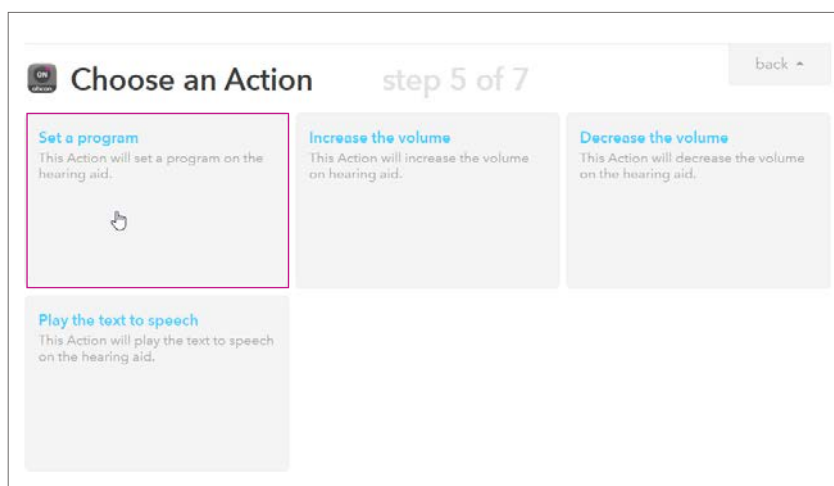

21

Dans le menu déroulant, sélectionnez le programme TV de votre aide auditive. Puis, cliquez sur « Create Action »

**Complete Action Fields** step 6 of 7 back

Set a program

**Program ID to be set**

Please select

Program ID to be set on the hearing aid (e.g. RESTAURANT - 2)

**Create Action**

22

Enfin, cliquez sur « Create Recipe » pour créer et activer la requête qui change de programme TV lorsque vous dites « Alexa trigger TV mode »

**Create and connect** step 7 of 7 back

**if then**

You say "Alexa trigger tv mode"

Set a program

**Recipe Title**

If You say "Alexa trigger tv mode", then set a program

use "#" to add tags

☐ Receive notifications when this Recipe runs

**Create Recipe**

Vos recettes sont désormais créées. Bonnes connexions !

**Remarque :** Nous recommandons de préparer également un mode « normal ». Pour cela, recommencer les étapes à nouveau, mais cette fois, utilisez la phrase d'accroche « mode normal » pour Alexa. Choisissez une couleur naturelle pour la teinte ainsi que votre niveau de luminosité préféré et puis définissez votre programme d'aide auditive pour « P1 »..