

Oticon ON - Guide IFTTT

Recevoir une notification en cas d'alarme incendie

Ce dont vous aurez besoin:

iPhone 5 (ou plus récent) · Compte IFTTT
Aides auditives Opn · Application ON · Compte ON
Nest Protect · Application Nest · Compte Nest

Préparation

Comment préparer votre iPhone :

- Allez sur l'app store de votre iPhone
- Trouvez l'application Oticon ON dans les résultats de recherche et cliquez sur l'icône
- Trouvez et cliquez sur le bouton « installer » pour télécharger et installer l'application sur votre iPhone
- De la même manière, trouvez et installez l'application « Nest » et installez votre « Nest Protect » en utilisant l'application
- Ouvrez Oticon ON. Suivez les instructions pour créer votre compte ON dans l'application

Comment créer un compte IFTTT :

- Allez sur www.ifttt.com ou passez par l'application ON
- Cliquez sur « Sign Up » dans le coin en haut à droite
- Renseignez les informations demandées et cliquez sur « Create account »

Create your free account

You're only seconds away from doing more with the products you love.

Your Email

Choose a Password

Create account

1

Allez sur www.ifttt.com, connectez-vous à votre nouveau compte IFTTT et cliquez sur « My Recipes » dans la barre de menu puis cliquez sur « Create a Recipe ».

IFTTT Search [p] My Recipes Browse Channels your_username ▾

My Recipes


IF DO Published

IF Recipes run automatically in the background.

Create a Recipe


2

Cliquez sur le mot « this » en bleu

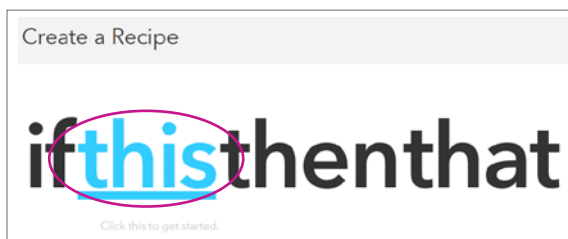


3

Dans la barre de recherche, tapez « nest » et cliquez sur l'icône « Nest Protect »

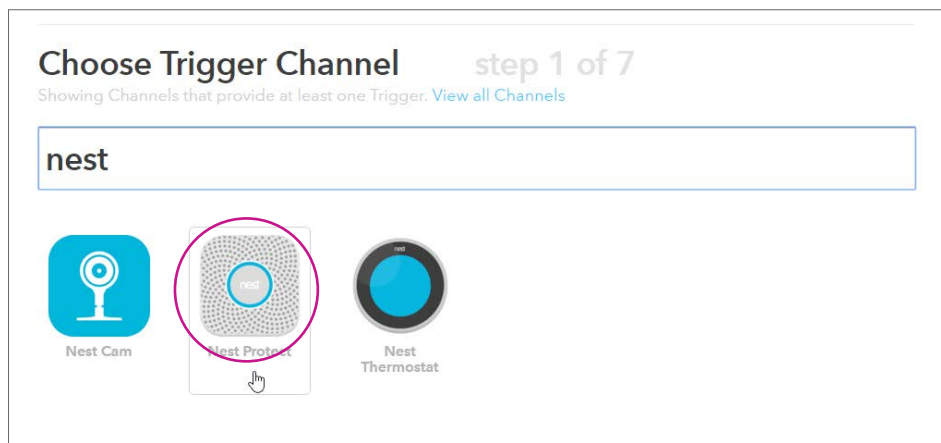


4

Cliquez sur « Connect ». Dans la fenêtre pop-up, faites défiler et cliquez sur « Continue ». Connectez-vous en utilisant vos informations d'identification de votre compte « Nest ». Cliquez sur « Done » suivi par « Continue to next step ».

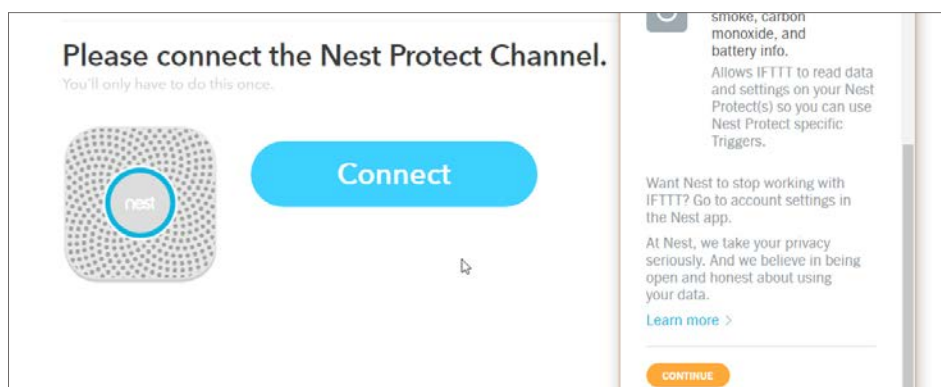

5

Cliquez sur « Smoke alarm emergency ».

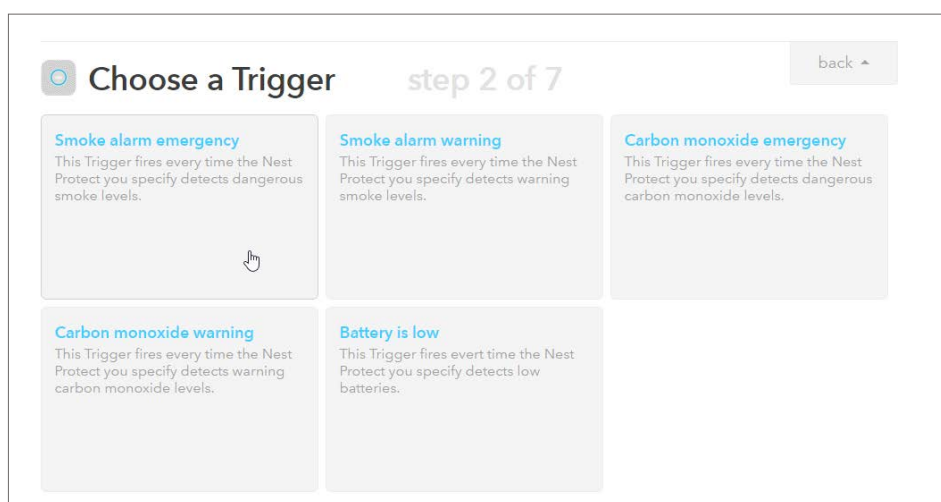

6

Sélectionnez votre Nest Protect dans le menu déroulant. Cliquez sur « Create trigger ».

Complete Trigger Fields step 3 of 7 back ▲

Smoke alarm emergency

Which device?

Please select

Please select

Living Room Nest Protect

Create trigger

7

Cliquez sur le mot « that » en bleu.

if  then **that**

Smoke alarm emergency by Living Room Nest Protect


8

Dans la barre de recherche, tapez « oticon », puis cliquez sur le logo « Oticon ON »

Choose Action Channel step 4 of 7 back ▲

Showing Channels that provide at least one Action. [View all Channels](#)

oticon




Oticon

9

«Cliquez sur connect» puis connectez-vous à votre compte Oticon ON.

Please connect the Oticon Channel. back ▲

You'll only have to do this once.

 **Connect**

10

Cliquez sur « Play the text to speech »

Choose an Action step 5 of 7 back ▲

Set a program
This Action will set a program on the hearing aid.

Increase the volume
This Action will increase the volume on hearing aid.

Decrease the volume
This Action will decrease the volume on the hearing aid.

Play the text to speech
This Action will play the text to speech on the hearing aid.

11

Dans la fenêtre de message, inscrivez le message que vous voulez recevoir, par exemple « Attention incendie (DeviceName) ». Vous pouvez ajouter d'autres informations sur l'alarme dans le message en cliquant dans la fenêtre, puis sur la bouteille bleue. Puis, cliquez sur « Create Action ».

Complete Action Fields step 6 of 7 back ▲

Play the text to speech

Text to be played by speech

Fire in {{DeviceName}} 🧴

Text to be played to speech (e.g. Hello user)

Select an Ingredient
Select an Ingredient
ReadAt
SmokeStatus
DeviceName

Create Action

12

Enfin, cliquez sur « Create Recipe » pour créer et activer la requête qui vous envoie une notification en cas d'alarme incendie.

Create and connect step 7 of 7 back ▲

if **then**

Smoke alarm emergency by Living Room Nest Protect

Play the text to speech

Recipe Title

If smoke alarm emergency by Living Room Nest Protect, then play the text to speech

use '#' to add tags

Receive notifications when this Recipe runs

Create Recipe

Votre recette est désormais créée. Bonnes connexions!