

Oticon ON - Guide IFTTT

Me prévenir lorsque mes enfants sont rentrés à la maison

Ce dont vous aurez besoin :

Aides auditives Opn · iPhone 5 (ou plus récent) · Appli Oticon ON
Compte ON · Compte IFTTT · Samsung SmartThings Hub
Samsung SmartThings Arrival Sensor · Compte SmartThings

Préparation

Allez sur l'app store de votre iPhone :

- Go to app store on your iPhone
- Trouvez l'application Oticon ON dans les résultats de recherche et cliquez sur l'icône
- Trouvez et cliquez sur le bouton « installer » pour télécharger et installer l'application sur votre iPhone
- De la même manière, trouvez et installez l'application mobile « SmartThings ».
- Ouvrez Oticon ON. Suivez les instructions pour créer votre compte ON dans l'application

Comment créer un compte IFTTT :

- Allez sur www.ifttt.com ou passez par l'application ON
- Cliquez sur « Sign Up » dans le coin en haut à droite
- Renseignez les informations demandées et cliquez sur « Create account »

Create your free account

You're only seconds away from doing more with the products you love.


Your Email

Choose a Password

Create account

1

Allez sur www.ifttt.com, connectez-vous à votre nouveau compte IFTTT et cliquez sur « My Recipes » dans la barre de menu puis cliquez sur « Create a Recipe ».

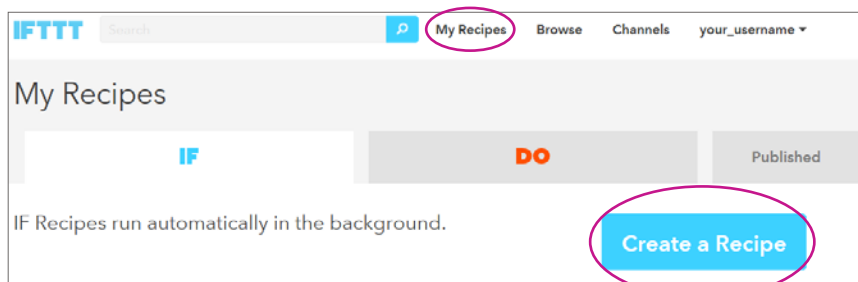


2

Cliquez sur le mot « this » en bleu




3

Dans la barre de recherche, tapez « smartthings » et cliquez sur « SmartThings ».

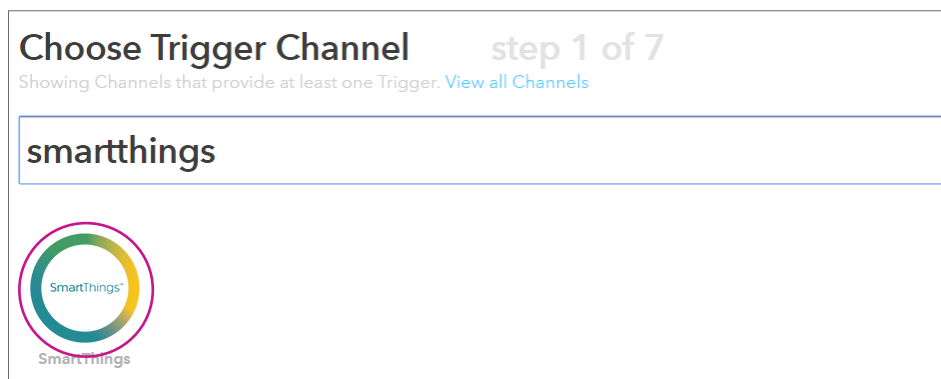

4

Cliquez sur « connect ». Dans la fenêtre pop-up, suivez le guide d'installation SmartThings. Puis cliquez sur « Continue to the next step ».

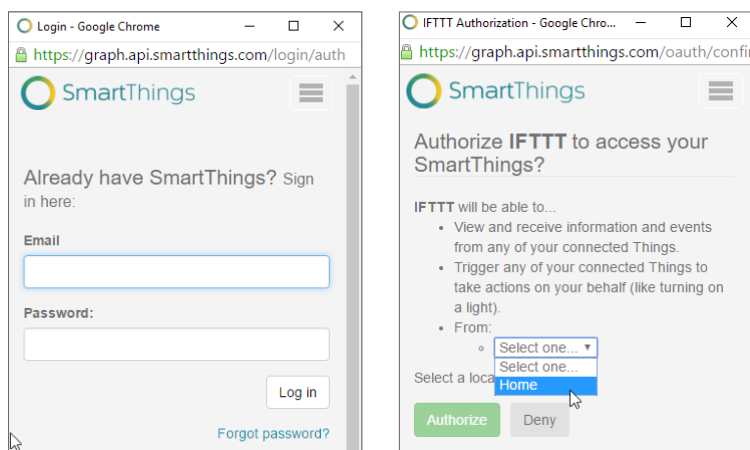

Remarque : Identifiez-vous avec le même compte que vous avez utilisé pour installer le Arrival Sensor de Samsung SmartThings. Ensuite, sélectionnez votre SmartThings Hub à partir de la liste et appuyez sur « Autorise » pour vous connecter à votre SmartThings Hub.

5

Choisissez ensuite « Presence detected »

Choose a Trigger step 2 of 7 back ▲

- Switched on**
This Trigger fires every time your SmartThings device is switched on.
- Switched off**
This Trigger fires every time your SmartThings device is switched off.
- Opened**
This Trigger fires every time your SmartThings device is opened.
- Closed**
This Trigger fires every time your SmartThings device is closed.
- Locked**
This Trigger fires every time your SmartThings device is locked.
- Unlocked**
This Trigger fires every time your SmartThings device is unlocked.
- Any new motion**
This Trigger fires every time your SmartThings device senses motion.
- Presence detected**
This Trigger fires every time your SmartThings device's presence is detected.
- Presence no longer detected**
This Trigger fires every time your SmartThings device's presence is no longer detected.

6

Choisissez votre Arrival Sensor à partir de la liste. Appuyez sur « Create Trigger »

Complete Trigger Fields step 3 of 7 back ▲

Presence detected

Which device?
Arrival Sensor ▼

Create Trigger

7

Cliquez sur le mot « that » en bleu

if **then** that

Arrival Sensor presence detected

8

Tapez « Oticon » et sélectionnez l'application en cliquant sur « Oticon ON ».

Choose Action Channel step 4 of 7 back ▲


Showing Channels that provide at least one Action. [View all Channels](#)

oticon

ON
oticon
Oticon


9

Cliquez sur Connect. Dans la fenêtre pop-up, connectez-vous à votre compte Oticon ON

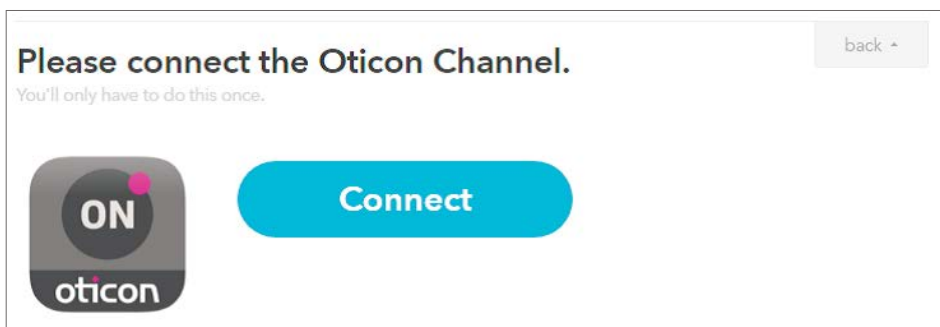


10

Cliquez sur l'action « Play text to speech ».

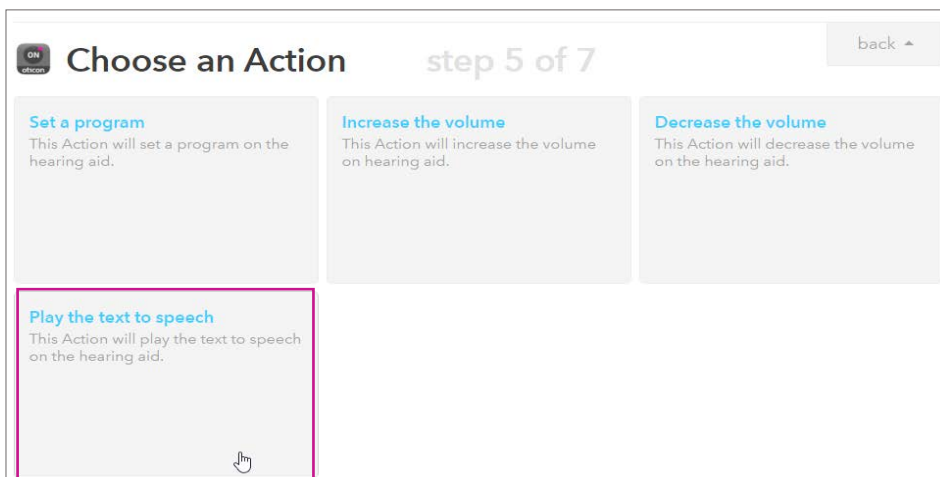


11

Tapez le message que vous voulez recevoir. Par exemple vous pourriez écrire « Peter vient d'arriver à la maison ». Puis appuyez sur « Create Action ».

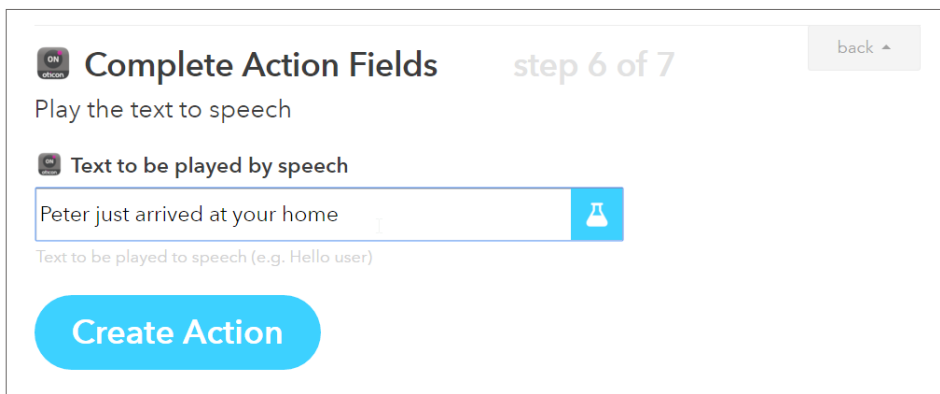

12

Enfin, cliquez sur « Create Recipe » pour créer et activer la recette qui vous prévient quand vos enfants sont rentrés à la maison.

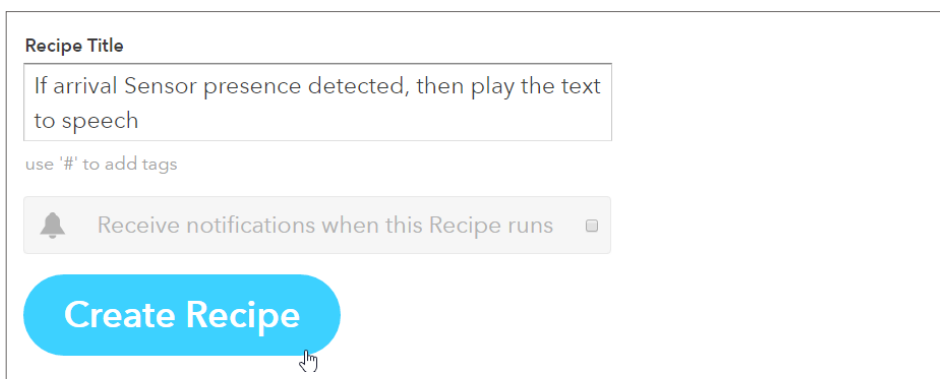

Votre recette est désormais créée. Bonnes connexions !