

Oticon ON - Guide IFTTT

Changer de programme auditif en le disant

Ce dont vous aurez besoin :

Aides auditives Opn · iPhone 5 (ou plus récent) · Appli Oticon ON
Amazon Echo* · Compte ON · Compte IFTTT · Appli IF

*Vérifiez la disponibilité de cet équipement selon votre pays.

Préparation

Comment préparer votre iPhone :


- Allez sur l'app store de votre iPhone
- Trouvez l'application Oticon ON dans les résultats de recherche et cliquez sur l'icône
- Trouvez et cliquez sur le bouton « installer » pour télécharger et installer l'application sur votre iPhone
- De la même manière, installez l'application « Amazon Alexa »
- Ouvrez Oticon ON. Suivez les instructions pour créer votre compte ON dans l'application

Commencer avec Amazon Echo :

- Branchez votre Amazon Echo sur le secteur. Après un instant, vous entendrez un message de bienvenue qui vous demandera d'ouvrir l'application Amazon Alexa.
- Ouvrez alors l'application sur votre iPhone
- Si vous avez un compte Amazon, connectez-vous avec vos identifiants. Si non, créez un compte
- Suivez les instructions pour installer Amazon Echo

Comment créer un compte IFTTT :


- Allez sur www.ifttt.com ou passez par l'application ON
- Cliquez sur « Sign Up » dans le coin en haut à droite
- Renseignez les informations demandées et cliquez sur « Create account »

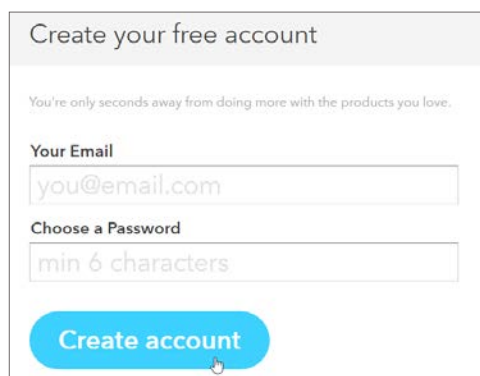

The screenshot shows the 'Create your free account' page on IFTTT. It includes a sub-header 'You're only seconds away from doing more with the products you love.' Below this are two input fields: 'Your Email' with the placeholder 'you@email.com' and 'Choose a Password' with the placeholder 'min 6 characters'. At the bottom is a blue button labeled 'Create account'.

1

Allez sur www.ifttt.com, connectez-vous à votre nouveau compte IFTTT et cliquez sur « My Recipes » dans la barre de menu puis cliquez sur « Create a Recipe ».

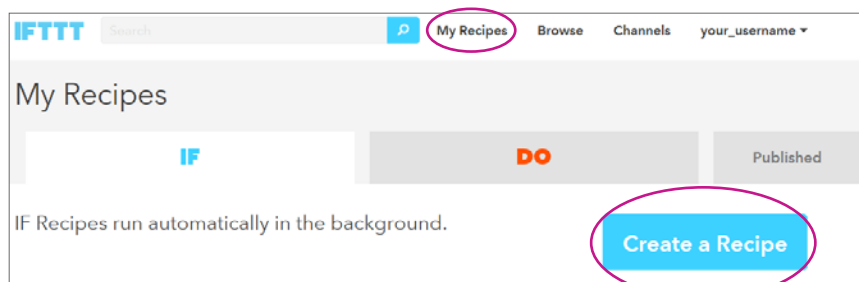

The screenshot shows the 'My Recipes' page on IFTTT. The top navigation bar includes 'IFTTT', a search bar, a profile icon, and links for 'My Recipes', 'Browse', 'Channels', and 'your_username'. The 'My Recipes' link is circled in pink. Below the navigation bar, the page title 'My Recipes' is followed by a header with 'IF', 'DO', and 'Published' tabs. A blue button labeled 'Create a Recipe' is circled in pink at the bottom right. Below the header, it says 'IF Recipes run automatically in the background.'


2

Cliquez sur le mot « this » en bleu




3

Dans le champ de recherche, tapez « Alexa » et cliquez sur l'icône « Amazon Alexa »

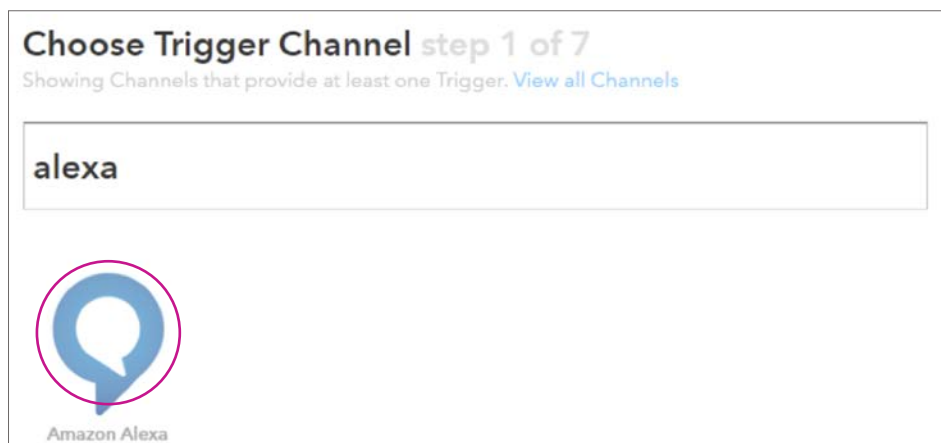


4

Cliquez sur « Connect ». Dans la fenêtre pop-up, connectez-vous à votre compte Amazon. Cliquez sur « Continue to the next step »

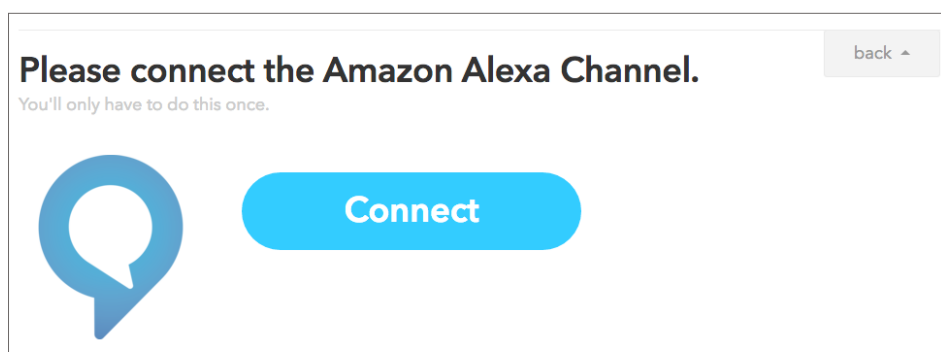


5

Cliquez sur « Say a specific phrase »

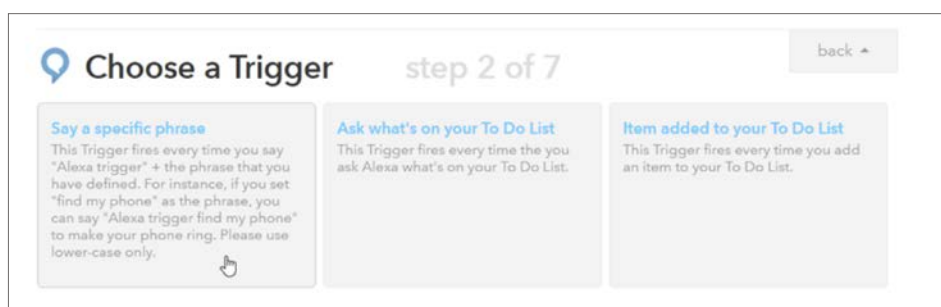

6


Dans le champ texte, tapez « programme 3 » (ou le numéro du programme que vous souhaitez). Cliquez sur « Create Trigger ».


Complete Trigger Fields

step 3 of 7

back

Say a specific phrase

 **What phrase?**

Use lower-case characters only

Create Trigger

7

Cliquez sur le mot « that » en bleu



8


Tapez « Oticon » dans la barre de recherche et choisissez «Oticon ON »

Choose Action Channel

step 4 of 7

back

Showing Channels that provide at least one Action. [View all Channels](#)



Oticon


9

Cliquez sur Connect. Dans la fenêtre pop-up, connectez-vous à votre compte Oticon ON

Please connect the Oticon Channel.

back

You'll only have to do this once.



Connect

10

Sélectionnez l'action « Set a program »

Choose an Action step 5 of 7 back

Set a program
This Action will set a program on the hearing aid.

Increase the volume
This Action will increase the volume on hearing aid.

Decrease the volume
This Action will decrease the volume on the hearing aid.

Play the text to speech
This Action will play the text to speech on the hearing aid.

11

Choisissez le programme voulu dans la liste. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Create Action ».

Complete Action Fields step 6 of 7 back

Set a program

Program ID to be set

Please select

Please select

Program ID to be set on the hearing aid (e.g. RESTAURANT)

Create Action

Please select

P1

P2

P3

TV1

iPhone Mic

12

Enfin, cliquez sur « Create Recipe » pour créer et activer la recette qui changera le programme de votre aide auditive lorsque vous le direz à voix haute.

Create and connect step 7 of 7 back

if then

You say "Alexa trigger program three"

Set a program

Recipe Title

If You say "Alexa trigger program three", then set a program

use '#' to add tags

☐ Receive notifications when this Recipe runs

Create Recipe

Votre recette est désormais créée. Bonnes connexions!